



A SWISS BRAND

COMPRESSOR NEBULIZER

MODEL TURBO MINI
USER'S MANUAL



dr-frei.com

- EN COMPRESSOR NEBULIZER**
Model TURBO MINI
User's manual (4-8)
- RU ИНГАЛЯТОР КОМПРЕССОРНЫЙ**
Модель TURBO MINI
Руководство по эксплуатации (8-13)
- UA ІНГАЛЯТОР КОМПРЕСОРИЙ**
Модель TURBO MINI
Настанова з експлуатації (13-18)
- LT KOMPRESORINIS INHALIATORIUS**
Modelis TURBO MINI
Naudotojo vadovas (18-23)
- LV KOMPRESORA INHALATORS**
Modelis TURBO MINI
Lietotāja instrukcija (23-28)
- EE KOMPRESORA INHALATORS**
Modelis TURBO MINI
Kasutusjuhend (28-32)
- RO NEBULIZATOR CU COMPRESOR**
MD Model TURBO MINI
Manual de utilizare (33-37)
- KZ КОМПРЕССОРЛЫҚ ИНГАЛЯТОР**
TURBO MINI модели
Қолданушы ережелері мазмұны (38-42)
- BG КОМПРЕСОРИЕН ИНХАЛАТОР**
Модел TURBO MINI
Инструкция за употреба (43-48)

**DEAR DR. FREI COMPRESSOR NEBULIZER OWNER**

Thank you for choosing **Dr. Frei®** Compressor Nebulizer model TURBO MINI. We are sure that having appraised worthily the high quality and reliability of this device you will become a regular user of the products of Swiss trademark **Dr. Frei®**. Your nebulizer is intended for use in treatment of asthma, COPD and other respiratory ailments in which an aerosolized medication is required during therapy. Aerosol easily and quickly comes to both upper and lower respiratory tracks. Before starting to use the compressor nebulizer please study the user's manual carefully. Following the rules stated in the user's manual will provide for the faultless operation of the compressor nebulizer for a long period of time. For all questions concerning the unit please contact service centre of distributor of trademark **Dr. Frei®** in your country.

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	4
What is a nebulizer and how does it work?.....	4
What is nebulizing therapy used for?.....	4
What are the advantages of nebulizing therapy?.....	4
BEFORE STARTING TO USE THE UNIT	4
Important Safety Information.....	4
Unit Accessories.....	5
CARRYING OUT NEBULIZING THERAPY	5
Operating the Unit.....	5
Operating the Nasal Washer. Optional.....	6
Changing the Air Filter.....	6
UNIT MAINTENANCE	6
Cleaning the Unit.....	6
Troubleshooting.....	6
TECHNICAL SPECIFICATIONS	7
SYMBOL DESCRIPTION	7
WARRANTY	7
MANUAL AND DECLARATION OF THE CONSTRUCTOR-ELECTROMAGNETICS EMISSIONS	8

INTRODUCTION

What is a nebulizer and how does it work?

The compressor nebulizer system is a device that turns a liquid drug into a fine aerosol under the influence of the compressed air. Aerosol contains large and small particles. When breathing the gravity makes the larger particles accumulate on the walls of the upper respiratory passages while the smaller particles have enough time to reach the lower bronchial branches. Therefore the drug comes to all parts of the patient's bronchial tree, including the smallest bronchi and alveoli, and gets into the blood vessels on the walls of the alveoli in big therapeutic doses with tiny or none side effects.

What is nebulizing therapy used for?

Nebulizer systems are used by the patients with:

- acute respiratory diseases,
- obstructive pulmonary disease,
- chronic inflammatory processes in respiratory passages such as chronic bronchitis, bronchial asthma (incl. chronic or unstable ones, exacerbation of asthma), chronic pharyngitis,
- respiratory passages infections,
- abnormalities in secretion quality and secreting in bronchi,
- different types of coughing.

What are the advantages of nebulizing therapy?

Nebulizing therapy gives a possibility to quickly effect the inflammatory zone by big drug doses which increases the influence of the treatment and reduces the risk of side effects to other organs. Nebulizing therapy is the easiest way of inhalation treatment and it is also an economical means of treatments from the point of view of purposeful use of drug. Aerosol treatment with the help of nebulizing systems can be used for children, elderly and infirm patients.

BEFORE STARTING TO USE THE UNIT

Important Safety Information

- Carefully read the instructions before use. Keep this instruction manual for future references.
- Use the device only as inhalator for therapeutic purposes. Medicine type, mode and time of application are only under medical limitation. Installation operations have to be done according to the instruction in this handbook and only for the uses declared from the constructor.
- This device is unsuitable for use with inflammable anaesthetic mixtures containing air, oxygen or nitrogen protoxide.
- The proper functioning of device can be affected by electromagnetic interference caused by malfunctioning of your television, radio, etc. If this happens, try to move the device until the interference disappears, or try to connect to a different outlet.
- Never use extension cords or adapters. It is recommended to always carry the power cord to prevent dangerous overheating. Keep the cord away from hot surfaces.

- Always disconnect the device from the main socket after use and before cleaning operations.
- Do not touch the device if it accidentally falls into the water. Unplug it immediately and do not use afterward. Contact one of authorized service centers.
- Do not use the device with wet hands.
- Do not obstruct cooling grills.
- During use, make sure that the unit is placed on a flat and stable surface to prevent any spillage.
- Do not use the device when patient is sleeping.
- Refer all servicing to the Service Centre. Do not open the equipment. If the device does not work properly turn it off and consult the instruction booklet.
- Do not leave any packaging materials (plastic bags, cardboard boxes, and so on) within the reach of children to prevent dangers.
- Keep accessories out of reach of children. Children and people with reduced physical or mental capacities need to use the device only under close surveillance of an adult who has read this instruction manual. Keep the medicine cup out of the reach of children under 36 months because it contains small parts that could be ingested.
- Always disconnect the device from the main socket when it is not used.
- It is recommended to use one personal medication set of accessories.
- Do not leave pharmaceutical residual into the medicine cup and/or into the accessories at the end of the therapy.
- Cleaning and / or maintenance must be done only after turning off the device and unplugging the power cord from the outlet.
- Do not pull cable or appliance in order to remove the plug.
- This is a medical device for home use and should be used on medical prescription. Must be run as indicated on this user's instructions. It's important that patients read and understand the information for the use and maintenance unit. Contact your dealer or Service Centre for any questions.
- If the equipment's plug does not fit the socket, contact a qualified technician to substitute the plug. Do not use adaptors, multiple sockets and/or extensions.
- Do not obstruct the air intake.
- The installation must be done according to the instructions and use declared by the manufacturer. Improper installation and / or improper use may cause damage to persons, animals or things. The manufacturer can not be held responsible.
- Do not use the device while bathing and showering.
- Do not expose the device to the action of dust (that could obstruct the cooling grids), heat (that could deform the housings), sunlight or other atmospheric agents that could compromise the safety of the device itself.
- Do not use the device nearby sources of potential interference (example: heat sources like fireplaces, electric or gas heaters; steam sources like boilers or kettles, electromagnetic radiation sources like microwave ovens, Wi-Fi devices).
- Keep away from pets that could contaminate the surface in contact with the patient, close the ventilation grid, or in general avoid the right performance of the therapy.
- The appliance generates compressed air. Secondary consequences could come from the intolerance to the medicine used.




Electric devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL DURING THE WHOLE SERVICE LIFE OF THE UNIT

Unit Accessories

- ① Nosepiece
- ② Mouthpiece
- ③ Adult mask
- ④ Pediatric mask
- ⑤ Medicine Cup - topside
- ⑥ Medicine Cup - underside
- ⑦ Medicine Cup - air entrance
- ⑧ Pisper
- ⑨ Connecting Tube
- ⑩ Air filters (5 pcs) - Replacement

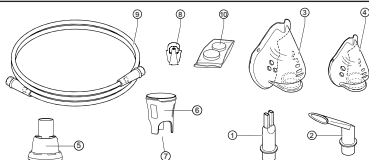


CARRYING OUT NEBULIZING THERAPY

The appliance is a medical device of class IIa, which converts medicine from the fluid form to vapour in order to administer it directly into the breathing apparatus. The appliance nebulizes medicines both in suspension and in solution. The therapeutic effect could be reduced with oily and/or pasty medicines. The appliance is NOT a nebulizer for essential oil. Don't nuke liquid and/or alcohol solutions. Medicine cup and all accessories have been NOT sterilized. Before use read «Unit maintenance» paragraph.

Operating the Unit


1. Put the device on a flat, stable surface.
2. Ensure that the rated voltage corresponds to the mains voltage supply.
3. Connect the device into the main socket.
4. Open the medicine cup unscrewing the two parts (A).
5. Insert the pisper in the nozzle of medicine cup - underside as illustrated in Figure (B).
6. Fill in the lower part of the medicine cup with the pharmaceutical (C). Note: The notches on the lower part of medicine cup are only indicative.
7. Close the medicine cup screwing back on the two parts (D).
8. Connect the air cable (9) to the medicine cup (E).
9. Connect the air cable (9) to the air exit of the appliance.
10. Insert on the medicine cup the needed accessory: mask, mouthpiece or nosepiece (F).

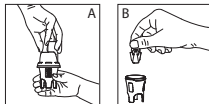

- Turn on the device moving the switch to ON position.
- After the application, turn off the device and unplug. Before restarting the appliance make sure it has cooled to room temperature environment.

WARNING FOR A GOOD APPLICATION OF THE THERAPY:

- Sit down in a comfortable and upright position.
- If a mask (adult or children) is used, be sure that it adheres to the face. Mask has holes for the air flow during the expiration phase. Breathe easy and have a short pause at the end of each breathe.
- If the mouthpiece is used, keep it lightly among the teeth with tight-lipped. Respiration must be done through the mouth.
- If the nosepiece is used, put it softly on the nostrils. Don't insert it in the nose. Respiration must be done through the nose.
- Therapeutic application ends when the medicine came out in a discontinuous mode (spluttering).

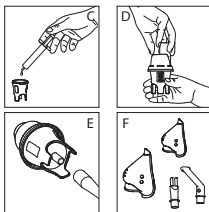


Operating the Nasal Washer. Optional

It can be bought as a spare part to this compressor nebulizer.

The nasal washer is intended for cleaning of a cavity of a nose and treatment of cold and chronic rhinitis.

To use the nasal washer, follow the instructions below:

- Unscrew the top part (a).
- Fill in the medicine tank (b).
- Insert the pisper (c).
- Close the nasal washer screwing back the two parts.
- Connect the tube to the air inlet (d).
- Put the nasal washer near the nostrils. Don't insert it in the nose.
- After the therapy, clean carefully the nasal washer.

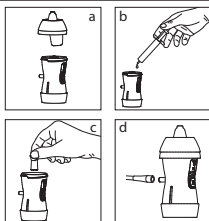


ATTENTION:

Do not inhale horizontally. Do not tilt the medicine cup over 45°. Keep the accessories well ventilated, protected from heat and direct sunlight (F).

Changing the Air Filter

The filter has to be substituted after 30 hours of use or when it becomes grey. Filter replacement parts (H). For filter replacing, raise the lid using a flat screwdriver as shown in the picture I. Remove the filter and fit a new filter (10). Fit the filter carrier lid into its housing making sure it is adherent to the surface.

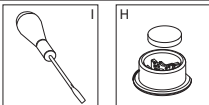

UNIT MAINTENANCE

Cleaning the Unit

After each therapy remove the device from the socket and clean the device and the accessories. Attention: use only the accessories supplied with the product, other accessories can lead to ineffective therapy.

CLEANING OF THE MOUTHPIECE AND NOSEPIECE

Use drinking water to carefully clean these accessories, when used. They can be sterilized by boiling for 5-10 minutes into the water or by immersion in a chemical disinfectant (oxidizing electrolytic chloride), following product instructions and rinsing off with drinking water. Leave to dry naturally.

CLEANING OF THE MEDICINE CUP

After use, open the two parts, wash with soap and hot water and rinse it carefully. Remove excess of water with a soft, clean and dry cloth and leave to dry naturally in a clean place. To sterilize, cover the medication container with a cold sterilizing solution, following the instructions on the sterilizer pack. It is recommended to use one personal medication container for each patient, to be used for 6 months or 120 treatments. Do not use boiling water to clean it. Carefully wash mask and hoses with disinfectant solution only.

CONTAMINATION BY MICROBES

In case of pathologies of microbial or viral origin, where infection is possible, the device and its accessories should not be shared with other patients.

Troubleshooting

PROBLEM	ACTION
The device is not turning on.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the plug has been correctly inserted in the main supply. Make sure switch is on the position turned on (I).

The device is turned on but it's not nebulizing.

- Make sure to have inserted the pisper into the medicine cup (8).
- Make sure the air connection pipe is not bended or crushed (9).
- Make sure air suction filter is not stopped or dirty. In that case replace it with a new one (10).
- Make sure the medicine cup has been filled in with medicine.

NOTE: If the device shall not take again his correct functioning in spite of inspections effected, contact the TM Dr. Frei® service center in your country.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Piston rotary presser, without lubrication. Medical device of class IIA according to Directive 93/42/EEC. Medicine Cup Linear.

Particles dimension: 3 µm MMAD (EN13544-1); **Product description:** Compressor nebulizer; **Nebulization rate, ml/min:** 0.3 ± 0.05 ml/min;

Compressor air flow (max): 15 ± 2 l/min; **Medication capacity:** 2 - 10 ml; **Residual volume, ml:** 0.85 ± 0.2 ml;

Sound noise level: Low noise (around 55 Db); **Operating cycles:** 30 min - ON/30 min - OFF;

Accessories: Air tube (1,0 m), adult mask, child mask, mouthpiece, nosepiece, air filters (5 pcs.) **Nasal washer:** Optional; **Power source:** 220V/50Hz;

Power lead length: 1,4 m; **Weight:** 1,3 kg; **Dimensions:** 167*106*164 mm; **Power:** 120 VA;

Operating conditions:

Ambient temperature: min 5°C - max 40°C

Air humidity: min 15% RH - max 93% RH

Atmospheric pressure: min 700hPa - max 1060hPa (max operating altitude ≤ 2000 m)

Storage conditions:

Ambient temperature: min -25°C/max +70°C

Air humidity: min 0%RH - max 93%RH











Atmospheric pressure: min 500 hPa - max 1060 hPa

* Subject to technical modification without prior notice.

This device has an expected service life of about 2.000 therapy cycles, basing on an average therapy duration of 8 min.

Electromedical devices require special care. During installation and use with respect to EMC requirements, it therefore required that they are installed and/or used according to the manufacturer's specification. Potential risk of electromagnetic interference with other devices, in particular with other devices for analysis and treatment. Radio and mobile telecommunications devices or portable RF (mobile phones or wireless connections) may interfere with the operation of electromedical device.

SYMBOL DESCRIPTION

SYMBOL	REFERENT	SYMBOL	REFERENT
	Alternate current		Medical CE mark ref. Dir 93/42 EEC
	Double insulation		Do not use the appliance when taking a bath or shower
	BF applied part	I/ON	Switch ON
	Obligation to read instruction manual	O/OFF	Switch OFF
	General warning symbol		Read instruction manual
IP 21	Protection against solid and liquid bodies penetration (protected against solid bodies over 12 mm; protected against access with a finger; protected against vertically falling water drops).		Keep dry
	This product (including its related accessories) must be delivered at the end of its service life at a collection point for the recycling by electric and electronic devices, by the user or by His dealer.		

WARRANTY

This device is guaranteed for 2 years from the date of purchase. The warranty does not cover the accessories supplied with the device and those parts subject to normal wear and tear. The guarantee is valid only on presentation of the guarantee card completed by the dealer confirming date of purchase and the receipt.

- Should the unit be damaged due to user misuse or negligence, the manufacturer or authorized dealers shall not be responsible for any damage or loss to the unit.
- All assembly, extension, adjustment or repair of this unit must be performed only by the authorized service center of **Dr. Frei®** distributor in your country. For repairs or to purchase parts, please contact the authorized service center of **Dr. Frei®** distributor in your country.

MANUAL AND DECLARATION OF THE CONSTRUCTOR - ELECTROMAGNETICS EMISSIONS

The appliance for aerosol therapy can be use in the electromagnetic setting here indicated:

Emission test	Compliance	Manual to the electromagnetic setting
Irradiate/conducted emission	Group1	The disposal used the energy RF only for its internal function. So its RF emissions are very low and they do not cause any interferences to other electrical appliances.
Irradiate/conducted emissions CISPR11 Harmonic emissions IEC/EN 61000-3-2 voltage/flicker fluctuations IEC/EN 61000-3-3	Class (B)	The appliance is adapt to be used in all the setting, include the domestic environment and all the settings connecting to the distribution public net which give alimentation to the environment used for domestic use.
	Class (A)	
Electrostatic discharges(ESD) IEC/EN 61000-4-2	±6kV in contact ±8kV in air	The floors should be done in wood, cement or ceramics. If the floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be as a maximum of 30%.
Speed/burst transitors IEC/EN 61000-4-4	±2kV power	The supply should be typical of a hospital or a commercial setting.
Surge IEC/EN 61000-4-5	±1kV differential mode	The supply should be typical of a hospital or a commercial setting.
Voltage hole, short breaks and voltage change IEC/EN 61000-4-11	<5%UT for 0.5 cycle 40%UT for 05 cycles 70%UT for 25 cycles <5%UT for 5 sec.	The supply should be typical of a hospital or a commercial setting. If the user needs a continuing working of the device, it's recommended to use the appliance under a continuity group.
Magnetic field IEC/EN 61000-4-8	3A/m	The magnetic field should be typical of a hospital or a commercial setting.
Conducts immunity IEC/EN 61000-4-6	3Vrms 150kHz to 80 MHz 8 (for appliances life-supporting)	
Irradiate immunity IEC/EN 61000-4-3	3V/m 80 MHz to 2.5GHz (for appliances NOT life-equipment)	

NOTE: UT is the value of the supply voltage.

RU **УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КОМПРЕССОРНОГО ИНГАЛЯТОРА (НЕБУЛАЙЗЕРА) TURBO MINI**
 Благодарим Вас за выбор небулайзера TM Dr. Frei® модели TURBO MINI. Мы уверены, что, по достоинству оценив качество данного прибора, Вы станете постоянным пользователем продукции Швейцарской торговой марки Dr. Frei®.
 Ваш небулайзер предназначен для лечения астмы, хронических obstructивных заболеваний легких и других респираторных заболеваний путем превращения жидких лекарственных средств в аэрозоль, который быстро и надежно проникает как в верхние, так и в нижние дыхательные пути. Перед тем как начать пользоваться небулайзером, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Соблюдение требований, перечисленных в ней, обеспечит бесперебойную работу небулайзера в течение длительного времени. По всем вопросам, относительно данного продукта, пожалуйста, обращайтесь к официальному представителю или в сервисный центр TM Dr. Frei® в Вашей стране.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9
Что такое небулайзер и как он работает?	9
Когда применяется небулайзерная терапия?	9
Преимущества небулайзерной терапии	9
ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	9
Важная информация по безопасности	9
Набор аксессуаров	10
ВЫПОЛНЕНИЕ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТЕРАПИИ	10
Эксплуатация прибора	10
Эксплуатация насадки для промывания носа. Опция	11
Замена воздушного фильтра	11

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА.....	11
Очистка.....	11
Устранение неисправностей.....	11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА.....	12
ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ.....	12
ГАРАНТИЯ.....	13
УКАЗАНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ-ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.....	13

ВВЕДЕНИЕ

Что такое небулайзер и как он работает?

Компрессорный небулайзер представляет собой прибор, который преобразует жидкое лекарственное вещество в мелкодисперсный аэрозоль под воздействием сжатого воздуха. Аэрозоль содержит крупные и мелкие частицы. При дыхании под воздействием силы тяжести крупные частицы оседают на стенках верхних дыхательных путей, а мелкие частицы успевают достичь нижних отделов бронхов. Таким образом, лекарственное вещество попадает во все отделы бронхиального дерева, включая самые мелкие бронхи и альвеолы, а также проникает в кровеносные сосуды в стенках альвеол в высоких терапевтических дозах при незначительных или нулевых побочных эффектах.

Когда применяется небулайзерная терапия?

Небулайзерную терапию применяют при:

- острых респираторных заболеваниях;
- обструктивных заболеваниях легких;
- хронических воспалительных процессах дыхательных путей, таких как хронический бронхит, бронхиальная астма (в т.ч. при хронической, нестабильной, при тяжелом обострении БА), хроническом фарингите;
- инфекциях дыхательных путей;
- нарушении качества секрета и его отделения в бронхах;
- различных видах кашля.

Преимущества небулайзерной терапии

Небулайзерная терапия дает возможность быстрого воздействия на зону воспаления высокими дозами лекарства, что повышает эффективность проводимого лечения и снижает риск побочных действий на другие органы. Небулайзерная терапия является наиболее экономичным способом лечения с точки зрения целевого расходования лекарственного вещества, широко применяется для детей, пожилых людей, ослабленных пациентов.

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Важная информация по безопасности

- Перед использованием внимательно прочтите инструкцию. Сохраните ее для дальнейшего использования в случае необходимости.
- Используйте устройство только как ингалятор в терапевтических целях. Тип лекарственного средства, режим и время использования - согласно медицинским предписаниям. Сборка прибора должна быть произведена строго в соответствии с указаниями в данном руководстве и только в целях, заявленных производителем.
- Данный прибор не подходит для использования с воспламеняющимися анестезирующими смесями, содержащими воздух, кислород или оксид азота.
- На работу прибора могут воздействовать электромагнитные помехи, возникающие из-за перебоев в работе Вашего телевизора, радио, и т.д. Если такое происходит, попробуйте переместить прибор, пока помеха не исчезнет, либо подсоедините его к другой розетке.
- Никогда не используйте удлинители или адаптеры. Рекомендуется использовать сетевой шнур для предотвращения опасного перегрева. Держите шнур подальше от горячих поверхностей.
- Всегда отключайте прибор от основной розетки после использования и перед проведением очистки.
- Не прикасайтесь к устройству, если оно случайно упадет в воду. Отключите его от источника электропитания и не используйте его. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром.
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Во время использования, убедитесь, что прибор стоит на ровной и устойчивой поверхности, для предотвращения расшattering.
- Не используйте прибор, когда пациент спит.
- Обращайтесь по всем вопросам обслуживания в сервисный центр. Не вскрывайте прибор. Если прибор не работает должным образом, выключите его и просмотрите инструкцию по эксплуатации.
- Не оставляйте какие-либо упаковочные материалы (пластиковые пакеты, картонные коробки и т.д.) в доступном для детей месте во избежание опасных ситуаций.
- Храните аксессуары в недоступном для детей месте. Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими или умственными способностями следует осуществлять под пристальным присмотром взрослого, который прочел данную инструкцию пользователя. Храните емкость для медикаментов в местах, недоступных детям младше 36 месяцев, поскольку она содержит мелкие частицы, которые можно проглотить.
- Всегда отключайте прибор от розетки, когда он не используется.
- Рекомендуется индивидуальное использование одного медицинского набора аксессуаров.
- Не оставляйте остатки лекарственного средства в емкости для медикаментов и/или в аксессуарах после окончания терапии.
- Очистка и/или обслуживание прибора должны проводиться только после выключения прибора и отсоединения шнура питания от розетки.

- Не тяните шнур или же прибор для того, чтобы вынуть вилку из розетки.
- Это медицинский прибор для применения в домашних условиях, и должен использоваться согласно медицинскому предписанию. Прибор должен использоваться, как указано в инструкции пользователя. Важно, чтобы пациенты прочитали и разобрались с тем, как использовать и обращаться с прибором. По каким-либо вопросам обращайтесь к Вашему дилеру или же в сервисный центр.
- Если вилка прибора не подходит к розетке, свяжитесь с квалифицированным специалистом для осуществления ее замены. Не используйте адаптеры, тройники и/или удлинители.
- Не закрывайте воздухозаборное отверстие.
- Установка должна производиться в соответствии с инструкциями, а использование - как заявлено производителем. Неправильная установка и/или неправильное использование прибора может привести к нанесению вреда людям, животным или же вещам. Производитель не несет за это ответственность.
- Не используйте прибор во время принятия ванны или душа.
- Не подвергайте прибор воздействию пыли (которая может заблокировать вентиляционные отверстия), тепла (которое может деформировать поверхность), солнечного света или других атмосферных агентов, которые могут привести к поломке прибора.
- Не используйте прибор вблизи источников возможных помех (например, источники тепла, такие как камин, электрические или газовые обогреватели; паровые источники, такие как бойлеры или чайники; электромагнитные источники излучения, такие как микроволновые печи, устройства Wi-Fi).
- Храните в местах, недоступных для домашних питомцев, которые могут загрязнить поверхность непосредственного контакта с пациентом, заблокировать вентиляционные отверстия, или, в целом, негативно влиять на качество проведения терапии.
- Прибор генерирует сжатый воздух. Побочные явления могут возникать из-за чувствительности к лекарственным средствам, которые используются.




Электрические приборы следует утилизировать в соответствии с местными предписаниями, не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ ПРИБОРА

Набор аксессуаров

- ① Насадка для носа
- ② Загубник
- ③ Маска для взрослого
- ④ Маска детская
- ⑤ Емкость для медикаментов-верхняя часть
- ⑥ Емкость для медикаментов-нижняя часть
- ⑦ Емкость для медикаментов-отверстие для подачи воздуха
- ⑧ Заслонка
- ⑨ Воздушная трубка
- ⑩ Залпасные воздушные фильтры (5 шт.)

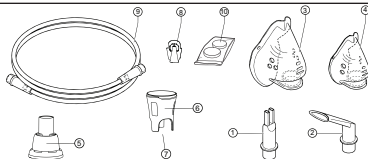

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТЕРАПИИ


Это медицинский прибор класса IIa, который преобразует жидкое лекарственное средство в аэрозоль для того, чтобы вводить его непосредственно в дыхательный аппарат. Прибор распыляет лекарственные препараты, как в форме суспензий, так и в форме растворов. Терапевтический эффект менее выражен при использовании маслянистых и/или пастообразных лекарственных средств.

Не распыляйте эфирные масла!

Не подогревайте жидкие растворы и/или спиртовые растворы. Емкость для медикаментов и все аксессуары не стерильные. Перед началом использования прочтите пункт «Обслуживание прибора».

Эксплуатация прибора

1. Установите прибор на ровную устойчивую поверхность.
2. Убедитесь, что номинальное напряжение соответствует напряжению сети.
3. Подключите прибор к розетке.
4. Откройте емкость для медикаментов, отсоединив две части (А) емкости раскручивающими движениями.
5. Вставьте заслонку в днище емкости для медикаментов, как показано на рисунке (В).
6. Заполните нижнюю часть емкости для медикаментов лекарственным средством (С). Примечание: На нижней части емкости для медикаментов нанесены указывающие метки.
7. Закройте емкость для медикаментов, соединив ее две части закручивающими движениями (D).
8. Подсоедините воздушную трубку (9) к емкости для медикаментов (Е).
9. Подсоедините воздушную трубку (9) к отверстию для воздуха на приборе.
10. Вставьте в емкость для медикаментов необходимые аксессуары: маску, загубник или насадку для носа (F).
11. Включите устройство, переведя выключатель в положение ON (ВКЛ).
12. После использования, выключите прибор и отсоедините от сети. Перед повторным включением прибора убедитесь, что он остыл до комнатной температуры.

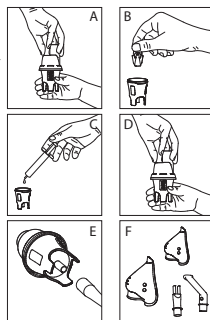

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРАПИИ


- Займите удобное вертикальное положение.
- Если используется маска (для взрослых или для детей), убедитесь, что она плотно прилегает к лицу. В маске есть отверстия для потока воздуха во время фазы выдоха. Дышите легко и делайте короткие паузы после каждого вдоха.
- Если используется загубник, держите его между зубами, с сжатыми губами. Дышите через рот.
- Если используется насадка для носа, поднесите ее к носу. Дышите через нос.
- Ингаляция завершена, когда перестает образовываться аэрозоль.

Эксплуатация насадки для промывания носа. Опция

Насадка для промывания носа можно приобрести как дополнительную опцию к данному компрессорному небулайзеру.

Насадка для промывания носа предназначена для очистки полости носа и лечения насморка и хронических ринитов. Для того, чтобы воспользоваться ею, следуйте инструкциям:

1. Отсоедините верхнюю часть раскручивающими движениями (а).
2. Наполните емкость для медикаментов (b).
3. Вставьте заслонку (с).
4. Закройте насадку для промывания носа, соединив две части закручивающими движениями.
5. Подсоедините трубку к воздухоприемнику (d).
6. Поднесите насадку для промывания носа к ноздре. Не вставляйте ее в нос. Дышите через нос.
7. После окончания терапии, аккуратно очистите насадку для промывания носа.

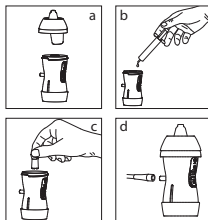


ВНИМАНИЕ:

Не вдыхайте в горизонтальном положении. Не наклоняйте емкость для медикаментов под углом более 45°. Храните аксессуары в хорошо проветриваемом, защищенном от тепла и прямых солнечных лучей, месте (F).

Замена воздушного фильтра

Следует менять фильтр после 30 часов использования, либо когда он становится серого цвета. Запасные воздушные фильтры (H). Для того чтобы заменить фильтр, поднимите крышку с помощью плоской отвертки, как показано на рисунке I. Выньте старый фильтр и поместите новый (10). Установите фиксирующую крышку фильтра в корпус, убедившись, что она плотно прилегает к поверхности.

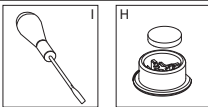

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Очистка

После каждого сеанса ингаляции отсоедините прибор от розетки и очистите прибор и аксессуары. Внимание: используйте исключительно аксессуары, которые идут в комплекте с прибором, другие аксессуары могут повлиять на эффективность лечения.

ОЧИСТКА ЗАГУБНИКА И НАСАДКИ ДЛЯ НОСА

Используйте питьевую воду для тщательной очистки этих аксессуаров, при использовании. Их можно стерилизовать, прокипятив 5-10 минут в воде или же поместив в химическое дезинфицирующее средство, следуя инструкциям, и промыв питьевой водой. Оставьте их просохнуть естественным путем.

ОЧИСТКА ЕМКОСТИ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ

После использования, отсоедините две части емкости для медикаментов, помойте их с мылом и горячей водой, и тщательно прополощите.

Вытрите остатки воды мягкой, чистой и сухой тканью, и оставьте их сохнуть естественным путем в чистом месте. Для стерилизации покройте емкость для медикаментов холодным стерилизующим раствором, следуя инструкциям на упаковке стерилизатора. Рекомендуется индивидуальное использование емкости для медикаментов для каждого отдельного пациента, сроком до 6 месяцев или для 120 применений. Не кипятите емкость для медикаментов. Аккуратно мойте маску и трубки с применением исключительно дезинфицирующего раствора.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ МИКРОБАМИ

В случае патологии микробного или вирусного происхождения, где есть вероятность заражения, прибор и аксессуары не должны использоваться совместно с другими пациентами.

Устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА	ДЕЙСТВИЯ
Прибор не включается.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что вилка правильно вставлена в розетку.• Убедитесь в том, что выбран режим включения на пререключателе (I).

Прибор включен, но он не распыляет.

- Убедитесь в том, чтобы заслонка была вставлена в емкость для медикаментов (8).
- Убедитесь в том, что воздушная трубка не согнута, не повреждена (9).
- Убедитесь в том, что воздушный фильтр не заблокирован, не загрязнен. При необходимости, замените фильтр (10).
- Убедитесь в том, что емкость для медикаментов наполнена лекарственным средством.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не удается возобновить нормальную работу прибора, несмотря на проведение ряда проверок, свяжитесь с сервисным центром Dr. Frei®.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поршень вращающийся прижимной, без смазки. Медицинский прибор класса IIA в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС (Директива по медицинским приборам). Емкость для медикаментов Linear.

Размер частиц: 3 мкм MMAD (EN13544-1); **Описание прибора:** ингалятор компрессорный; **Скорость распыления, мл/мин.:** 0,3 ± 0,05 мл/мин; **Воздушный поток (максимальный):** 15 ± 2 л/мин; **Емкость для лекарства:** 2-10 мл; **Остаточный объем, мл:** 0,85 ± 0,2 мл; **Уровень шума:** низкий (менее 55 Дб); **Периодичность использования:** 30 минут - ON (ВКЛ)/30 минут - OFF (ВЫКЛ);

Аксесуары: воздушная трубка (1,0 м), маска для взрослого, маска детская, загубник, насадка для носа, запасные воздушные фильтры (5 шт.).

Насадка для промывания носа: опция; **Мощность:** 220 В/50 Гц; **Длина питающего провода:** 1,4 м; **Вес:** 1,3 кг;

Габариты: 167×106×164 мм; **Мощность:** 120 ВА;

Условия эксплуатации:

Допустимая температура окружающей среды: минимум 5°C - максимум 40°C

Влажность воздуха: минимум 15% относительной влажности - максимум 93% относительной влажности

Атмосферное давление: минимум 700гПа - максимум 1060гПа (максимальная высота при эксплуатации ≤ 2000м)

Условия хранения:

Допустимая температура окружающей среды: минимум -25°C/ максимум +70°C

Влажность воздуха: минимум 0% относительной влажности - максимум 93% относительной влажности

Атмосферное давление: минимум 500 гПа - максимум 1060 гПа

* Возможны технические изменения и изменения дизайна без предварительного уведомления.

Ожидаемый срок службы данного прибора - 2000 циклов терапии, средняя продолжительность которых составляет 8 минут.

Электромедицинские приборы требуют особого ухода. Во время установки и использования, с учетом требований электромагнитной совместимости, необходимо, чтобы они были установлены и/или использовались в соответствии с техническими условиями производителя. Существует вероятность возникновения электромагнитного взаимодействия с другими приборами, в частности с другими приборами для анализа и обработки. Радио и мобильные телекоммуникационные устройства, а также портативные высокочастотные (мобильные телефоны и беспроводные подключения) могут создавать помехи в работе электромедицинского прибора.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ	СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ
	Переменный ток		Маркировка CE в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС
	Двойная изоляция		Не используйте во время приема душа или ванны
	Применяемая часть типа BF		Режим ВКЛ
	Обязательство прочесть руководство по эксплуатации		Режим ВЫКЛ
	Общий предупреждающий символ		Прочтите инструкцию пользователя
IP 21	Защита от проникновения твердых предметов и жидкости (защитен от проникновения твердых предметов более 12 мм, защитен от проникновения с помощью пальца; защитен от попадания капель воды, направленных вертикально)		Храните в сухом месте
	Данный продукт (включая все сопутствующие аксессуары) в конце его сервисной службы должен быть доставлен пользователем, либо его дилером, в пункт утилизации с помощью электрическими или электронными машинами.		

На прибор распространяется гарантия 2 года с момента приобретения. Гарантия не распространяется на расходные комплектующие. Гарантия действительна только при наличии гарантийного талона, заполненного официальным представителем, подтверждающего дату продажи, и кассового чека.

- Компания-производитель и официальный дилер не несут ответственности за поломку либо повреждение прибора вследствие ненадлежащего либо халатного обращения.
- Все виды сборки, модификации, регулировки или ремонта прибора должны осуществляться только работниками специализированных сервисных центров официального представителя **TM Dr. Frei®** в Вашей стране.

Для ремонта или приобретения составных частей обращайтесь в сервисный центр официального представителя **TM Dr. Frei®** в Вашей стране.

УКАЗАНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Прибор для аэрозольной терапии предназначен для использования в электромагнитной среде, описанной ниже:

ТЕСТ НА ИЗЛУЧЕНИЕ	СООТВЕТСТВИЕ	УКАЗАНИЯ НАСЧЕТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СРЕДЫ
ВЧ излучения	Группа 1	В приборе энергия высоких частот используется только для его внутренних функций. Поэтому уровень ВЧ излучения очень низкий, и не создает помехи для других электрических приборов.
ВЧ излучения CISPR11 Излучения гармоничных составляющих МЭК/EN 61000-3-2 Колесания/пульсация напряжения МЭК/EN 61000-3-3	Класс (B) Класс (A)	Прибор подходит для использования внутри каких-либо помещений, в том числе в домашних условиях, подключенных к стандартной электрической сети, предназначенной для электроснабжения жилых помещений.
Электростатические разряды МЭК/EN 61000-4-2	±6кВ контакт ±8кВ воздух	Пол должен быть деревянным, бетонным, либо с покрытием из керамической плитки. Если пол покрыт синтетическим материалом, относительная влажность должна быть меньше, чем 30%.
Быстрые электрические переходные процессы/всплески МЭК/EN 61000-4-4	±2кВ мощность	Электроэнергия в сети должна соответствовать стандартам для систем электроснабжения общего пользования.
Скачки МЭК/EN 61000-4-5	±1кВ дифференциальный режим	Электроэнергия в сети должна соответствовать стандартам для систем электроснабжения общего пользования.
Снижение напряжения, кратковременные прерывания и перемены напряжения МЭК/EN 61000-4-11	<5%UT на протяжении 0,5 цикла 40%UT на протяжении 5 циклов 70%UT на протяжении 25 циклов <5%UT на протяжении 5 секунд	Электроэнергия в сети должна соответствовать стандартам для систем электроснабжения общего пользования. Если пользователь нуждается в бесперебойной работе прибора, рекомендуется использовать для прибора источник бесперебойного питания.
Магнитное поле МЭК/EN 61000-4-8	3А/м	Магнитное поле должно соответствовать стандартам для систем электроснабжения общего пользования.
Совместимость электромагнитная МЭК/EN 61000-4-6	3В (сер.в.) 150 кГц - 80 МГц 8 (для приборов жизнеобеспечения)	
Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю МЭК/EN 61000-4-3	3В/м 80 МГц - 2.5ГГц (не для приборов жизнеобеспечения)	

ПРИМЕЧАНИЕ: UT - напряжение переменного тока в сети питания.

UA ШАНОВНИЙ КОРИСТУВАЧ КОМПРЕСОРНОГО ІНГАЛЯТОРА (НЕБУЛАЙЗЕРА) TURBO MINI

Дякуємо Вам за вибір компресорного небулайзера TM Dr. Frei® моделі TURBO MINI. Ми впевнені, що, гідно оцінивши якість даного приладу, Ви станете постійним користувачем продукції Швейцарської торгової марки **Dr. Frei®**.

Ваш небулайзер призначений для лікування астми, хронічних обструктивних захворювань легень та інших респіраторних захворювань шляхом перетворення рідких лікарських засобів в аерозоль, який швидко і надійно проникає як у верхні, так і в нижні дихальні шляхи.

Перед тим, як почати користуватися небулайзером, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію. Дотримання вимог, перерахованих в ній, забезпечить безпечну роботу небулайзера протягом тривалого часу. З усіх питань, щодо даного продукту, будь ласка, звертайтеся до офіційного представника або сервісного центру TM Dr. Frei® у Вашій країні.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	14
Що таке небулайзер і як він працює?.....	14

Коли застосовується небулайзерна терапія?	14
Переваги небулайзерної терапії	14
ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО ВИКОРИСТАННЯ	14
Важлива інформація з безпеки	14
Набір аксесуарів	15
ВИКОНАННЯ ІНГАЛЯЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ	15
Експлуатація приладу	15
Експлуатація насадки для промивання носа. Опція	16
Заміна повітряного фільтра	16
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ	16
Очищення	16
Усунення несправностей	16
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ	17
ОПИС СИМВОЛІВ	17
ГАРАНТІЯ	18
ВКАЗІВКИ ТА ЗАЯВИ ВИРОБНИКА - ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ	18

ВСТУП

Що таке небулайзер і як він працює?

Компресорний небулайзер - це прилад, який перетворює рідку лікарську речовину в дрібнодисперсний аерозоль під впливом стиснутого повітря. Аерозоль містить великі і дрібні частинки. Під час дихання під впливом сили тяжіння великі частки осідають на стінках верхніх дихальних шляхів, а дрібні частинки встигають досягти нижніх відділів бронхів. Таким чином, лікарська речовина потрапляє в усі відділи бронхіального дерева, включаючи найдрібніші бронхи і альвеоли, а також проникає в кровоносні судини в стінках альвеол у високих терапевтичних дозах при незначних або нульових побічних ефектах.

Коли застосовується небулайзерна терапія?

Небулайзерну терапію застосовують при:

- гострих респіраторних захворюваннях;
- обструктивних захворюваннях легень;
- хронічних запальних процесах дихальних шляхів, таких як хронічний бронхіт, бронхіальна астма (у т. ч. при хронічній, нестабільній, при важкому загостренні БА), хронічний фарингіт;
- інфекціях дихальних шляхів;
- порушенні якості секрету і його відділення в бронхах;
- різних видах кашлю.

Переваги небулайзерної терапії

Небулайзерна терапія дає можливість швидкого впливу на зону запалення високими дозами ліків, що підвищує ефективність проведеного лікування і знижує ризик побічних дій на інші органи. Небулайзерна терапія є найбільш економічним способом лікування з точки зору цільового витрачання лікарської речовини, широко застосовується для дітей, літніх людей, ослаблених пацієнтів.

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

Важлива інформація з безпеки

- Перед використанням уважно прочитайте інструкцію. Збережіть її для подальшого використання у разі необхідності.
- Використовуйте прилад виключно як інгалятор у терапевтичних цілях. Тип лікарського засобу, режим і час використання - згідно з медичними призначеннями. Операції з встановлення мають бути виконані згідно інструкції даного керівництва, і виключно для цілей, встановлених виробником.
- Цей прилад не підходить для використання із замістими анестезуючими сумішми, що містять повітря, кисень або оксид азоту.
- На роботу приладу можуть впливати електромагнітні перешкоди, що виникають із-за перешкоди в роботі Вашого телевізора, радіо, і т.д. Якщо виникає подібна ситуація, спробуйте перемістити прилад, поки перешкода не зникне, або під'єднайте його до іншої розетки.
- Ніколи не використовуйте подовжувачі або адаптери. Рекомендуються використовувати мережевий шнур для запобігання небезпечного перегрівання. Тримайте шнур подаль від гарячих поверхонь.
- Завжди від'єднайте прилад від основної розетки після використання та перед проведенням очищення.
- Не доторкайтесь до приладу, якщо він випадково потрапив у воду. Від'єднайте прилад від розетки і не використовуйте. Зв'яжіться з авторизованим сервісним центром.
- Не торкайтесь приладу вологими руками.
- Не блокуйте вентиляційні отвори.
- Під час використання, переконайтеся, що прилад стоїть на рівній та стійкій поверхні, для запобігання розпліскуванню.
- Не використовуйте прилад, коли пацієнт спить.
- З усіх питань обслуговування звертайтеся в сервісний центр. Не розкривайте прилад. Якщо прилад не працює відповідним чином, вимкніть його і перегляньте інструкцію з експлуатації.
- Не залишайте будь-які пакувальні матеріали (пластикові пакети, картонні коробки і т. д.) в доступному для дітей місці, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

- Зберігайте аксесуари в недоступному для дітей місці. Використання приладу дітьми та людьми з обмеженими фізичними або розумовими можливостями слід здійснювати під пильним наглядом дорослого, який прочитав дану інструкцію користувача. Зберігайте ємність для медикаментів в місцях, недоступних дітям молодше 36 місяців, оскільки вона містить дрібні частини, які можна проковтнути.
- Завжди від'єднуйте прилад від розетки, коли він не використовується.
- Рекомендуйтеся індивідуальне використання одного медичного набору аксесуарів.
- Не лишайте залишки лікарського засобу в ємності для медикаментів та/або в аксесуарах після завершення терапії.
- Очищення та/або обслуговування приладу повинні проводитися лише після вимкнення приладу і від'єднання шнура живлення від розетки.
- Не тягніть шнур або ж прилад для того, щоб виняяти вилку з розетки.
- Це медичний прилад для використання в домашніх умовах, і повинен використовуватися згідно з медичним призначенням. Прилад повинен використовуватися, як зазначено в інструкції користувача. Важливо, щоб пацієнти прочитали і розібралися з тим, як використовувати і поводитися з приладом. З будь-яких питань звертайтеся до Вашого дилера або ж в сервісний центр.
- Якщо вилка приладу не підходить для розетки, зв'яжіться з кваліфікованим фахівцем для її заміни. Не використовуйте адаптери, трійники та подовжувачі.
- Не блокуйте повітрязабірні отвори.
- Установа повинна проводитися згідно з інструкціями, а використання - як заявлено виробником. Неправильна установка та/або неправильне використання приладу може призвести до нанесення шкоди людям, тваринам або ж речам. Виробник не несе за це відповідальність.
- Не використовуйте прилад, приймаючи ванну або душ.
- Не надавайте прилад впливу пилу (який може заблокувати вентиляційні отвори), тепла (яке може деформувати поверхні), сонячного світла або інших атмосферних агентів, які можуть призвести до поломки приладу.
- Не використовуйте прилад поблизу джерел можливих перешкод (наприклад, джерела тепла, такі як каміни, електричні або газові обігрівачі, парові джерела, такі як бойлери або чайники; електромагнітні джерела випромінювання, такі як мікрохвильові печі, пристрої Wi-Fi).
- Зберігайте в місцях, недоступних для домашніх тварин, які можуть забруднити поверхню безпосереднього контакту з пацієнтом, заблокувати вентиляційні отвори, або, в цілому, негативно впливати на якість проведення терапії.
- Прилад генерує стиснуте повітря. Побічні ефекти можуть виникати із-за чутливості до лікарських засобів, які використовуються.




Електричні прилади слід утилізувати відповідно до місцевих приписів, не викидати разом із побутовими відходами.

ЗБЕРІГАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ПРОТЯГОМ ВСЬОГО ТЕРМІНУ СЛУЖБИ ПРИЛАДУ

Набір аксесуарів

- ① Насадка для носа
- ② Загубник
- ③ Маска для дорослого
- ④ Маска дитяча
- ⑤ Ємність для медикаментів - верхня частина
- ⑥ Ємність для медикаментів - нижня частина
- ⑦ Ємність для медикаментів - отвір для подачі повітря
- ⑧ Заслонка
- ⑨ Повітряна трубка
- ⑩ Запасні повітряні фільтри (5 шт.)

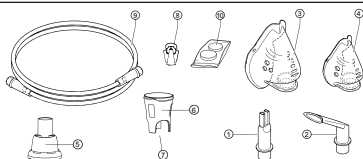


ВИКОНАННЯ ІНГАЛЯЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ

Це медичний прилад класу IIa, який перетворює рідкий лікарський засіб в аерозоль для того, щоб вводити його безпосередньо в дихальний апарат. Прилад розпилює лікарські препарати, як у формі суспензій, так і у формі розчинів. Терапевтичний ефект менш виражений за умови використання маслянистих і пастоподібних лікарських засобів. Не розпилюйте ефірні олії! Не підігрівайте рідкі та/або спиртові розчини. Ємність для медикаментів і всі аксесуари не стерильні. Перед початком використання прочитайте пункт «Обслуговування приладу».


Експлуатація приладу

1. Встановіть прилад на рівну стійку поверхню.
2. Переконайтеся, що номінальна напруга відповідає напрузі мережі.
3. Під'єднайте прилад до розетки.
4. Відкрийте ємність для медикаментів, від'єднавши дві частини (A) ємності розкручуючими руками.
5. Вставте заслінку в днище ємності для медикаментів, як показано на малюнку (B).
6. Наповніть нижню частину ємності для медикаментів лікарським засобом (C). Примітка: На нижній частині ємності для медикаментів нанесено квазівні позначки.
7. Закрийте ємність для медикаментів, з'єднавши дві частини (D) закручуючими руками.
8. Під'єднайте повітряну трубку (9) до ємності для медикаментів (E).
9. Під'єднайте повітряну трубку (9) до отвору для повітря на приладі.
10. Вставте в ємність для медикаментів необхідні аксесуари: маску, загубник або насадку для носа (F).
11. Увімкніть пристрій, перевівши вимикач у положення ON (ВВІМК).
12. Після використання, вимкніть прилад і від'єднайте від мережі. Перед повторним ввімкненням приладу переконайтеся, що він охолонув до кімнатної температури.

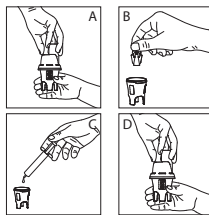

РЕКОМЕНДАЦІ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРАПІЇ

- Сядьте зручно, у вертикальному положенні.
- Якщо використовується маска (для дорослого або дитяча), переконайтеся, що вона щільно прилягає до обличчя. У масці є отвори для потоку повітря під час фази видиху. Дихайте легко і робіть короткі паузи після кожного вдиху.
- Якщо використовується загубник, тримайте його між зубами, із стислими губами. Дихайте через рот.
- Якщо використовується насадка для носа, піднісіть її до носа. Дихайте через ніс.
- Інгаляція завершена, коли припиняє утворюватися аерозоль.

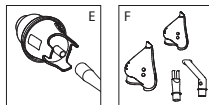


Експлуатація насадки для промивання носа. Опція

Насадку для промивання носа можна придбати як допоміжну опцію до цього компресорного небулайзера.

Насадка для промивання носа призначена для очищення порожнини носа, а також для лікування нежитьу, та хронічних ринітів. Для того, щоб скористатися нею, дійте згідно інструкцій:

1. Змініть верхню частину розкручуючими рухами (а).
2. Наповніть ємність для медикаментів (b).
3. Вставте застлінку (c).
4. Закрийте насадку для промивання носа, з'єднавши дві частини закручуючими рухами.
5. Під'єднайте трубку до повітряноримача (d).
6. Піднесіть насадку для промивання носа до ніздрі. Не вставляйте її в ніс. Дихайте через ніс.
7. Після завершення терапії, акуратно очистіть насадку для промивання носа.

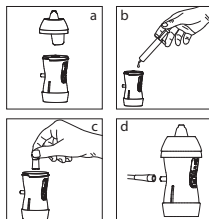


УВАГА:

Не вдихайте, перебуваючи у горизонтальному положенні. Не нахиляйте ємність для медикаментів під кутом більше, ніж 45°. Зберігайте аксесуари у добре провітрованому, захищеному від тепла та прямих сонячних променів місці (F).

Заміна повітряного фільтра

Слід змінювати фільтр після 30 годин використання, або коли він стає сірого кольору. Запасні повітряні фільтри (H). Для того, щоб замінити фільтр, підніміть кришку за допомогою плоскої викрутки, як показано на малюнку I. Вийміть старий фільтр і помістіть новий (H). Встановіть фіксуючу кришку фільтра в корпус, переконавшись, що вона щільно прилягає до поверхні.

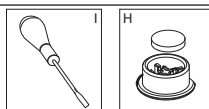

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ

Очищення

Після кожного сеансу інгаляції від'єднайте прилад від розетки, очистіть прилад та аксесуари. Увага: використовуйте виключно аксесуари, які йдуть у комплекті з приладом, інші аксесуари можуть впливати на ефективність лікування.

ОЧИЩЕННЯ ЗАГУБНИКА ТА НАСАДКИ ДЛЯ НОСА

Використовуйте питну воду для ретельного очищення цих аксесуарів, в період використання. Їх можна стерилізувати, прокип'ятити 5-10 хвилин у воді або ж помістивши в хімічний дезінфікуючий засіб, згідно з інструкціями, та промивши питною водою. Залиште їх висихати природним шляхом.

ОЧИЩЕННЯ ЄМНОСТІ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТІВ

Після використання, від'єднайте дві частини ємності для медикаментів, помийте їх з милом та гарячою водою, й ретельно прополощіть. Витріть залишки води м'якою, чистою та сухою тканиною, й залиште їх висихати природним шляхом у чистому місці. Для стерилізації покрийте ємність для медикаментів холодним стерилізуючим розчином, слідує інструкціям на упаковці стерилізатора. Рекомендується індивідуальне використання ємності для медикаментів для кожного окремого пацієнта, строком до 6 місяців або для 120 використань. Не кип'ятіть ємність для медикаментів. Акуратно мийте маску та трубки виключно із застосуванням дезінфікуючого розчину.

ЗАБРУДНЕННЯ МІКРОБАМИ

У разі патології мікробного або вірусного походження, де є вірогідність зараження, прилад і аксесуари не повинні використовуватися одночасно з іншими пацієнтами.

Усунення несправностей

ПРОБЛЕМА	Дії
Прилад не вмикається.	<ul style="list-style-type: none">• Переконайтеся, що вилка була правильно вставлена в розетку.• Переконайтеся в тому, що обрано режим ввімкнення на перемикачі (I).

Прилад ввімкнено, але він не розпилює.

- Переконайтеся в тому, щоб заслонка була вставлена в ємність для медикаментів (8).
- Переконайтеся в тому, що повітряна трубка не зігнута, не пошкоджена (9).
- Переконайтеся в тому, що повітряний фільтр не заблокований, не забруднений. Якщо необхідно, замініть фільтр (10).
- Переконайтеся в тому, що ємність для медикаментів наповнена лікарським засобом.

ПРИМІТКА: Якщо неможливо відновити нормальну роботу приладу, не двілячись на проведення ряду перевірок, зв'яжіться з сервісним центром Dr. Frei®.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ

Поршень притисний, що обертається, без мастила. Медичний прилад класу ІІа згідно з Директивою 93/42/ЕЕС (Директива з медичних приладів). Ємність для медикаментів Linear.

Розмір часток: 3мм MМAD (EN13544-1); **Опис прилада:** інгалятор компресорний; **Швидкість розпилення, мл/хв.:** 0,3±0,05 мл/хв;

Повітряний потік (максимальний): 15±2 л/хв; **Ємність для медикаментів:** 2-10 мл; **Залишковий об'єм, мл:** 0,85±0,2 мл; **Рівень шуму:** низький (менше 55 Дб); **Періодичність використання:** 30 хвилин - ON (ВВІМК)/30 хвилин - OFF (ВИМК);

Аксесуари: повітряна трубка (1,0 м), маска для дорослого, маска дитяча, загубник, насадка для носу, запасні повітряні фільтри (5 шт.)

Насадка для промивання носа: опція; **Потужність:** 220 В/50 Гц; **Довжина проводу живлення:** 1,4 м; **Вага:** 1,3 кг;

Габарити: 167×106×164 мм; **Потужність:** 120 ВА;

Умови експлуатації:

Допустима температура навколишнього середовища: мінімум 5°C - максимум 40°C.

Вологість повітря: мінімум 15% відносної вологості - максимум 93% відносної вологості.

Атмосферний тиск: мінімум 700гПа - максимум 1060гПа (максимальна висота під час експлуатації ≤ 2000м) .

Умови зберігання:

Допустима температура навколишнього середовища: мінімум -25°C / максимум +70°C.

Вологість повітря: мінімум 0% відносної вологості - максимум 93% відносної вологості.


Атмосферний тиск: мінімум 500 гПа - максимум 1060 гПа.

* Можливі технічні зміни і зміни дизайну без попереднього повідомлення.

Очікуваний термін служби даного приладу - 2000 циклів терапії, середня тривалість яких складає 8 хвилин.

Електро медичні прилади потребують особливого догляду. Під час установки і використання, з урахуванням вимог електромагнітної сумісності, необхідно, щоб вони були встановлені і використовувалися відповідно до технічних умов виробника. Існує вірогідність виникнення електромагнітної взаємодії з іншими приладами, зокрема з іншими приладами для аналізу і виробки. Радіо і мобільні телекомунікаційні пристрої, а також портативні високочастотні (мобільні телефони і безпроводні підключення) можуть створювати перешкоди в роботі електро медичного приладу.

ОПИС СИМВОЛІВ

СИМВОЛ	ЗНАЧЕННЯ	СИМВОЛ	ЗНАЧЕННЯ
	Перемінна напруга		Маркування CE згідно з Директивою 93/42/ЕЕС
	Подвійна ізоляція		Не використовуйте прилад, приймаючи ванну чи душ
	Частина типу ВF, що застосовується	I/ON	Режим ВВІМК
	Зобов'язання прочитати інструкцію користувача	O/OFF	Режим ВИМК
	Загальний попереджувальний символ		Читайте інструкцію користувача
IP 21	Захист від проникнення твердих предметів і рідини (захищений від проникнення твердих предметів більше 12 мм, захищений від проникнення за допомогою пальця; захищений від попадання крапель води, направлених вертикально)		Зберігайте у сухому місці
	Даний продукт (включаючи всі супутні аксесуари) в кінці його сервісної служби має бути доставлений користувачем, або його дilerом, в пункт утилізації за допомогою електричних або електронних машин.		

ГАРАНТІЯ

На прилад поширюється гарантія 2 роки з моменту придбання. Гарантія не поширюється на додаткові комплектуючі. Гарантія дієна тільки за наявності гарантійного талона, заповненого офіційним представником, що підтверджує дату продажу, і касового чека.

- Компанія-виробник і офіційний дилер не несуть відповідальності за поломку або пошкодження приладу внаслідок неналежного або небального поводження.

- Всі види збірки, модифікації, регулювання або ремонту приладу повинні здійснюватися тільки працівниками спеціалізованих сервісних центрів офіційного представника ТМ Dr. Frei® у Вашій країні.

Для ремонту або придбання складових частин звертайтеся до сервісного центру офіційного представника ТМ Dr. Frei® у Вашій країні.

ВКАЗІВКИ ТА ЗАЯВИ ВИРОБНИКА - ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

Прилад для аерозольної терапії призначений для використання в електромагнітному середовищі, як зазначено нижче:

ТЕСТ НА ВИПРОМІНЮВАННЯ	ВІДПОВІДНІСТЬ	ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО СЕРЕДОВИЩА
ВЧ випромінювання	Група 1	У приладі енергія високих частот використовується тільки для його внутрішніх функцій. Тому рівень ВЧ випромінювання дуже низький, і не створює перешкод для інших електричних приладів.
ВЧ випромінювання CISPR11 Випромінювання гармонійних складових МЕК/EN 61000-3-2 Колівання/пульсація напруги МЕК/EN 61000-3-3	Клас (B) Клас (A)	Прилад підходить для використання всередині будь-яких приміщень, у тому числі в домашніх умовах, підключених до стандартної електричної мережі, призначеної для електрозабезпечення житлових приміщень.
Електростатичні розряди МЕК/EN 61000-4-2	±6кВ контакт ±8кВ повітря	Підлога повинна бути дерев'яною, бетонною або покритою керамічною плиткою. Якщо підлога має покриття з синтетичних матеріалів, відносна вологість має бути менше, ніж 30%.
Швидкі електричні перехідні процеси/сплески МЕК/EN 61000-4-4	±2кВ потужність	Електроенергія у мережі повинна відповідати стандартам для систем електропостачання загального користування.
Стрибки МЕК/EN 61000-4-5	±1кВ диференціальний режим	Електроенергія у мережі повинна відповідати стандартам для систем електропостачання загального користування.
Зниження напруги, короткочасні переривання і зміни напруги МЕК/EN 61000-4-11	<5%UT протягом 0,5 циклу 40%UT протягом 5 циклів 70%UT протягом 25 циклів <5%UT протягом 5 секунд	Електроенергія у мережі повинна відповідати стандартам для систем електропостачання загального користування. Якщо користувачеві приладу необхідна його безперервна робота, рекомендується використовувати для приладу джерело безперебійного живлення.
Магнітне поле МЕК/EN 61000-4-8	3А/м	Магнітне поле повинно відповідати стандартам для систем електропостачання загального користування.
Сумісність електромагнітна МЕК/EN 61000-4-6	3В (сер.кв.) 150 кГц - 80 МГц 8 (для приладів життєзабезпечення)	
Стойкість до радіочастотного електромагнітного поля МЕК/EN 61000-4-3	3В/м 80 МГц - 2.5ГГц (не для приладів життєзабезпечення)	

ПРИМІТКА: UT - напруга змінного струму в мережі живлення до початку випробовування.

LT GERBIAMAS KOMPRESORINIO INHALIATORIAUS (NEBULAIZERIO) TURBO MINI NAUDOTOJAU

Dėkojame, kad pasirinkote TM Dr. Frei® modelio TURBO MINI nebulizatorį. Mes tikime, kad linkami įvertinus šio prietaiso kokybę, Jūs tapsite nuolatiniiais šveicariško prekės ženkl Dr. Frei® naudotojais.

Jūsų nebulizatorius yra skirtas astmos, lėtinę obstrukcinę plaučių ligų ir kitų respiratorinių ligų gydymui, paverčiant skystus medikamentus aerozoliu, kuris greitai ir patikimai prasiskverbia kaip į viršutinius, taip ir į apatinius kvėpavimo takus. Prieš pradėdami naudoti nebulizatorį, prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją. Šioje instrukcijoje išvardintų reikalavimų paisyimas užtikrins sklandų ir ilgą nebulizatoriaus tarnavimą. Dėl visų klausimų, susijusių su šio gaminiu, kreipkitės į oficialų atstovą arba į Jūsų šalyje esantį TM Dr. Frei® paslaugų centrą.

ĮVADAS	19
Kas yra nebulazeris ir kaip jis veikia?	19
Kada yra taikoma nebulazerinė terapija?	19
Nebulazerinės terapijos privalumai	19
PRIETAISO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI	19
Svarbi saugumo informacija	19
Priedų rinkinys	20
INHALIACINĖS TERAPIJOS ATLIKIMAS	20
Prietaiso naudojimas	20
Antgalio skirti nosiai praplauti naudojimas. Parinktis	21
Oro filtro keitimas	21
PRIETAISO PRIEŽIŪRA	21
Valymas	21
Gedimų šalinimas	21
TECHNINĖS PRIETAISO CHARAKTERISTIKOS	22
SIMBOLIŲ APRĄŠYMAS	22
GARANTIJA	22
GAMINTOJO NURODYMAI IR PAREIŠKIMAI - ELEKTROMAGNETINĖ SPINDULIUOTĖ	23

ĮVADAS

Kas yra nebulazeris ir kaip jis veikia?

Kompresorinis nebulazeris - tai įrenginys, kuris paveiktas suslėgto oro konvertuoja skystą medikamentą į smulkiadispersinį aerozolį. Aerozolio sudėtyje yra stambių ir smulkių dalelių. Kvėpuojant stambios dalelės veikiamos sunkio jėgos nusėda ant viršutinių kvėpavimo takų sienelių, o smulkios dalelės spėja pasiekti apatinius skitinius bronchus. Tokiu būdu medikamentas patenka į visas bronchinio medžio skiltis, įskaitant mažiausius bronchus ir alveoles, ir patenka į alveolių sienelėse esančias kraujagysles dideliais terapiniais kiekiais, neesant arba esant nedideliems šalutiniams poveikiams.

Kada yra taikoma nebulazerinė terapija?

Nebulazerinė terapija taikoma esant:

- ūminėms kvėpavimo sistemos ligoms;
- obstrukcinėms plaučių ligoms;
- lėtiniam kvėpavimo takų uždegimams, tokiems kaip lėtinis bronchitas, bronchinė astma (įskaitant lėtinę, nestabilią, esant sunkiam BA paūmėjimui), lėtinis faringitas;
- kvėpavimo takų infekcijoms;
- gleivių kokybės ir jų išsiskyrimo bronchuose sutrikimui;
- skirtingų rūšių kosuliui.

Nebulazerinės terapijos privalumai

Nebulazerinė terapija suteikia galimybę greitai paveikti uždegimo paveiktą zoną, naudojant dideles vaistų dozes, kas pagerina taikomo gydymo efektyvumą ir sumažina šalutinio poveikio riziką kitiems organams. Atsižvelgiant į tikslingą medikamento naudojimą - nebulazerinė terapija yra pats ekonomiškausias gydymo būdas, plačiai naudojamas vaikams, pagyvenusiems ir nusilpusiems žmonėms.

PRIETAISO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Svarbi saugumo informacija

- Prieš naudojimą, atidžiai perskaitykite instrukciją. Išsaugokite ją tolimesniam naudojimui, esant reikalui.
- Prietaisą naudokite tik kaip inhaliatorių terapiniais tikslais. Medikamento tipas, režimas ir vartojimo laikas - pagal gydytojo paskyrimą. Prietaiso surinkimas turi būti atliktas griežtai pagal šio vadovo nurodymus ir tik gamintojo nurodytais tikslais.
- Šis prietaisas netinka būti naudojamas su degiais anestetiniais mišiniais, kurių sudėtyje yra oro, deguonies arba azoto oksido.
- Prietaiso darbą gali sutrikdyti elektromagnetiniai trikdžiai, kurie atsiranda dėl Jūsų televizoriaus, radijo imtuvo ir t.t. darbo sutrikimų. Jeigu tai atsitinka pabandykite perkelti prietaisą į kita vietą, kol trikdžiai išnyks arba įjunkite jį į kita maitinimo lizdą.
- Niekada nenaudokite ilginųjų arba adapterių. Siekiant išvengti perkaitimų rekomenduojama naudoti kintamosios srovės laidą. Laikykite laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
- Po prietaiso naudojimo ir prieš jo valymą, visą laiką atjunkite prietaisą nuo pagrindinio maitinimo lizdo.
- Nelleskite įrenginio, jeigu jis netyčia įkrito į vandenį. Atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir nenaudokite jo. Susisiekiite su įgaliotu priežiūros centru.
- Nelleskite prietaiso šlapiomis rankomis.
- Neuždenkite ventiliacijos angų.

- Naudojimo metu įsitinkite, kad prietaisas stovi ant lygaus, stabilaus paviršiaus, tam, kad būtų išvengta taškymo.
- Nenaudokite prietaiso paciento miego metu.
- Visais klausimais kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Neardykite prietaiso. Jeigu prietaisas veikia ne taip kaip turėtų, išjunkite jį ir praežiūrėkite naudojimosi vadovą.
- Siekiant išvengti pavojingų situacijų nepalikite jokių pakavimo medžiagų (plastikinių maišelių, kartoninių dėžučių ir t.t.) vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Visus prietaiso priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jeigu prietaisą naudoja vaikai ar žmonės su fizine arba protine negalia, procesą turi akylai prižiūrėti suaugęs žmogus, kuris yra perskaityęs šį naudojimosi vadovą. Medikamentams skirtą talpą saugokite nepasiekiamoje vaikams iki 36 mėnesių vietoje, kadangi ją sudaro smulkios dalys, kurias galima praryti.
- Nenaudojama prietaisą visą laiką atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
- Rekomenduojamas vieno medicininio rinkinio individualus naudojimas.
- Po terapijos pabaigos nepalikite vaistinio preparato likučių medikamentams skirtoje talpoje ir/arba prietaiso prieduose.
- Valymas ir/arba prietaiso priežiūra turi būti vykdoma tik išjungus prietaisą ir ištraukus laidą iš maitinimo lizdo.
- Norint ištraukti kištuką iš maitinimo lizdo nenutraukite laido ar prietaiso.
- Tai medicinos prietaisas, skirtas naudoti namų sąlygomis ir turi būti naudojamas pagal gydytojo paskyrimą. Prietaisas turi būti naudojamas taip, kaip nurodyta naudojimosi vadove. Svarbu, kad pacientai perskaitytų ir išsiaiškintų kaip yra naudojamas prietaisas. Iškilus klausimams kreipkitės į savo platintoją arba į techninės priežiūros centrą.
- Jeigu prietaiso kištukas netelpa į maitinimo lizdą - susisiekite su kvalifikuotu specialistu, tam, kad kištukas būtų pakeistas. Nenaudokite adapterių, trišakių ir/arba ilgintuvų.
- Neuždenkite vėdinimosi angos.
- Montavimas turi būti atliekamas taip, kaip nurodyta instrukcijoje, o naudojimas - pagal gamintojo nurodymus. Neteisingas prietaiso montavimas ir/arba naudojimas gali sužaloti žmones, gyvūnus arba daiktus. Gamintojas už tai neatsako.
- Nenaudokite prietaiso prausiantis vonioje arba duše.
- Saugokite prietaisą nuo dulkių (kurios gali užblokuoti ventilacijos angas), šilumos (kuri gali deformuoti paviršius), saulės šviesos arba kitų atmosferos veiksnių, kurie gali sugadinti prietaisą.
- Nenaudokite prietaiso šalia galimų trukdžių šaltinių (pavyzdžiui, tokių šilumos šaltinių kaip židiniai, elektros arba dujų šildytuvų; tokių garų šaltinių kaip, katilų ir virdulių; tokių elektromagnetinės spinduliuotės šaltinių kaip, mikrobangų krosnelių, Wi-Fi įrenginių).
- Laikykite augintinams nepasiekiamoje vietoje, nes jie gali užteršti tiesioginio kontakto su pacientu paviršius, užblokuoti ventilacijos angas arba apskritai paveikti taikomos terapijos kokybę.
- Prietaisas generuoja suspastą orą. Šalutiniai poveikiai gali atsirasti dėl paciento jautrumo naudojamiems medikamentams.




Elektrros prietaisai turi būti utilizuojami pagal vietinių taisyklių reikalavus, neišmetami kartu su buitineis atliekomis.

NAUDOJIMOSI VADOVA SAUGOKITE VISĄ PRIETAISO NAUDOJIMOSI LAIKOTARPĮ

Priedų rinkinys

- 1 Antgalis nosiai
- 2 Kandiklis
- 3 Kaukė suaugusiems
- 4 Vaikiška kaukė
- 5 Talpa skirta medikamentams - viršutinė dalis
- 6 Talpa skirta medikamentams - apatinė dalis
- 7 Talpa skirta medikamentams - oro tiekimo anga
- 8 Sklendė
- 9 Oro vamzdelis
- 10 Atsarginiai oro filtrai (5 vnt.)

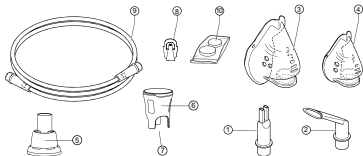


INHALIACINĖS TERAPIJOS ATLIKIMAS


Tai IIa klasės medicinos prietaisas, kuris konvertuoja skystą medikamentą į aerozolių formą, kad tiesiogiai į įpurkštą į kvėpavimo aparatą. Prietaisas pasiskaidžia medikamentus kaip suspensijos, taip ir tirpalo pavidalu. Terapijos poveikis yra silpnesnis naudojant aliejinus ir/arba pastos pavidalo medikamentus. Nepurkškite eterinių aliejų! Nekaitinkite skystų ir/arba spirtinių tirpalų. Talpa skirta medikamentams ir visi prietaiso priedai nėra sterilūs. Prieš naudojimą perskaitykite punktą «Prietaiso naudojimas».

Prietaiso naudojimas

1. Pastatykite prietaisą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
2. Įsitinkite, kad nominali įtampa atitinka elektros tinklo įtampą.
3. Įjunkite prietaisą į elektros lizdą.
4. Atidarykite medikamentams skirtą talpą, sukamaisiais judesiais atjunkdami dvi talpas (A) dalis.
5. Įstatykite sklendę į medikamentams skirtos talpos dugną, kaip parodyta (B) paveiksluke.
6. Užpildykite medikamentams skirtos talpos apatinę dalį gydymui paruoštu preparatu (C). Pastaba: Medikamentams skirtos talpos apatinėje dalyje yra nurodomosios žymės.
7. Uždarykite medikamentams skirtą talpą, sujungus dvi jos dalis sukamaisiais judesiais (D).
8. Prie medikamentams skirtos talpos (E) prijunkite oro vamzdelį (9).

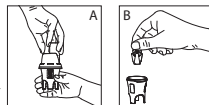

9. Prijunkite oro vamzdelį (9) prie prietaiso oro angos.
10. Įstatykite į medikamentams skirtą talpą visus reikiamus priedus: kaukę, kandiklį arba nosies antgalį (F).
11. Įjunkite prietaisą pasukus jungiklį į ON padėtį (JUONGTA).
12. Po naudojimo išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo tinklo. Prieš pakartotiną prietaiso įjungimą įsitikinkite, kad jis atvėso iki kambario temperatūros.

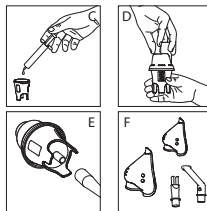

REKOMENDACIJOS TINKAMAM TERAPIJOS NAUDOJIMUI


- Patogiai įsistatykite vertikaliaje padėtyje.
- Jeigu naudojate kaukę (suaugusiems arba vaikiška) įsitikinkite, kad ji gerai prigludusi prie veido. Kaukėje yra angos skirtos oro srautui iškvėpimo metu. Kvėpuokite lengvai ir darykite trumpas pauzes po kiekvieno įkvėpimo.
- Jeigu naudojate kandiklį, laikykite jį tarp dantų, suspaustomis lūpomis. Kvėpuokite per burną.
- Jeigu naudojamas nosies antgalis, pakelkite jį prie nosies. Kvėpuokite per burną.
- Inhaliacija yra baigta, kai nebėra generuojamas aerolis.

Antgalio skirto nosiai praplauti naudojimas. Parinktis

Antgalį skirta nosiai praplauti galima įsigyti kaip papildomą parinktį šiam kompresoriniam nebulizeriui.

Inhaliacijos nosiai praplauti yra skirtas burnos ertmės valymui, slogos ir lėtiniių rinitų gydymui. Tam, kad jo pasinaudoti, laikykitės nurodymų:

1. Atjunkite viršutinę dalį sukamaisiais judesiais (a).
2. Pripildykite medikamentams skirtą talpą (b).
3. Įstatykite skleidę (c).
4. Uždarykite antgalį skirtą nosiai praplauti, sujungus dvi dalis sukamaisiais judesiais.
5. Prijunkite vamzdelį prie oro angos (d).
6. Pakelkite antgalį skirtą nosiai praplauti prie šnervės. Neįstatykite jo į nosį. Kvėpuokite per nosį.
7. Po terapijos pabaigos atsargiai išvalykite antgalį skirta nosiai praplauti.

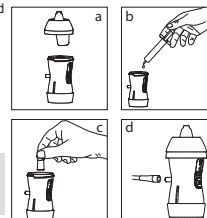


DĖMESIO:

Neįkvėpkite horizontalioje padėtyje. Nelaikykite medikamentams skirtos talpos didesniu nei 45° kampu. Laikykite priedus gerai vėdinamoje, apsaugotoje nuo šilumos ir tiesioginių saulės spindulių vietoje (F).

Oro filtro keitimas

Filtrus turi būti keičiamas po 30 eksploatavimo valandų arba kai jis papilkėja. Atsarginiai oro filtrai (H). Norint pakeisti oro filterį pakelkite plokščiu atsuktuvu dangtelį taip, kaip parodyta I paveikslėlyje. Išimkite seną filtrą ir įdėkite naują (10). Uždiekite filtro fiksavimo dangtelį į korpusą. Įsitikinkite, kad jis gerai prigludęs prie paviršiaus.

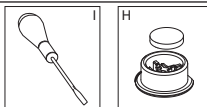

PRIETAISO PRIEŽIŪRA

Valymas

Po kiekvienos inhaliacijos sesijos atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo ir išvalykite prietaisą bei priedus. Dėmesio: naudokite tik tuos priedus, kurie yra prietaiso komplekte, kitų prietaisai gali paveikti gydymo veiksmingumą.

KANDIKLIO IR NOSIES ANTGALIO VALYMAS

Panaudojus prietaisus, nuodugniai jų valymui naudokite geriamąjį vandenį. Jie gali būti sterilizuojami, virinant 5–10 minučių vandenyje arba patalpinant juos į cheminę dezinfekavimo priemonę, laikantys nurodymų ir praplovus geriamuoju vandeniu. Palikite juos išdžiūti natūraliu būdu.

MEDIKAMENTAMS SKIRTOS TALPOS VALYMAS

Po naudojimosi, atjunkite dvi medikamentams skirtos talpos dalis, išplaukite jas su muilu ir karštu vandeniu, kruopščiai išskalaukite. Pašalinkite vandens likučius minkšta, švaria ir sausa medžiaga ir palikite jas išdžiūti natūraliu būdu švarioje vietoje. Norint sterilizuoti medikamentams skirtą talpą, laikantis nurodymų parašytų ant sterilizatoriaus pakuotės, padenkite ją šaltu sterilizavimo tirpalu. Rekomenduojamas talpos skirtos medikamentams individualus naudojimas kiekvienam pacientui, iki 6 mėnesiu arba 120 naudojimui. Nevirkinkite medikamentams skirtos talpos. Atsargiai plaukite kaukę ir vamzdelį, naudojant tik dezinfekuojantį tirpalą.

UŽTERŠIMAS MIKROBAIS

Esant virusinės ar mikrobines kilmės patologijai, kai egzistuoja tikimybė užsikrėsti, prietaisus ir jo priedais neturi būti naudojami kartu su kitais pacientais.

Gedimų šalinimas

PROBLEMA	VEIKSMAI
Prietaisas neįsijungia.	<ul style="list-style-type: none"> • Įsitikinkite, kad kištukas teisingai įkištas į maitinimo lizdą. • Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas (I).

Prietaisas įjungtas, bet jis nepurskia.

- Įsitikinkite, kad sklendė buvo įstatyta į medikamentams skirtą talpą (8).
- Įsitikinkite, kad oro vamzdelis nėra surenkintas, nepažeistas (9).
- Įsitikinkite, kad oro filtras nėra užkimštas, užterštas. Esant reikaliui pakeiskite filtrą (10).
- Įsitikinkite, kad medikamentams skirta talpa pripildyta gydomaisiais preparatais.

PASTABA: Jeigu nesigauna atstatyti normalaus prietaiso darbo, nepaisant atliktų patikrinimų, susisiekite su aptarnavimu **Dr. Frei®** centru.

TECHNINIS PRIETAISO CHARAKTERISTIKOS

Besisukantis, nesužeptas stūmoklis. Medicininis IIA klasės prietaisas atitinkantis 93/42/EEC direktyvą (Medicinos prietaisų direktyva).

Talpna skirta medikamentams **Linear**. **Dalelių dydis:** 3 μm MMAD (EN13544-1); **Prietaiso aprašymas:** kompresorius inhalatorius; **Pasklidimo greitis, ml/min.:** 0,3 ± 0,05 ml/min; **Oro srautas (maksimalus):** 15 ± 2 l/min; **Talpna medikamentui:** 2 – 10 ml; **Likutinis tūris, ml:** 0,85 ± 0,2 ml; **Triukšmo lygis:** žemas (mažiau 55 Db); **Naudojimo periodiškumas:** 30 minučių – ON (ĮJUNGTA)/30 minučių – OFF (IŠJUNGTA);

Prietais: oro vamzdelis (1,0 m), suaugusiojo kaukė, vaikiška kaukė, kandiklis, antgalis nosiai, atsarginiai oro filtras (5 vnt.);

Antgalis skirtas nosiai praplauti: parinktis; **Galia:** 220 V/50 Hz; **Maitinimo laido ilgis:** 1,4 m; **Svoris:** 1,3 kg; **Matmenys:** 167×106×164 mm; **Galia:** 120 VA

Naudojimo sąlygos:

Leidžiama aplinkos temperatūra: minimali 5°C - maksimali 40°C

Oro drėgnumas: minimalus santykinis drėgnumas 15% - maksimalus santykinis drėgnumas 93%

Atmosferos slėgis: minimalus 700hPa – maksimalus 1060hPa (maksimalus naudojimo aukštis ≤ 2000m)

Saugojimo sąlygos:

Leidžiama aplinkos temperatūra: minimali -25°C/ maksimali +70°C

Oro drėgnumas: minimalus santykinis drėgnumas 0% - maksimalus santykinis drėgnumas 93%











Atmosferos slėgis: minimalus 500hPa – maksimalus 1060hPa

*Galimi techniniai ir dizaino pakaitalai, neįsėjęs iš anksto.

Tikėtinas šio prietaiso tarnavimo laikas - 2000 terapijos ciklų, kurių vidutinė trukmė yra 8 minutės.

Elektromedicininiai prietaisai reikalauja ypatingos priežiūros. Prietaiso įrengimo ir naudojimo metu, atsižvelgiant į elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus, būtina, kad jie būtų įrengti ir/arba naudojami pagal gamintojo techninius nurodymus. Egzistuoja elektromagnetinės sąveikos su kitais prietaisais atsiradimo tikimybė, ypač su kitais prietaisais skirtais analizei ir apdorojimui. Radijo ir mobiliųjų telekomunikacijų, taip nešiojami aukšto dažnio prietaisai (mobilieji telefonai ir belaidžios jungtys) prietaisai gali sukelti trikdžius elektromagnetinio prietaiso veikime.

SIMBOLIŲ APRAŠYMAS

SIMBOLIS	REIKŠMĖ	SIMBOLIS	REIKŠMĖ
	Kintamoji srovė		Žymėjimas CE pagal 93/42/EEC direktyvą
	Dviguba izoliacija		Nenaudokite prausiantis duše arba vonioje
	Naudojama BF tipo dalis	I/ON	Režimas ĮJUNGTA
	Būtinai perskaityti naudojimosi vadovą	O/OFF	Režimas IŠJUNGTA
	Bendros įspėjimo simbolis		Perskaitykite naudojimosi vadovą
IP 21	Apsauga nuo kietų daiktų ir skysčių patekimo (apsaugotas nuo didesnių nei 12 mm kietų daiktų patekimo, apsaugotas piršto pagalba; apsaugotas nuo vandens lašų patekimo, nukreiptų vertikaliai)		Laikyti sausoje vietoje
	Šis produktas (įskaitant visus įeinančius priedus) jo naudojimo pabaigoje turi būti pristatytas naudotojo arba platintojo, į perdirbimo vietą, elektrinių arba elektroninių mašinų pagalba.		

GARANTIJA

Nuo pirkimo akimirks prietaisui yra suteikiama 2 metų garantija. Garantija negalioja sudedamosioms dalims. Garantija galioja tik esant užpildytam oficialaus atstovo garantiniam talonui, patvirtinančiam pardavimo datą ir kasos čekiui.

• Gamintojas ir įgaliotas atstovas neatsako už gedimus atsiradusius dėl netinkamo ir atsainaus elgesio.

• Visi prietaiso montavimo, derinimo ar remonto darbai turi būti atliekami tik specializuotųjų įgaliotųjų **TM Dr. Frei®** Jūsų šalyje centrų darbuotojų.

Norint suremontuoti ar įsigyti sudedamųjų dalių kreipkitės į įgaliotą **TM Dr. Frei®** centro atstovą Jūsų šalyje.

GAMINTOJO PAREIŠKĪMAI IR NURODYMAI - ELEKTROMAGNETINĒ SPINDULIUOTĒ

Aerozolīnās terapijas priekšais yra skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, aprašytoje žemiau:

SPINDULIUOTĒS BANDYMAS	ATITIKMUO	NURODYMAI DĒL ELEKTROMAGNETINĒS APLINKOS
AD (aukšto dažnio) spinduliuotė	Grupė 1	Aukšto dažnio energija prietaise yra naudojama tik jo vidinėms funkcijoms. Todėl AD spinduliuotės lygis labai žemas, ir nesudaro trikdžių kitiems elektros įtaisams.
AD (aukšto dažnio) spinduliuotė CISPR11 Harmoninių sudedamųjų dalių spinduliuotė IEC/EN 61000-3-2 Įtampas svyravimui/pulsacija IEC/EN 61000-3-3	Klasė (B) Klasė (A)	Prietaisai yra tinkamas naudoti bet kokiose vidinėse patalpose, taip pat namuose, kuriuose standartinis elektros tinklas skirtas gyvenamųjų patalpų elektros tiekimui.
Elektrostatinės iškvros IEC/EN 61000-4-2	±6kV kontaktas ±8kV oras	Grindys turi būti medinės, betoninės arba padengtos keraminėmis plytelėmis. Jeigu grindys padengtos sintetinė medžiaga, santykinis drėgnumas turi būti mažiau, nei 30%.
Greiti elektros perėjimo procesai/impulsai IEC/EN 61000-4-4	±2kV galia	Tinklo elektros energija turi atitikti bendro naudojimo elektros standartus.
Šuoliai IEC/EN 61000-4-5	±1kV diferencialinis režimas	Tinklo elektros energija turi atitikti bendro naudojimo elektros standartus.
Įtampas kritimas, trumpalaikiai nutrikimai ir įtampas pakitimai IEC/EN 61000-4-11	<5% UT 0,5 ciklo 40% UT 5 ciklams 70% UT 25 ciklams <5% UT 5 sekundėms	Tinklo elektros energija turi atitikti bendro naudojimo elektros standartus. Jeigu naudojotas pageidaujama, kad prietaisai dirbtų nepertraukiamai, rekomenduojama prietaisui naudoti nepertraukiamai maitinimo šaltinį.
Magnetinis laukas IEC/EN 61000-4-8	3A/m	Magnetinis laukas turi atitikti bendro naudojimo elektros tiekimo sistemos standartus.
Elektromagnetinis suderinamumas IEC/EN 61000-4-6	3V 150 kHz - 80 MHz 8 (gyvybės palaikymo aparatams)	
Atsparumas radijo dažnių elektromagnetiniam laukui IEC/EN 61000-4-3	3V/m 80 MHz - 2.5GHz (ne gyvybės palaikymo aparatams)	

PASTABA: UT - kintamosios srovės įtampa maitinimo tinkle.

LV GODĀTAIS, KOMPRESORA INHALATORA (NEBULAIZERA) TURBO MINI, LIETOTĀJ

Pateicames, ka esat izvēlējies Turbo Mini modeļa nebulaizeri TM Dr. Fre[®]. Mēs esam pārliecināti, ka patiesi novērtējt šīs ierīces kvalitāti, Jūs kļūstiet par pastāvīgu Šveices tīrgus markas TM Dr. Fre[®] lietotāju.

Jūsu nebulaizeris ir domāts hroniskai astmai, hroniskām obstruktīvām plaušu slimībām un citām respiratorām slimībām, veicot šķidrā ārstniecisko līdzekļu pārvēšanu aerosolā, kas ātri un droši nokļūst gan augšējās, gan apakšējās elpceļos.

Pirms nebulaizera lietošanas uzsākšanas, lūdzam, uzmanīgi izlasiet instrukciju. Tajā uzskaitīto prasību ievērošana nodrošinās stabili nebulaizera darbu ilgstošā laika periodā. Attiecībā par visiem jautājumiem, kas skar šo produktu, lūdzam, vērsieties pie oficiālā pārstāvja vai Jūsu valsts TM Dr. Fre[®] servisa centrā.

SATURS

IEVADS	24
Kas tas ir nebulaizeris un kā tas darbojas?	24
Kad tiek pielietota nebulaizera terapija?	24
Nebulaizera terapijas priekšrocības	24
IERĪCES SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI	24
Svarīga drošības informācija	24
Aksesuāru klāsts	25
INHALĀCIJAS TERAPIJAS VEIKŠANA	25
Ierīces ekspluatācija	25
Deguna skalošanas uzgāja ekspluatācija. Opcija	25
Gaisa filtra nomaiņa	26
IERĪCES APKOPE	26
Attīršana	26
Bojājumu novēršana	26
IERĪCES TEHNISKIE PARAMETRI	26
SIMBOLU APRAKSTS	27

Kas tas ir nebulaizeris un kā tas darbojas?

Kompresora nebulaizeris ir ierīce, kas ar saspīestu gaisa palīdzību pārveido šķidrā ārstniecisko līdzekli sīkas dispersijas aerosolā. Aerosols satur lielas un mazas daļiņas. Elpojot, smaguma spēka iedarbībā, lielās daļiņas nosēžas uz augšējo elpceļu sienājiem, bet mazās daļiņas pagust sasniedz apakšējās bronhu daļas. Tādējādi, ārstnieciskais līdzeklis nokļūst visos bronhu koka apgabalos, ieskaitot vismazākos bronhus un alveolas, un nokļūst alveolu sieniju asinsvados lielās terapeitiskās devās, turklāt ir vērojami nenozīmīgas blaknes, vai to nav vispār.

Kad tiek pielietota nebulaizera terapija?

Nebulaizera terapiju izmanto:

- asu respiratoru slimību gadījumos;
- obstruktīvu plaušu slimību gadījumos
- hronisku elpceļu iekaisuma procesu gadījumā, tādu kā hroniskais bronhīts, bronhiālā astma (tostarp, hroniskas, nestablas, BA smaga saasinājuma gadījumā), hroniska faringīta gadījumā;
- elpceļu infekciju gadījumā;
- sekurēta kvalitātes pasliktināšanās un tā izdalīšanās traucējumu gadījumā bronhos;
- dažādu klepus veidu gadījumā..

Nebulaizera terapijas priekšrocības

Nebulaizera terapija sniedz iespēju ātri iedarboties uz iekaisuma zonu ar lielām zāļu devām, tādējādi palielinot veicamās ārstēšanas efektivitāti un samazinā blakusiedarbību risku citiem orgāniem. Nebulaizera terapija ir visekonomiskākais ārstēšanas veids, raugoties no mērķtiecīgas ārstniecisko zāļu izmantošanas skatupunkta, plaši tiek lietota bērniem, veciem cilvēkiem, novajinātiem pacientiem.

IERĪCES SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI

Svarīga drošības informācija

- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju. Uzglabājiet to tālākai izmantošanai nepieciešamības gadījumā.
- Izmantojiet ierīci tikai kā inhalatoru terapeitiskos nolūkos. Ārstnieciskā līdzekļa tips, tā lietošanas režīms un laiks - atbilstoši medicīniskajiem priekšrakstiem. Ierīces saikšana ir jāveic precīzi tā, kā tas ir norādīts šajā instrukcijā, un tikai tiem nolūkiem, ko ir paudis ražotājs.
- Šī ierīce nav piemērota, lai izmantotu viegli uzliesmojošus anestēzijas maisījumus, kas satur gaisu, skābekli vai slāpekļa oksīdu.
- Ierīces darbību var ietekmēt elektromagnētiskie traucējumi, kas rodas Jūsu televizora, radio utt. darbības traucējumu rezultātā. Gadījumā, ja tas notiek, tad izmēģiniet pārvietot ierīci, iekams šie traucējumi nepazūd, jeb ar pievienojiet to citai rozetei.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet nekād pagarinātājus vai adapterus. Rekomendējams izmantot tīkla vadu, lai pasargātu no bīstamas pārkaršanas. Turiet vadu pēc iespējas tālāk no karstām virsmām.
- Vienmēr atslēdziet ierīci no pamata rozetes, pēc lietošanas un pirms tīrīšanas veikšanas.
- Neskarieties pie ierīces, gadījumā, ja tā iekrīt idenā. Atvienojiet to no elektropadeves avota un to nelietojiet. Sazinieties ar autorizēto servisa centru.
- Neskarieties pie ierīces ar slapjām rokām.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres.
- Lietošanas laikā pārīcinieties par to, ka ierīce atrodas uz līdzenas un stabilas virsmas, lai novērstu izšķāstīšanos.
- Neizmantojiet ierīci laikā, kad pacients gul.
- Attiecībā par visiem apkopes jautājumiem, vēršieties servisa centrā. Neatveriet ierīci. Gadījumā, ja ierīce nestrādā kā pienāks, izslēdziet to un lasiet ekspluatācijas instrukciju.
- Neatstājiet jebkādu iepakojuma materiālu (plastmasas maisiņu, kartona kārbas utt.) bērniem pieejamā vietā, lai izvairītos no bīstamu situāciju rašanās.
- Uzglabājiet aksesuārus bērniem nepieejamā vietā. Ierīces izmantošana bērniem un cilvēkiem ar ierobežotām fiziskajām vai garīgajām spējām ir jāveic pieaugušā uzraudzībā, kurš ir izlasījis šo lietošanas instrukciju. Uzglabājiet medikamentu trauku tādās vietās, kuras nav pieejamas bērniem jaunākiem par 36 mēnešiem, jo tas satur sīkas daļiņas, kuras var norīt.
- Vienmēr atslēdziet ierīci no rozetes, laikā, kad tā netiek izmantota.
- Rekomendējama individuāla izmantošana vienam aksesuāru klāsta medicīniskajam piederumam.
- Neatstājiet ārstnieciskā līdzekļa atlikumus medikamentu traukos un/ vai aksesuāros pēc terapijas pabeigšanas.
- Ierīces tīrīšana un/ vai apkope ir jāveic tikai pēc ierīces izslēgšanas un brošāšanas vada atvienošanas no rozetes.
- Nevelciet ar vada vai ierīci, lai izņemtu kontaktdakšīņu no rozetes.
- Šī ir medicīniska ierīce lietošanai mājās apstākļos, un tā ir jāizmanto atbilstoši medicīniskajiem priekšrakstiem. Ierīce ir jālieto tā, kā tas ir atainots lietošanas instrukcijā. Ir svarīgi, lai pacienti tiktu izslēpti un tikusi skaidrībā ar to, kā ir jālieto ierīce. Saisītībā ar jebkādiem jautājumiem vēršieties pie Jūsu dīlera vai ar ierīces centru.
- Gadījumā, ja ierīces kontaktdakšīņa nav piemērota rozetei, sazinieties ar kvalificētu speciālistu, lai veiktu tās nomainī. Neizmantojiet adapterus, trejgabalus un/ vai pagarinātājus.
- Nenobloķējiet gaisa ņemšanas atveri.
- Uzstādīšana ir jāveic saskaņā ar instrukcijām, bet lietošana - tā, kā to ir pavēstījis ražotājs. Ierīces nepareiza uzstādīšana un/ vai nepareiza lietošana var nodarīt kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem vai arī lietām. Ražotājs nav atbildīgs par to.
- Neizmantojiet ierīci vannosšanās vai dušošanās laikā.
- Nepakļaujiet ierīci putekļu iedarbībai (tādējādi var nobloķēt ventilācijas atveres), siltuma iedarbībai (tādējādi var deformēties virsmas), saules gaismas un citu atmosfēres aģentu iedarbībai, kā arī var radīt ierīces sabojāšanos.

- Neizmantojiet ierīci iespējamo traucējumu avotu tuvumā (piemēram, siltuma avoti, tādi kā kamīni, elektriskie vai gāzes sildītāji; tvaika avoti, tādi kā boileri vai tējkannas; elektromagnētiskā starojuma avoti, tādi kā mikroviļņu krāsnis, Wi-Fi ierīces).
- Uzglabājiet tādas vietas, kas nav pieejamas mājām mīļiem, kuri var nosmērt virsmu, kas ir paredzētas tiešam kontaktam ar pacientu, nobloķēt ventilācijas atveres, vai kopumā negatīvi ietekmēt veicamās terapijas kvalitāti.
- Ierīce ģenerē saspiestu gaisu. Blakus parādības var rasties, ja ir jutīgums pret izmantojamajiem ārstnieciskajiem līdzekļiem.




Elektriskās ierīces ir jāatstājas atbilstošās vietējām priekšrakstiem, tās nedrīkst iznest kopā ar sadzīves atkritumiem.

UZGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU VISA IERĪCES KALPOŠANAS LAIKA GARUMĀ

Aksesuāru klāsts

- 1 Deguna uzgalis
- 2 Iemutis
- 3 Pieaugušā maska
- 4 Bērnu maska
- 5 Medikamentu trauks - augšējā daļa
- 6 Medikamentu trauks - apakšējā daļa
- 7 Medikamentu trauks - atvere gaisa padevei
- 8 Aizvars
- 9 Gaisa caurulīte
- 10 Rezerves gaisa filtri (5 gab.)

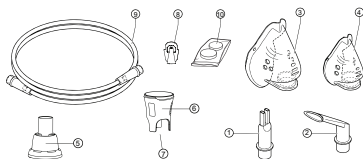


INHALĀCIJAS TERAPIJAS VEIKŠANA

Šī ir medicīniska IIa klases ierīce, kas pārveido šķidr ārstniecisko līdzekli aerosolā, lai to ievadītu tieši elpošanas aparātā. Ierīce izsmidzina ārstnieciskos preparātus gan suspensiju veidā, gan šķīdumu veidā. Terapeitiskais efekts ir mazāk izteikts, ja izmanto eļļainus un/ pastveidīgus ārstnieciskos līdzekļus. Neizmīdziniet ēteriskās eļļas!

Neuzkarsējiet šķīdorus un/ vai spirtos šķīdumus. Medikamentu trauks un visi aksesuāri nav sterili. Pirms lietošanas izlasiet sadaļu «Ierīces apkope».

Ierīces ekspluatācija

1. Uzstādi ierīci uz līdzenas, stabilas virsmas.
2. Pārīcinieties par to, ka nominālais spriegums atbilst tīkla spriegumam.
3. Pieslēdziet ierīci pie rozetes.
4. Atveriet medikamentu trauku, atvienojot divas trauka daļas (A) atskrūvējot.
5. Iestadiet aizvaru medikamentu trauka apakšdaļā tā, kā tas ir atainots zīmējumā (B).
6. Piepildiet trauka apakšējo daļu ar ārstniecisko līdzekli (C). Piezīme: medikamentu trauka apakšdaļā atrodas norādītais atzīme.
7. Aizveriet medikamentu trauku, saskrūvējot divas daļas (D).
8. Pievienojiet gaisa caurulīti (9) medikamentu traukam (E).
9. Pievienojiet gaisa caurulīti (9) ierīces gaisa atveri.
10. Ievietojiet medikamentu traukā nepieciešamos aksesuārus: masku, iemuti vai deguna uzgali (F).
11. Ieslēdziet ierīci, iestatot slēdzi ON pozīcijā (IESL).
12. Pēc lietošanas, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no tīkla. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas, pārīcinieties par to, ka tā ir atdzīsusī līdz istabas temperatūrai.

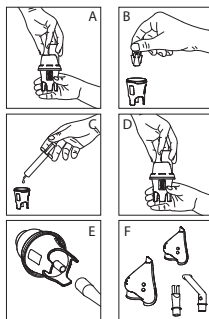


REKOMENDĀCIJAI PAREIZAI IZMANTOŠANAI TERAPIJĀ

- Iegemiet ērtu vertikālu pozīciju.
- Gadījumā, ja tiek izmantota maska (pieaugušajiem vai bērniem), pārīcinieties par to, ka tā bīvi pieguļ sejai. Maskā ir atveres gaisa plūsmai izelpas fāzes laikā. Elpojiet viegli un veiciet īsas pauzes pēc katras ieelpas.
- Gadījumā, ja tiek izmantots iemutis, turiet to starp zobiem, saņožot zobus. Elpojiet caur muti.
- Gadījumā, ja tiek izmantots deguna uzgalis, pielieciet to pie deguna. Elpojiet caur degunu.
- Inhalācija ir pabeigta tad, kad vairs neveidojas aerosols.

Deguna skalošanas uzgala ekspluatācija. Opcija



Deguna skalošanas uzgali ir iespējams iegādāties kā papildus opciju šim kompresora nebulizerim. Deguna skalošanas uzgalis ir domāts deguna dobuma attīrīšanai un iesnu, hronisku rinītu ārstēšanai. Lai to izmantotu, ievērojiet instrukcijas:

1. Atvienojiet, atskrūvējot augšdaļu (a).
2. Piepildiet medikamentu trauku (b).
3. Iestadiet aizvaru (c).
4. Aizveriet deguna skalošanas uzgali, savienojot skrūvējot divas daļas.
5. Pievienojiet caurulīti gaisa uztvērējam (d).
6. Pielieciet deguna skalošanas uzgali pie deguna. Neievietojiet to degunā. Elpojiet caur degunu.
7. Pēc terapijas pabeigšanas, akurāti iztīriet deguna skalošanas uzgali.

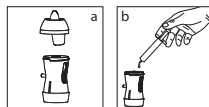

UZMANĪBU:

Neielepjojiet atrodoties horizontālā stāvoklī. Nesagāziet medikamentu trauku vairāk kā 45°. Uzglabājiet aksešu rūsu labi vēdināmā, aizsargātā no siltuma un tiešiem saules stariem vietā (F).

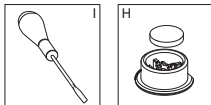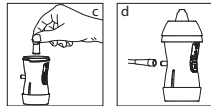

Gaisa filtra nomaiņa

Filtrs ir jāmaina pēc 30 lietošanas stundām, vai tad, kad tas kļūst pelēks. Rezerves gaisa filtri (H). Filtra nomaiņa, paceliet vāciņu ar plakana skrūvgrieža palīdzību tā, kā tas ir atainots I attēlā. Izņemiet veco filtru un ievietojiet jauno (10). Uzstādiat fiksējošo filtra vāciņu korpusā, pārliecinoties par to, ka tas bīvi pieguļst virsmai.

IERĪCES APKOPE

Attīrīšana

Pēc katra inhalācijas seansa atvienojiet ierīci no rozetes, un iztīriet ierīci un aksešu rūsu. Uzmanību: izmantojiet tikai tos aksešu rūsus, kas ietilpst ierīces komplektācijā, citi aksešu rūsi var iespaidot ārstēšanas efektivitāti.

ĪEMUŠĀ UN DEGUNA UZGAĻA ATTĪRĪŠANA

Izmantojiet dzeramo ūdeni, lai rūpīgi attīrītu šos aksešu rūsus, lietošanas laikā. Tos var sterilizēt, vārot 5-10 minūtes ūdenī, vai arī ievietojot ķīmiskajā dezinfekcijas līdzeklī, ievērojot instrukcijas, un izskalojot ar dzeramo ūdeni. Atstājiet tos izžūt dabiskā veidā.

MEDIKAMENTU TRAUKA ATTĪRĪŠANA

Pēc lietošanas, atvienojiet medikamentu trauka divas daļas, izmazgājiet tās ar ziepēm un karstu ūdeni, un rūpīgi izskalojiet.

Noslaukiet ūdens paliekas ar mitru, tīru un sausu drāniņu, un atstājiet tos izžūt dabiskā veidā tīrā vietā.

Sterilizēšanai pārklājiet medikamentu trauku ar aukstu sterilizēšanas šķīdumu, ievērojot instrukcijas uz sterilizatora iepakojuma. Rekomendējama individuāla medikamentu trauka izmantošana katram pacientam atsevišķi, izmantošanas laiks ir līdz 6 mēnešiem vai 120 lietošanas reizēm. Nevāriet medikamentu trauku. Akurāti mazgājiet masku un caurules, izmantojot tikai dezinfekcijas šķīdumu.

MIKROBU PIESĀRŅOJUMS

Mikrobu vai vīrusu izcelsmes patoloģijas gadījumā, ja pastāv infekcijas draudi, ierīci un aksešu rūsus nedrīkst lietot kopā ar citiem pacientiem.

Bojājumu novēršana

PROBLĒMA	DARBĪBAS
ierīce neieslēdzas.	<ul style="list-style-type: none"> • Pārliecinieties, ka kontaktdakšiņa ir pareizi ievietota rozetē. • Pārliecinieties par to, ka pareizi ir izvēlēts slēdža (I) ieslēgšanas režīms.
ierīce ir ieslēgta, taču nesmidzina	<ul style="list-style-type: none"> • Pārliecinieties par to, ka ir ticis ievietots aizvars medikamentu traukā (8). • Pārliecinieties par to, ka gaisa caurulīte nav saliekusies un sabojāta (9). • Pārliecinieties par to, gaisa filtrs nav bloķēts un piesārņots. Nepieciešamības gadījumā nomainiet filtru (10). • Pārliecinieties par to, ka medikamentu trauks ir piepildīts ar ārstniecisko līdzekli.

PIEZĪME: gadījumā, ja neizdodas atjaunot ierīces normālu darbu, neraugoties uz to, ka ir veiktas neskaitāmas pārbaudes, sazinieties ar **Dr. Frei®** servisa centru.

IERĪCES TEHNISKIE PARAMETRI

Rotējošais piespiedējs virzulis, bez elļošanas. IIA klases medicīniskā ierīce saskaņā ar direktīvu 93/42/EEC (Direktīva medicīniskajām ierīcēm).

Linear medikamentu trauks

Daļņu izmērs: 3 μm MMAD (EN13544-1); **Ierīces apraksts:** kompresora inhalators; **Izsmidzināšanas ātrums, ml/min.:** 0,3±0,05 ml/min; **Gaisa plūsmas (maksimālā):** 15±2 l/min; **Trauks zāļiem:** 2-10 ml; **Atlikušais apjoms, ml:** 0,85±0,2 ml; **Trokšņu līmenis:** zems (zem 55 Db); **Izmantošanas periodiskums:** 30 minūtes - ON (IESL.) 30 minūtes - OFF (IZSL); **Aksešu rūsi:** gaisa caurulīte (1,0 m), pieaugušo maska, bērnu maska, ierīču, deguna uzgaļi, rezerves gaisa filtri (5 gab.); **Deguna skalošanas uzgaļi:** opcija; **Jauda:** 220 V/50Hz; **Barošanas vada garums:** 1,4 m; **Svars:** 1,3 kg; **Gabarīti:** 167×106×164 mm; **Jauda:** 120 W;

Eksploataācijas nosacījumi:

Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra: minimālā 5°C - maksimālā 40°C

Gaisa mitrums: minimālais - 15% relatīvā mitruma, maksimālais - 93% relatīvā mitruma

Atmosfēras spiediens: minimālais - 700 GPa, maksimālais - 1060 GPa (maksimālais eksploataācijas augstums ≤ 2000m)

Uzglabāšanas nosacījumi:

Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra: minimālā -25°C - maksimālā +70°C

Gaisa mitrums: minimālais - 0% relatīvā mitruma, maksimālais - 93% relatīvā mitruma

Atmosfēras spiediens: minimālais - 500 GPa, maksimālais - 1060GPa

* Ir iespējamas tehniskās izmaiņas un dizaina izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šīs ierīces paredzamais kalpošanas ilgums - 2000 terapijas cikli, kuru vidējais ilgums ir 8 minūtes.

Elektromedicīniskajām ierīcēm ir nepieciešama īpaša apkope. Uzsādzīšanas un izmantošanas laikā, ņemot vērā elektromagnētiskās saderības prasības, nepieciešams, lai tās tiktu uzstādītas un/ vai izmantotas atbilstoši ražotāja tehniskajiem nosacījumiem. Pastāv elektromagnētiskās mijiedarbības ar citām ierīcēm rašanās iespēja, jo īpaši ar analizēs un apstrādes ierīcēm. Radio un mobilās telekomunikāciju ierīces, kā arī augstfrekvences portatīvās ierīces (mobilie telefoni un bezvadu pieslēgumi) var izraisīt traucējumus elektromedicīniskās ierīces darbībā.

SIMBOLU APRAKSTS

SIMBOLS	LIELUMS	SIMBOLS	LIELUMS
	Maiņstrāva		CE marķējums atbilstoši Direktīvai 93/42/EEC
	Dubultā izolācija		Neizmantojiet dušošanās vai vannošanos laikā
	BF tipa lietojamā daļa		IESL režīms
	Pienākums izlasīt ekspluatācijas instrukciju		IZSL režīms
	Vispārīgais brīdinājuma simbols		Izlasiet lietošanas instrukciju
IP 21	Aizsardzība no cietķermeņu un šķidruma iekļūšanas (aizsargāts no cietķermeņu, lielāku par 12 mm, iekļūšanas, aizsargāts no iekļūšanas ar pirksta palīdzību; aizsargāts no vertikāla virziena ūdens pilieni iekļūšanas)		Uzglabāt sausā vietā
	Šo produktu (ieskaitot visus papildu aksesuārus) tā kalpošanas ilguma beigās, lietotājam vai viņa dīlerim, ir jānogādā utilizācijas punktā, ar elektrisko vai elektronisko iekārtu palīdzību.		

GARANTĪJA

Ierīcei ir attiecināma 2 gadu garantija kopš tās iegādes brīža. Garantija nav attiecināma uz patērējamajām sastāvdaļām. Garantija ir spēkā, ja ir garantijas talons, ko ir aizpildījis oficiālais pārstāvis, apstiprinotš pārdošanas datumu, kā arī kases čeks.

- Ražotājkompanija un oficiālais dīleris neatbild par ierīces salaušanu vai bojājumiem, kas ir radušies nepienācīgas vai nevērīgas apiešanās rezultātā.
- Visos ierīces salikšanas veidos, modifikācijās, regulēšanas vai remontus ir jāveic tikai Jūsū valsts **TM Dr. Freif®** oficiālā pārstāvja specializēto servisa centru darbiniekiem.

Remonta vai komplektējošo daļu iegādes nolūkā vērsieties pie Jūsū valsts **TM Dr. Freif®** oficiālā pārstāvja.

RAŽOTĀJA NORĀDĪJUMU UN PAZIŅOJUMI - ELEKTROMAGNĒTISKAIS STAROJUMS

Ierīce aerosola terapijai ir domāta izmantošanai elektromagnētiskā vidē, tās apraksts ir sniegts zemāk tekstā.

STAROJUMA TESTS	ATBILSTĪBA	NORĀDĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ ELEKTROMAGNĒTISKO VIDĪ
AF starojums	1 grupa	Ierīcē augstas frekvences enerģija tiek izmantota tikai tā iekšējām funkcijām. Tādēļ AF starojums ir ļoti zems, un nerada traucējumus pārējām elektriskajām ierīcēm.
AF starojums CISPR11 Harmonisku sastāvdaļu starojums M3K/EN 61000-3-2 Svārstības/sprieguma pulsācija M3K/EN 61000-3-3	(B) klase (A) klase	Ierīce ir piemērota izmantošanai jebkādu telpu iekšpusē, tostarp mājās apstākļos, kur ir standarta elektrības tīkls, kas ir paredzēts dzīvojamu ēku elektroapgādei.
Elektrostatiskie lādiņi M3K/EN 61000-4-2	±6kV kontakts ±8kV gaiss	Grīdas ir jābūt koka, betona, vai arī kļātai ar keramikajām flīzēm. Gadījumā, ja grīdas segums ir no sintētiska materiāla, relatīvajam gaisa mitrumam ir jābūt mazākam par 30%.
Ātri elektriskie pārejas procesi/ uzplaiskņijumi M3K/EN 61000-4-4	±2 kW jauda	Elektroenerģijai tīklā ir jāatbilst kopējās lietošanas elektroapgādes sistēmu standartiem.
Lēcieni M3K/EN 61000-4-5	±1kV diferenciālais režīms	Elektroenerģijai tīklā ir jāatbilst kopējās lietošanas elektroapgādes sistēmu standartiem.

Sprieguma samazināšanās, Tsilaicīgi pārvārumi un sprieguma maiņas MĀK/EN 61000-4-11	<5%UT 0,5 cikla garumā 40%UT 5 ciklu garumā 70%UT 25 ciklu garumā <5%UT 5 sekunžu ilgumā	Elektroenerģijai tīklā ir jāatbilst kopējās lietošanas elektroapgādes sistēmu standartiem. Gadījumā, ja lietotājs vēlas, lai ierīces darbotos bez pārtraukumiem, rekomendējams ierīcei izmantot bezpārtraukumu barošanas avotu.
Magnētiskais lauks MĀK/EN 61000-4-8	3A/M	Magnētiskajam laukam ir jāatbilst kopējās lietošanas elektroapgādes sistēmu standartiem.
Elektromagnētiskā saderība MĀK/EN 61000-4-6	3B (peļ.kv.) 150 kHz - 80 MHz 8 (dzīvības uzturēšanas ierīcēm)	
Noturība pret radio frekvences elektromagnētisko lauku MĀK/EN 61000-4-3	3B/m 80 MHz - 2,5GHz (nav domāts dzīvības uzturēšanas ierīcēm)	

PIEZĪME: UT – maiņstrāvas spriegums barošanas tīklā.

EE LUGUPEETUD KOMPRESSORIGA INHALAATORI (NEBULISAATORI) TURBO MINI KASUTAJA

Tanāme, et olete valinud **TM Dr. Frei®** nebulisaatori modeli **TURBO MINI**. Olemē veendunud, et hinnates antud seadme kvaliteeti, saab Teist Sveitsi kaubamargi **Dr. Frei®** toodangu pūskasutaja.

Nebulisaator on mõeldud astma, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ja teiste hingamisteede haiguste raviks vedelate aerosoolravimite abil, mis tungivad nii ulmistesse kui ka alumistesse hingamisteedesse.

Enne nebulisaatori kasutamist tuleb kasutusjuhend tähelepanelikult läbi lugeda. Selles kirjeldatud nõuete järgimine tagab nebulisaatori tõrgeteta töö pika aja vältel. Kõikide siniset seadet puudutavate küsimuste osas palume pöörduda Teie riigis asuva **TM Dr. Frei®** ametliku esinduse või teeninduskeskuse poole.

SISUKORD

SISSEJUHATUS	28
Mis on nebulisaator ja kuidas see töötab?	28
Kuidas toimub nebulisaatorravi?	28
Nebulisaatorravi eelised	29
SEADME ETTEVALMISTAMINE TÖÖKS	29
Tähtis ohutusalaene teave	29
Tarvikud	29
INHALATSIOONRAVI	30
Seadme kasutamine	30
Ninaloputusotsiku kasutamine. Lisavarustus	30
Õhufiltri vahetamine	30
SEADME HOOLDUS	30
Puhastamine	30
Tõrkeotsing	31
SEADME TEHNILISED NÄITAJAD	31
SÜMBOLITE SELGITUSED	31
GARANTII	32
TOOTJA JUHISED JA DEKLARATSIOON - ELEKTROMAGNETILINE KIIRGUS	32

SISSEJUHATUS

Mis on nebulisaator ja kuidas see töötab?

Kompressoriga nebulisaator on seade, mis muudab vedelad ravimid sissevõetava õhu abil peeneks pihustatavaks aerosooliks. Aerosool sisaldab suuri ja väikeseid osakesi. Sissehingamisel settivad suured osakesed raskusjõu toimel ulmistesse hingamisteede seintele, väikesed aga suudavad jõuda bronhide alumistesse jagunemiskohtadesse. Sel moel satuvad ravimid kogu bronhiisüsteemi, sealhulgas kõige väiksematesse bronhidesse ja alveoolidesse, ning sisenevad suurtes ravikogustes alveoolide seintes asuvatesse veresoontesse pisimate kõrvaltoimetega või üldse ilma nendeta.

Kuidas toimub nebulisaatorravi?

Nebulisaatorravi kasutatakse:

- ägedate hingamisteede haiguste puhul;
- obstruktiivse kopsuhaiguse puhul;
- hingamisteede krooniliste põletike puhul, nagu krooniline bronhiit, bronhiaalastma (sealhulgas krooniline, ebastabiilne astma ning selle raske ägenemine), kroonilise faringiidiga puhul;
- hingamisteede infektsioonide puhul;
- sekreedi kvaliteedi ja selle eraldumise tõrke puhul;
- erinevate kõhaliikide puhul.

Nebulisaatorravi eelised

Nebulisaatorravi võimaldab juhtida põetikulisse kohta kiiresti suurel hulgal ravimit, mis tõstab ravi tulemuslikkust ja vähendab kõrvalmõjude ohtu teistele organitele. Nebulisaatorravi on ravimi sihtotstarbe seisukohast tunduvalt ökonoomsem ning seda kasutatakse laialdaselt laste, eakate ja puudega patsientide puhul.

SEADME ETTEVALMISTAMINE TÖÖKS

Tähtis ohutusala teave

- Enne kasutamist lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.
- Kasutage seadet ainult ravioptarbelise inhalatoria. Ravimi liik, režiim ja kasutusaeg - vastavalt ettekirjutusele. Seadme kokkupanek peab toimuma ranges vastavuses siinse juhendi kirjeldatud juhistega ning ainult nii, nagu tootja on ette näinud.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks tuloehlike anesteesiaesugudega, mis sisaldavad õhku, hapnikku või diilämmastikoksiidi.
- Seadme tööd võivad mõjutada elektromagnetilised häiringud, mis tulenevad televisori, raadio jne tööst. Sel juhul proovige seade viia kohta, kus häiret enam ei esine, või ühendage see teise pistikupesaga.
- Ärge kasutage kunagi pikendusjuhtmeid ega adaptereid. Ohtliku ülekuumenemise vältimiseks soovitakse kasutada toitejuhet. Hoidke toitejuhe kuumadest pindadest eemal.
- Pärast kasutamist ja enne puhastamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
- Ärge puudutage seadet, kui see juhuslikult vette kukub. Ühendage see vooluvõrgust lahti ning ärge kasutage seda. Pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
- Ärge puudutage seadet märgade kattega.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
- Kasutamisel kontrollige pritsimise vältimiseks, et seade asuks tasasel ja kindlal pinnal.
- Ärge kasutage seadet, kui patsient magab.
- Kõikide hooldust puudutavate küsimuste osas pöörduge teeninduskeskuse poole. Ärge tehke seadet lahti. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, lülitage see välja ja lugege kasutusjuhendit.
- Õnnetuste vältimiseks ärge jätke mingeid pakkematerjale (kilekotte, pappkarpe jne) lastele kättesaadavasse kohta.
- Hoidke tarvikud lastele kättesaamatus kohas. Kui seadet kasutavad lapsed või piiratud füüsilise või vaimsete võimetega isikud, peab see toimuma täiskasvanu järelevalve all, kes on siinse kasutusjuhendi läbi lugenud. Hoidke ravimianum alla 3-aastaste lastele kättesaamatus kohas, kuna see sisaldab väikeid osakesi, mida on võimalik alla neelata.
- Ühendage seade alati vooluvõrgust lahti, kui seda ei kasutata.
- Soovitav on kasutada ühte tarvikukomplekti korraga.
- Pärast ravi lõpetamist ärge jätke ravimi jääke ravimianumasse ja / või tarvikutesse.
- Seadme puhastamine ja / või hooldus peab toimuma pärast seda, kui seade on välja lülitatud ja toitejuhe vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Ärge tõmmake toitejuhtmeid ega seadme pistiku pistikupesast eraldamiseks.
- Siinne meditsiiniseade on mõeldud koduseks kasutamiseks ning seda tuleb kasutada vastavalt ravi ettekirjutusele. Seadet tuleb kasutada nii, nagu kasutusjuhendis on selgitatud. Tähtis on, et patsiendid loeksid juhendi läbi ja saaksid aru, kuidas seadet kasutada ja käsitada. Küsimuste tekkimisel pöörduge edasimüüja või teeninduskeskuse poole.
- Kui seadme pistik ei sobi pistikupesaga, pöörduge selle vahetamise asjus kvalifitseeritud spetsialisti poole. Ärge kasutage adaptereid, haru-pistikuid ja / või pikendusjuhtmeid.
- Ärge blokeerige õhu sissevõtuavasid.
- Paigaldamine peab toimuma vastavalt juhendile, kasutamine vastavalt tootja juhistele. Seadme vahu paigaldus ja / või ebaõige kasutamine võib tekitada kahju inimestele, loomadele ja ka esemetele. Selle eest ei vastuta tootja.
- Ärge kasutage seadet vannis või duši all oles.
- Ärge jätke seadet tolmu (mis võib blokeerida ventilatsiooniavad), soojust (mis võib deformeerida pindu), päikesevalgust või muude ilmastikutingimuste mõju alla, mis võivad põhjustada seadme katkimineku.
- Ärge kasutage seadet võimalikke hääreid tekitavate allikate läheduses (näiteks soojusallikad, nagu kaminad, elektri- või gaasihajud; auruallikad, nagu boilerid või veekeetjad; elektromagnetilise kiirguse allikad, nagu mikrolaineahjud, Wi-Fi-seadmed).
- Hoidke seadet lemmikloomadele kättesaamatus kohas, kuna need võivad saastata patsiendiga vahetult kokkupuutuvaid pindu, blokeerida ventilatsiooniavasid või mõjutada ravikvaliteeti muud moodi negatiivselt.
- Seadet tekitab suruõhku. Kõrvatoimed võivad tekkida seoses tundlikkusega kasutatavate ravimite suhtes.




Elektriseadmed tuleb utiliseerida vastavalt kohalikele eeskirjadele, mitte visata ära koos olmejäätmetega.

HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND KOGU SEADME KASUTUSAJA VÄLTTEL ALLES

Tarvikud

- ① Ninaotsik
- ② Huulik
- ③ Täiskasvanu mask
- ④ Lapse mask
- ⑤ Ravimianum – ülemine osa
- ⑥ Ravimianum – alumine osa
- ⑦ Ravimianum – õhu juurdevooluava
- ⑧ Klapp
- ⑨ Õhutoru
- ⑩ Varuõhufiltrid (5 tk)

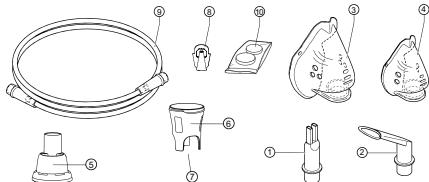


INHALATSIOONRAVI

See on III klassi meditsiiniseades, mis muudab vedelad ravained aerosooliks, et need otse hingamisteedesse juhtida. Seade pihustab ravimeid nii suspensioonina kui ka lahustena. Ravimeid väljendub vähem õli- ja/või pastaalsete ravimite kasutamisel. Ärge pihustage eeterlikke õlisid! Ärge soojendage vedelaid lahuseid ja / või alkoholi sisaldavaid lahuseid. Ravimianum ja tarvikud ei ole steriilsed. Lugege enne kasutamist läbi «Seadme hoolduse» peatükki.

Seadme kasutamine

1. Asetage seade tasasele kindlale pinnale.
2. Jälgige, et nimpingele vastab vooluvõrgu pingele.
3. Ühendage seade vooluvõrku.
4. Avage ravimianum, eraldades keerates kaks anuma osa (A).
5. Pange klapp anuma põhja, nagu on näidatud joonisel (B).
6. Täitke anuma alumine osa ravimiga (C). Märkus: ravimianuma alumisel osal on tähistused.
7. Sulgege ravimianum, ühendades keerates kaks osa (D).
8. Ühendage ravimianuma (E) külge õhutoru (9).
9. Ühendage õhutoru (9) seadmel oleva õhuvaava külge.
10. Paigaldage ravimianumasse vajalikud tarvikud: mask, huulik või ninaotsik (F).
11. Lülitage seade sisse, lükates lüliti asendisse ON (sisseülitatum).
12. Pärast kasutamist lülitage seade välja ja ühendage vooluvõrgust lahti. Enne seadme uuesti sisseülitamist veenduge, et see oleks toatemperatuurini jahtunud.

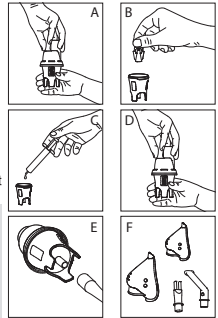

SOOVITUSED ÕIGEKS RAVIKS


- Seadke end mugavasse vertikaalasendisse.
- Maski kasutades (täiskasvanute või laste oma) kontrollige, et see sobitub täielikult näole. Maskis on avad õhuvoolu jaoks väljahingamise faasis. Hingake takistusteta ja tehke iga sissehingamise järel paus.
- Huuliku kasutamisel hoidke seda hammaste taga, huuled kokkusurutud. Hingake suu kaudu.
- Ninaotsiku kasutamisel tõstke see nina juurde. Hingake läbi nina.
- Inhalatsioon on lõppenud, kui aerosooli enam ei teki.

Ninaloputusotsiku kasutamine. Lisavarustus

Sisise kompressoriga nebulisaatorile on võimalik tellida lisavarustusena ninaloputusstarvik.

Ninaloputusstarvik on mõeldud ninaõõne puhastamiseks ning nohu ja krooniliste riniitide raviks. Selle kasutamiseks järgige juhist:

1. Keerake ülemine osa lahti (a).
2. Täitke anum ravimitega (b).
3. Paigaldage klapp (c).
4. Kinnitage ninaloputusstarvik, keerates kaks osa kokku.
5. Ühendage toru õhu sissevõtuava külge (d).
6. Asetage ninaloputusotsik ninasõõrme juurde. Ärge pange seda ninna. Hingake nina kaudu.
7. Pärast ravi lõppu puhastage ninaloputusotsik hoolikalt.

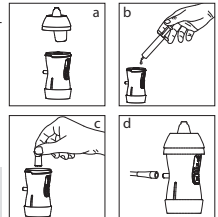


TÄHELEPANU:

Ärge hingake sisse horisontaalasendis. Ärge asetage ravimianumat üle 45° nurga alla. Hoidke tarvikuid hästi ventileeritavas, soojuse ja otsese päikesekiirguse eest kaitstud kohas (F).

Õhufiltri vahetamine

Filter tuleb vahetada 30 kasutustunni järel või siis, kui see halliks muutub. Varuõhufiltrid (H). Filtri vahetamiseks tõstke kate kruvikeeraja abil üles, nagu pildil I on näidatud. Võtke vana filter välja ja paigaldage uus (10). Asetage filtri fikseerimiskaas korpuse külge, jälgides, et see oleks kindlalt pinna küljes.

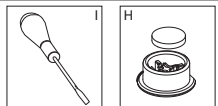

SEADME HOOLDUS

Puhastamine

Pärast iga inhalatsiooniseansi ühendage seade vooluvõrgust lahti ning puhastage seade ja tarvikud. Tähelepanu: kasutage ainult neid tarvikuid, mis on seadmega kaasas, teised tarvikud võivad mõjutada ravi tulemuslikkust.

HUULIKU JA NINAOTSIKU PUHASTAMINE

Need tarvikud puhastage pärast kasutamist puhta veega. Neid võib ka steriliseerida, keetes 5-10 minutit vees või kastes desinfitseerivas kemikaalilahusesse, järgides juhiseid, ning loputades puhta veega. Laske neil loomulikult moel kuivada.

RAVIMIENUMA PUHASTAMINE

Parast kasutamist võtke kaks ravimianuma osa lahti, peske need kuuma vee ja seebiga ning loputage hoolikalt. Kuivatage veejäägid pehme, puhta ja kuiva lapiga ning laske osadel puhtas kohas loomulikul moel kuivada. Steriliseerimiseks kaske ravimianum külma steriliseerimislahusesse, järgides sterilisaatori pakendil olevaid juhiseid. Iga patsiendi puhul on soovitatav kasutada eraldi ravimianumat kuni 6 kuud või 120 kasutuskorda. Ärge keetke ravimianumat. Peske korralikult mask ja toru desinfitseerimisvahendiga.

MIKROOBIDEGA SAASTUMINE

Mikroobse või viirusliku päritolu patoloogia korral, kui esineb infektsioonioht, ei tohi seadet ja tarvikuid kasutada teiste patsientide jaoks.

Tõrkeotsing

PROBLEEM	LAHENDUS
Seade ei lüüti sisse.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollige, kas pistik on korralikult pistikupesas.• Kontrollige, et lülitil on valitud õige režiim (1).
Seade on sisse lülitatud, kuid puhustamist ei toimu.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollige, kas klapp on ravimianumasse paigaldatud (8).• Kontrollige, et õhuvoolik poleks paindunud ega katki (9).• Kontrollige, et õhufilter poleks ummistunud ega must. Vajaduse korral vahetage filter (10).• Kontrollige, et ravimianumas on ravim.

SEADME TEHNILISED NÄITAJAD

Pihusti kolb on määratud. IIA klassi kuuluv meditsiiniseade, mis vastab direktiivi 93/42/EÜ (meditsiiniseadmete direktiiv) nõuetele.

Ravimianum Linear.

Osakeste suurus: 3 µm MMAD (EN13544-1); **Seadme kirjeldus:** kompressoriga inhalaator;

Pihustuskiirus, ml/min.: 0,3 ± 0,05 ml/min; **Õhuvool (maksimaalne):** 15 ± 2 l/min;

Maht ravimite jaoks: 2 - 10 ml; **Järelejäänud maht, ml:** 0,85 ± 0,2 ml;

Müratase: alumine (alla 55 db); **Kasutamissagedus:** 30 minutit - ON (sisselülitatud)/30 minutit - OFF (väljalülitatud);

Tarvikud: õhutoru (1,0 m), täiskasvanu mask, laste mask, huulik, ninaotsik, varuõhufilter (5 tk)

Ninaloputusotsik: lisavarustus; **Võimsus:** 220 V/50 Hz; **Toitejuhtme pikkus:** 1,4 m;

Kaal: 1,3 kg; **Möödud:** 167x106x164 mm; **Võimsus:** 120 W;

Kasustustingimused:

Lubatud ümbritsev temperatuur: miinimum 5°C - maksimum 40°C

Suhteline õhuniiskus: miinimum 15% - maksimum 93%

Õhurõhk: miinimum 700 hPa - maksimum 1060 hPa (maksimaalne kõrgus kasutamisel ≤ 2000 m)

Hoidmistingimused:

Lubatud ümbritsev temperatuur: miinimum -25°C – maksimum +70°C

Suhteline õhuniiskus: miinimum 0% - maksimum 93%






Õhurõhk: miinimum 500 hPa - maksimum 1060 hPa





* Tehniliste muudatuste ja kujunduse muutmise võimalus ilma etteatamiseta.

Seadme eeldatav kasutusiga - 2000 ravitsükli, mille keskmine kestus on 8 minutit.

Elektrilised meditsiiniseadmed nõuavad erilist hoolt. Paigalduse ja kasutamise ajal tuleb elektromagnetilise ühildumuse tagamiseks jälgida, et need paigaldatase ja/või neid kasutatakse vastavalt tootja tehnilistele tingimustele. Esineb tõenäosus elektromagnetiliste häiringute tekkeks teiste seadmetega, eriti analüüsi- ja töötlemisseadmetega. Raadio ja mobiilsed kaugsidevahendid, samuti portatiivsed kõrgsagedusliikud seadmed (mobiiltelefonid ja juhtmevabad ühendused) võivad elektrilise meditsiiniseadme töös häireid tekitada.

SÜMBOLITE SELGITUSED

SÜMBOL	TÄHENDUS	SÜMBOL	TÄHENDUS
~	Vahelduvvool	 0051	CE märk vastavalt direktiivile 93/42/EÜ
	Kahekordne isolatsioon		Mitte kasutada vannis või duši all oles
	Kasutatava osa liik BF	I/ON	Sisselülitusrežiim
	Kohustus kasutusjuhend läbi lugeda	O/OFF	Väljalülitusrežiim

	Üldine hoiatussümbol		Lugege kasutusjuhendit
IP 21	Kaitse kõvade esemete ja vedelike sisestamise eest (kaitstud üle 12 mm kõvade esemete sisestamise eest, kaitstud sõrme abil sisestamise eest; kaitstud vertikaalselt suunatud veepiiskade sisenemise eest)		Hoida kuivas kohas
	Kasutaja või edasimüüja peab sinise toote (sealhulgas kõik kaasasolevad tarvikud) pärast kasutusea lõppu viima elektri- või elektroonikaseadmete kogumispunkti.		

MÄRKUS: Kui seadme normaalset tööd ei ole reast kontrollimistest hoolimata võimalik taastada, pöörduge Dr. Frej® teeninduskeskusesse.

GARANTII

Seadme garantiiaeg on 2 aastat alates ostmise hetkest. Garantii ei laiene kuluvatele osadele. Garantii kehtib ainult garantiikaardi olemasolu korral, mille on täitnud ametlik esindaja, millel on näidatud ostmise kuupäev, ning ostutšeki olemasolu korral.

- Tootjaettevõtte ja ametlik esindaja ei vastuta seadme purunemise ega kahjude eest, mis on tekkinud seadme ebaõigest või hooletust kasutamisest.
- Igasuguseid paigaldus-, muudatus-, reguleerimis- või remonditöid tohivad teha ainult Teie riigis asuva **TM Dr. Frej®** ametliku esindaja spetsiaalsete teeninduskeskuste spetsialistid.
- Remondi või varuosade tellimise asjus pöörduge Teie riigis asuva **TM Dr. Frej®** ametliku esindaja teeninduskeskuse poole.

TOOTJA JUHISED JA DEKLARATSIOON - ELEKTROMAGNETILINE KIIRGUS

Aerosoolteraapia seade on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas:

KIIRGUSKONTROLL	NÕUETELE VASTAVUS	MÄRKUSED ELEKTROMAGNETILISE KESKKONNA KOHTA
Raadiosageduskiirgus	Grupp 1	Kõrgsageduslikku energiat kasutatakse seadmes ainult selle siefunktsioonideks. Seetõttu on raadiosageduslik kiirgus väga madal ega tekita häireid teistele elektriseadmetele.
Raadiosageduskiirgus CISPR11 Kiirguskomponendid vastavalt: IEC/EN 61000-3-2 Kõikumine / pingevaheldumine vastavalt: IEC /EN 6100-3-3	Klass (B) Klass (A)	Seade sobib kasutamiseks igasugustes ruumides (sealhulgas kodustes tingimustes), mis on ühendatud tavalisse elektrivõrku, mis on mõeldud eluruumide elektriga varustamiseks.
Elektrostaatilised lahendused vastavalt: IEC /EN 61000-4-2	±6 kV kontakt ±8 kV õhk	Põrand peab olema puidust, betoonist või keraamiliste plaatidega kaetud. Kui põrand on kaetud sünteetilise materjaliga, peab suhteline õhuniiskus olema alla 30%.
Kiired elektrilised siirdetsessid / -rikked vastavalt: IEC/EN 61000-4-4	Võimsus ±2 kV	Elektrivõrk peab vastama üldkasutatavate elektrisüsteemide normidele.
Takistus: IEC/EN 61000-4-5	Diferentsiaalväärtus ±1 kV	Elektrivõrk peab vastama üldkasutatavate elektrisüsteemide normidele.
Pinge vähenemine, lühiajalised katkestused ja pinge muutused vastavalt: IEC/EN 61000-4-11	<5% UT 0,5 tsükli moodsudes 40% UT 5 tsükli moodsudes 70% UT 25 tsükli moodsudes <5% UT 5 sekundi moodsudes	Elektrivõrk peab vastama üldkasutatavate elektrisüsteemide normidele. Kui kasutaja vajab seadme katkematu töötamist, soovitakse kasutada katkematu toite allikat.
Magnetväli vastavalt: IEC/EN 61000-4-8.	3A/m	Magnetväli peab vastama üldise elektrisüsteemi normidele.
Elektromagnetiline ühilduvus IEC/EN 61000-4-6	3 V (ser. kV) 150 kHz - 80 MHz 8 (elutoetusseadmete puhul)	
Raadiosagedusliku elektromagnetväljakindlus IEC/EN 61000-4-3	3 V/m 80 MHz - 2,5 GHz (mitteelutoetus - seadmete puhul)	
Raadiosagedusliku elektromagnetväljakindlus IEC/EN 61000-4-3	3 V/m 80 MHz - 2,5 GHz (mitteelutoetus - seadmete puhul)	

MÄRKUS: vahelduvvoolu pinge toitevõrgus.

STIMATE UTILIZATOR ALNEBULIZATORULUI CU COMPRESOR TURBO MINI

Vă mulțumim ca ați ales nebulizatorul **TM Dr. Frel®** model TURBO MINI.

Suntem siguri că aprecind la justa valoare calitatea acestui aparat, veți deveni utilizator permanent al produselor mărcii comerciale **Dr. Frel®**.

Nebulizatorul Dvs. este destinat pentru tratamentul astmului, bolilor pulmonare obstructive cronice și altor afecțiuni respiratorii prin transformarea preparatelor medicamentoase din formă lichidă în aerosoli, care pătrund rapid și sigur atât în căile respiratorii superioare, cât și în cele inferioare.

Înainte de a începe să folosiți nebulizatorul, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare. Respectarea cerințelor prevăzute în acesta va asigura buna funcționare a nebulizatorului pe parcursul unei perioade îndelungate de timp. Pentru toate întrebările referitoare la acest produs vă rugăm să contactați reprezentantul oficial sau să apelați la un centru de deservire **TM Dr. Frel®** din țara Dvs.

CUPRINS

INTRODUCERE	33
Ce este un nebulizator și cum funcționează acesta?	33
Când poate fi aplicată terapia prin nebulizare?	33
Avantajele terapiei prin nebulizare	33
PREGĂTIREA APARATULUI PENTRU UTILIZARE	33
Reguli de securitate	33
Setul de accesorii	34
INHALAREA	34
Mod de utilizare a aparatului	34
Utilizarea duzei pentru lavaj nazal. Opțional	35
Înlocuirea filtrului de aer	35
DESERVIREA APARATULUI	35
Curățarea	35
Înlăturarea defecțiunilor	36
SPECIFICAȚII TEHNICE ALE APARATULUI	36
DESCRIEREA SIMBOLURILOR	36
GARANȚIE	37
INDICAȚIILE PRODUCĂTORULUI - RADIAȚIE ELECTROMAGNETICĂ	37

INTRODUCERE**Ce este un nebulizator și cum funcționează acesta?**

Nebulizatorul cu compresor reprezintă un aparat care transformă o substanță medicamentoasă din formă lichidă în aerosoli sub acțiunea aerului comprimat. Nebulizatorul direcționează în căile respiratorii aerosolul, care conține particule mari și mici. În urma acțiunii forței gravitaționale, particulele mari se depun pe pereții căilor respiratorii superioare, iar particulele mici reușesc să ajungă în bronhiole.

Astfel, substanța medicamentoasă ajunge în cele mai mari doze în toate secțiunile arborelui bronșic, inclusiv cele mai mici bronhii, având reacții adverse nesemnificative sau nule.

Când poate fi aplicată terapia prin nebulizare?**Nebulizatoarele se folosesc în caz de:**

- boli respiratorii acute,
- boli pulmonare obstructive,
- procese inflamatorii cronice ale căilor respiratorii, cum ar fi bronșita cronică, astmul bronșic (inclusiv cazuri cronice și instabile, precum și acutizarea astmului bronșic), faringită cronică,
- infecții ale căilor respiratorii, dereglarea calității secrețiilor și secretarea în bronhii,
- diverse tipuri de tuse.

Avantajele terapiei prin nebulizare

Terapia prin inhalare face ca dozele mari de preparat medicamentos să acționeze rapid asupra focarului bolii, ceea ce crește eficacitatea tratamentului urmat și reduce riscul dezvoltării efectelor adverse asupra altor organe. Terapia prin inhalare asigură, de asemenea, consumul economic de substanță medicamentoasă. Tratamentul cu aerosol cu ajutorul nebulizatorului poate fi urmat de copii, persoanele în etate și pacienții slăbiți.

PREGĂTIREA APARATULUI PENTRU UTILIZARE**Reguli de securitate**

- Înainte de exploatare citiți cu atenție manualul de utilizare. Păstrați-l pentru a-l folosi și ulterior, în caz de necesitate.
- Folosiți dispozitivul doar în calitate de nebulizator în scopuri terapeutice. Tipul preparatului medicamentos, regimul și ora utilizării trebuie să fie stabilite de medic. Asamblarea dispozitivului trebuie să fie făcută în strictă conformitate cu indicațiile din prezentul manual și doar în scopurile indicate de producător.
- Dispozitivul dat nu poate fi utilizat cu amestecuri anestezice inflamabile, care conțin aer, oxigen sau oxid de azot.
- Funcționarea dispozitivului poate fi influențată de interferențele electromagnetice apărute din cauza defecțiunilor în funcționarea televizorului

Dvs., a aparatului de radio etc. Dacă observați acest lucru, încercați să mutați dispozitivul în alt loc, până când interferențele vor dispărea sau să-l conectați la o altă priză.

- Nu folosiți niciodată prelungitoare sau adaptoare. Se recomandă să folosiți cablul de alimentare, pentru a evita supraîncălzirea. Țineți cablul cât mai departe de suprafețele fierbinți.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la priza principală după utilizare și înainte de a începe curățarea acestuia.
- Nu atingeți dispozitivul dacă acesta a căzut întâmplător în apă. Deconectați-l de la rețeaua electrică și nu-l folosiți. Contactați un centru de deservire autorizat.
- Nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede.
- Nu blocați căile de ventilație.
- În procesul de utilizare asigurați-vă că dispozitivul se află pe o suprafață netedă și rezistentă, pentru a preveni stropirea.
- Nu folosiți dispozitivul în timp ce pacientul doarme.
- Contactați pentru orice întrebări centru de deservire. Nu dezasamblați dispozitivul. Dacă acesta nu funcționează în mod corespunzător, deconectați-l și citiți instrucțiunile de exploatare.
- Nu lăsați ambalajele (pungile din plastic, cutiile de carton etc.) în locuri accesibile pentru copii, pentru a evita situațiile periculoase.
- Păstrați accesoriile în locuri inaccesibile pentru copii. Copiii și persoanele cu dizabilități fizice sau mentale trebuie să folosească dispozitivul sub supravegherea unui adult, care a citit prezentul manual de utilizare. Păstrați recipientul pentru preparatele medicamentoase în locuri inaccesibile pentru copiii cu vârsta sub 36 de luni, întrucât acesta conține elemente de dimensiuni mici, care ar putea fi înghițite.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la rețeaua electrică atunci când nu îl utilizați.
- Se recomandă folosirea individuală a unui set medical de accesorii.
- Nu lăsați resturile de substanțe medicamentoase în recipientul pentru medicamente și/sau în accesoriu după ce ați terminat ședința de terapie.
- Curățarea și/sau deservirea dispozitivului trebuie făcută doar după oprirea dispozitivului și deconectarea cablului de alimentare de la rețeaua electrică.
- Nu trageți de cablu sau de dispozitiv, pentru a scoate ștecherul din priză.
- Acesta este un dispozitiv medical pentru uz la domiciliu și trebuie folosit în conformitate cu prescripțiile medicale. Dispozitivul trebuie utilizat după cum este indicat în manualul de utilizare. Este important ca pacienții să citească și să înțeleagă cum trebuie să folosească dispozitivul. Dacă aveți întrebări, contactați distribuitorul sau centrul de deservire.
- Dacă ștecherul dispozitivului nu se potrivește la priză, apelați la un specialist calificat, pentru a-l înlocui. Nu folosiți adaptoare, prize trifurcate sau prelungitoare.
- Nu blocați orificiul pentru aer.
- Asamblarea trebuie făcută în conformitate cu instrucțiunile, iar utilizarea - conform cerințelor producătorului. Asamblarea incorectă și/sau utilizarea incorectă a dispozitivului poate cauza daune oamenilor, animalelor sau diferitor obiecte. Producătorul nu poartă nici o responsabilitate în acest sens.
- Nu folosiți dispozitivul în timp ce faceți baie.
- Nu sunați dispozitivul acțiunii prafului (care poate bloca orificiile de ventilație), căldurii (care poate deforma suprafețele), razelor solare sau altor agenți atmosferici, care pot cauza defecțiuni ale dispozitivului.
- Nu folosiți dispozitivul în apropiere de sursele de eventuale interferențe (de exemplu, sursele de căldură, precum șemineurile, încălzirile electrice sau cu gaz, sursele de abur, precum cazanele sau cainicele; sursele de radiație electromagnetică, precum cuptoarele cu microunde, dispozitivele Wi-Fi).
- Păstrați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru animalele domestice, care pot murdări suprafața de contact nemijlocit cu pacientul, bloca orificiile de ventilație sau, în general, influența negativ calitatea terapiei.
- Dispozitivul generează aer comprimat. Efectele adverse pot apărea din cauza sensibilității la substanțele medicamentoase folosite.




Aparatele electrice nu se vor arunca la gunoi împreună cu deșeurile menajere, ci conform regulilor locale.

PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE UTILIZARE ÎNTR-UN LOC SIGUR PE PARCURSUL ÎNTREGULUI TERMEN DE EXPLOATARE A APARATULUI.

Setul de accesorii

- 1) Presă nazală
- 2) Presă bucală
- 3) Mască pentru adulți
- 4) Mască pentru copii
- 5) Recipient pentru substanțe medicamentoase - partea superioară
- 6) Recipient pentru substanțe medicamentoase - partea inferioară
- 7) Recipient pentru substanțe medicamentoase - orificiul pentru aer
- 8) Clapetă
- 9) Tub de aer
- 10) Filtre de aer de rezervă (5 buc.)

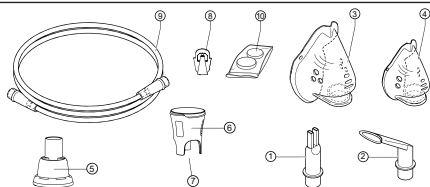


INHALAREA

Acesta este un dispozitiv medical de clasă IIa, care transformă substanțele medicamentoase lichide în aerosoli, pentru ca acestea să pătrundă nemijlocit în aparatul respirator. Dispozitivul pulverizează preparatele medicamentoase atât sub formă de suspensii, cât și sub formă de soluții. Efectul terapeutic este mai puțin pronunțat în cazul folosirii substanțelor medicamentoase pe bază de uleiuri sau sub formă de pastă. Nu pulverizați uleiuri eterice! Nu încălziți soluțiile lichide și/sau soluțiile cu conținut de alcool. Recipientul pentru medicamente și toate accesoriile nu sunt sterile. Înainte de a începe utilizarea citiți punctul «Deservirea dispozitivului».

Mod de utilizare a aparatului

1. Poziționați dispozitivul pe o suprafață netedă și rezistentă.

- Asigurați-vă că tensiunea nominală corespunde cu tensiunea din rețea.
- Conectați dispozitivul la o priză.
- Deschideți recipientul pentru substanțe medicamentoase, deconectând cele două părți (A) ale recipientului prin mișcări de dezasucire.
- Plasați clapeta la fundul recipientului pentru substanțe medicamentoase, după cum este indicat în imagine (B).
- Umpleți partea inferioară a recipientului pentru medicamente cu substanța medicamentoasă (C). Remarcă: Pe partea inferioară a recipientului pentru medicamente sunt aplicate niște marcaje pentru orientare.
- Închideți recipientul pentru substanțe medicamentoase, conectând cele două părți ale acestuia prin mișcări de răsucire (D).
- Conectați tubul de aer (9) la recipientul pentru substanțe medicamentoase (E).
- Conectați tubul de aer (9) la orificiul de aer de pe dispozitiv.
- Conectați la recipientul pentru substanțe medicamentoase accesoriile necesare: masca, piesa bucală sau piesa nazală (F).
- Porniți dispozitivul, deplasând comutatorul în poziție ON.
- După utilizare opriți dispozitivul și deconectați-l de la rețea. Înainte de conectarea repetată a dispozitivului asigurați-vă că acesta s-a răcit până la temperatura camerei.

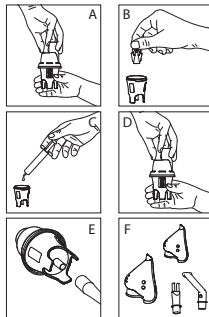

RECOMANDĂRI PENTRU O TERAPIE EFICIENTĂ

- Luați o poziție verticală comodă.
- Dacă folosiți masca (pentru adulți sau pentru copii), asigurați-vă că aceasta este bine lipită de față. Masca are orificii pentru pătrunderea aerului în timpul expirației. Respirați ușor și faceți pauze scurte după fiecare inspirație.
- Dacă folosiți piesa bucală, țineți-o între dinți, cu buzele lipite. Respirați pe gură.
- Dacă folosiți piesa nazală, apropiați-o de nas și respirați pe nas.
- Inhalarea ia sfârșit atunci când nu se mai formează aerosoli.


Utilizarea duzei pentru lavaj nazal. Opțional

Duza pentru lavaj nazal poate fi achiziționată ca opțiune suplimentară la acest nebulizator cu compresor.

Duza pentru lavaj nazal este destinată pentru curățarea cavității nazale și tratamentul guturaiului și a rinitei cronice.

Pentru a o folosi, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Desprindeți partea superioară prin mișcări de dezasucire (a).
- Umpleți recipientul pentru substanțe medicamentoase (b).
- Montați clapeta (c).
- Închideți duza pentru lavaj nazal, conectând cele două părți prin mișcări de răsucire.
- Conectați tubul la orificiul de aer (d).
- Apropiati duza pentru lavaj nazal de nara nasului. Nu o puneți în nas. Respirați pe nas.
- La sfârșitul terapiei curățați cu grijă duza pentru lavaj nazal.

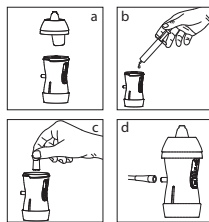


ATENȚIE:

Nu inspirați în poziție orizontală. Nu înclinați recipientul pentru medicamente sub un unghi de peste 45°. Păstrați accesoriile în locuri bine aerisite, protejate de căldură și razele solare directe (F).

Înlocuirea filtrului de aer

Înlocuiți filtrul după 30 de ore de utilizare sau atunci când acesta capătă o nuanță gri. Filtre de aer de rezervă (H). Pentru a înlocui filtrul, ridicați capacul cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap plat, după cum este indicat în imaginea I. Scoateți filtrul vechi și înlocuiți-l cu cel nou (10). Montați capacul filtrului în carcasă, asigurându-vă că acesta este bine lipit de suprafață.

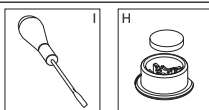

DESERVIREA APARATULUI

Curățarea

După fiecare ședință de inhalare deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică, după care curățați dispozitivul și accesoriile. Atenție: folosiți doar accesoriile incluse în setul dispozitivului. Alte accesorii ar putea influența eficacitatea tratamentului.

CURĂȚAREA PIESEI BUCALE ȘI A DUZEI PENTRU NAS

Folosiți apă potabilă pentru a curăța accesoriile după utilizare. Acestea pot fi sterilizate prin fierberea timp de 5-10 minute în apă sau prin plasarea acestora într-un dezinfectant chimic, urmând instrucțiunile și apoi clătindu-le cu apă potabilă. Lăsați-le să se usuce în mod natural.

CURĂȚAREA RECIPIENTULUI PENTRU SUBSTANȚE MEDICAMENTOASE

După utilizare deconectați cele două părți ale recipientului pentru substanțe medicamentoase, spălați-le cu apă fierbinte și săpun și clătiți-le bine. Ștergeți re-surțile de apă cu un șervețel moale, curat și uscat și lăsați să se usuce în mod natural, într-un loc curat. Pentru sterilizarea acoperiții recipientului pentru substanțe

medicamentoase cu o soluție de sterilizare rece, urmând instrucțiunile de pe ambalajul soluției date. Se recomandă utilizarea individuală a recipientului pentru substanțe medicamentoase pentru fiecare pacient în parte, într-o perioadă de până la 6 luni sau pentru 120 de utilizări. Nu fierbeți recipientul pentru substanțe medicamentoase. Spălați bine masca și tuburile, folosind o soluție de dezinfectare.

INFECTAREA CU MICROBI

În cazul unei patologii de origine microbiană sau virală, în care există riscul infectării, dispozitivul și accesoriile nu vor fi folosite împreună cu alți pacienți.

Înlăturarea defecțiunilor

PROBLEMA	ACȚIUNI
Dispozitivul nu se conectează.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că ștecurul este introdus corect în priză. Asigurați-vă că este ales regimul (I) de pornire al comutatorului.
Dispozitivul este conectat, dar nu pulverizează.	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că clapeta a fost introdusă în recipientul pentru medicamente (8). Asigurați-vă că tubul de aer nu este îndoit sau deteriorat (9). Asigurați-vă că tubul de aer nu este blocat și nu este murdărit. În caz de necesitate înlocuiți filtrul (10). Asigurați-vă că recipientul pentru medicamente este umplut cu substanță medicamentoasă.

REMARCĂ: Dacă nu poate fi reluată funcționarea normală a dispozitivului, deși ați efectuat toate verificările sus-menționate, contactați centrul de deservire Dr. Frei®.

SPECIFICAȚII TEHNICE ALE APARATULUI

Piston rotitor de fixare, fără ungere. Dispozitiv medical de clasa IIA, conform directivei 93/42/EEC (Directiva cu privire la dispozitivele medicale). Recipient pentru medicamente Linear.

Mărimea particulelor: 3 μm MMAD (EN13544-1); **Descrierea dispozitivului:** nebulizator cu compresor;

Vițea de pulverizare, ml/min: 0,3±0,05 ml/min; **Fluxul de aer (maxim):** 15±2 l/min; **Recipientul pentru substanțe medicamentoase:** 2 - 10 ml; **Volumul rezidual, ml:** 0,85±0,2 ml; **Nivelul de zgomot:** redus (sub 55 dB); **Periodicitatea utilizării:** 30 de minute - ON/30 de minute - OFF;

Accesorii: tub de aer (1,0 m), mască pentru adulți, mască pentru copii, piesă bucală, piesă nazală, filtre de aer de rezervă (5 buc.);

Duza pentru lavaj nazal: opțional; **Alimentare:** 220 V/50 Hz; **Lungimea cablului de alimentare:** 1,4 m; **Greutate:** 1,3 kg;

Dimensiuni: 167x106x164 mm; **Putere:** 120 W;

Condiții de exploatare:

Temperatura admisibilă a mediului ambiant: minim 5°C - maxim 40°C

Umiditatea aerului: minim 15% umiditate relativă - maxim 93% umiditate relativă

Presiunea atmosferică: minim 700 hPa - maxim 1060 hPa (altitudinea maximă în procesul de exploatare ≤ 2000 m)

Condiții de păstrare:

Temperatura admisibilă a mediului ambiant: minim -25°C/ maxim +70°C

Umiditatea aerului: minim 0% umiditate relativă - maxim 93% umiditate relativă

Presiunea atmosferică: minim 500 hPa - maxim 1060 hPa





* Sunt posibile modificări de ordin tehnic și modificări ale designului fără un aviz prealabil.

Durata preconizată de viață a acestui dispozitiv este de 2000 de cicluri de terapie cu o durată medie de 8 minute.

Dispozitivele medicale electrice necesită o Îngrijire specială. În timpul instalării și exploatării, ținând cont de cerințele privind compatibilitatea electromagnetică, este necesar ca acestea să fie instalate și/sau exploatate în conformitate cu cerințele tehnice ale producătorului. Există probabilitatea apariției unei interacțiuni electromagnetice cu alte dispozitive, în special cu alte aparate pentru analiză și procesare. Radioli și dispozitivele de telecomunicații mobile, precum și cele portabile de frecvență înaltă (telefoanele mobile și dispozitivele cu conexiuni fără fir) pot crea interferențe în funcționarea dispozitivului medical electric.

DESCRIEREA SIMBOLURILOR

SIMBOL	SEMNIȚAȚIE	SIMBOL	SEMNIȚAȚIE
	Curent alternativ.		Marcajul CE în conformitate cu Directiva 93/42/EEC.
	Izolație dublă.		Nu folosiți dispozitivul în timp ce faceți baie.
	Parte aplicabilă de tip BF.	I/ON	Regim ON.
	Obligația de a citi manualul de utilizare.	O/OFF	Regim OFF.

	Simbol general de avertizare.		Citiți manualul de utilizare.
IP 21	Protecție împotriva pătrunderii corpurilor solide și lichide (protejat împotriva pătrunderii corpurilor solide de peste 12 mm, protejat împotriva pătrunderii cu ajutorul degetului; protejat împotriva pătrunderii picăturilor de apă orientate vertical).		A se păstra în locuri uscate.
	La sfârșitul duratei sale de viață acest produs (inclusiv toate accesoriile) trebuie să fie predat de către utilizator sau dealer la un punct de aruncare a deșeurilor electrice sau electronice.		

GARANȚIE

Pentru acest aparat este valabilă o garanție pe o perioadă de 2 ani din momentul achiziționării. Garanția nu este valabilă și pentru materialele consumabile. Garanția este valabilă doar la prezentarea bonului de plată și a certificatului de garanție completat de către reprezentantul oficial (a se vedea în ambalaj), care confirmă data vânzării.

- Compania producătoare și dealerul oficial nu poartă responsabilitate pentru defectarea sau deteriorarea aparatului în rezultatul exploatării neglijente a acestuia.

- Toate tipurile de asamblare, modificare, setare sau reparație ale aparatului trebuie să fie efectuate doar de către reprezentantul oficial sau să apelezi la un centru de deservire **Dr. Frei** din țara Dvs.

- Pentru reparația sau achiziționarea accesoriilor luați legătura cu reprezentantul oficial sau apelezi la un centru de deservire **Dr. Frei** din țara Dvs.

INDICAȚII PENTRU PRODUCĂTORULUI - RADIAȚIE ELECTROMAGNETICĂ

Dispozitivul pentru terapie cu aerosoli este destinat pentru utilizarea în mediul electromagnetic descris în continuare:

Test de radiație	Corespondere	Indicații referitoare la mediul electromagnetic
Radiații de înaltă frecvență	Grupul 1	În cadrul dispozitivului energia de frecvență înaltă este folosită doar pentru funcțiile interne. De aceea nivelul radiațiilor de înaltă frecvență este foarte scăzut și nu creează interferențe pentru alte dispozitive electrice.
Radiații de înaltă frecvență CISPR11 Emiterea de componente armonice IEC/EN 61000-3-2 Oscilații/variații de tensiune IEC/EN 61000-3-3	Clasa (B) Clasa (A)	Dispozitivul este potrivit pentru utilizarea în încăperi, inclusiv la domiciliu, conectate la o rețea electrică destinată pentru furnizarea curentului electric în spațiile locuibile.
Descărcări electrostatice IEC/EN 61000-4-2	±6 kV contact ±8 kV aer	Podeaua trebuie să fie din lemn, beton sau plăci ceramice. Dacă podeaua este acoperită cu materiale sintetice, umiditatea relativă trebuie să fie sub 30%.
Procese electrice tranzitorii rapide/ impulsuri IEC/EN 61000-4-4	±2 kV putere	Curentul din rețea trebuie să corespundă standardelor pentru sistemele de furnizare a curentului electric de uz comun.
Variații IEC/EN 61000-4-5	±1 kV regim diferențiat	Curentul din rețea trebuie să corespundă standardelor pentru sistemele de furnizare a curentului electric de uz comun.
Scăderea tensiunii, Întreruperi de scurtă durată și variațiile de tensiune IEC/EN 61000-4-11	<5%UT pe parcursul a 0,5 cicluri 40%UT pe parcursul a 5 cicluri 70%UT pe parcursul a 25 de cicluri <5%UT pe parcursul a 5 secunde	Curentul din rețea trebuie să corespundă standardelor pentru sistemele de furnizare a curentului electric de uz comun. Dacă utilizatorul are nevoie de funcționarea continuă a dispozitivului, se recomandă utilizarea unei surse de curent continuu.
Câmp magnetic IEC/EN 61000-4-8	3A/m	Câmpul magnetic trebuie să corespundă standardelor pentru sistemele de furnizare a curentului electric de uz comun.
Compatibilitatea electromagnetică/EN 61000-4-6	3V, 150 kHz - 80 MHz 8 (pentru dispozitivele de mentținere a vieții)	
Rezistența la câmp electromagnetic de frecvență radio IEC/EN 61000-4-3	3V/m 80 MHz - 2.5 GHz (nu pentru dispozitivele de mentținere a vieții)	

REMARCĂ: UT- curentul alternativ în rețeaua electrică.

Sізге Dr. Frei® CM, Turbo Mini моделін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біз сенімдіміз, аталған құрылғыға шынайы баға беріп, сіз Швейцария өнімдерінің Dr. Frei® сауда маркасының күнделікті тұтынушысы болатыныңызға.

Сіздің небулайзер демікпені емдеу үшін, өкпелердің созылмалы абструктивті ауруларын және басқада респираторлық ауруларды емдеу сұйық дәрілік заттарды аэрозольға айналдыру жолымен, жедел және сенімді түрде жоғары және төменгі тыныс алу жолдарына ену үшін арналады. Небулайзерды қолдануды бастамас бұрын, өтінеміз, қолдану жөніндегі нұсқаулығымен танысыңыз. Ол жердегі, келтірілген талаптарды орындағанда, небулайзердің ұзақ мерзімде жұмыс жасауын қамтамасыз етеді. Барлық сұрақтар бойынша, аталған тауар бойынша, өтінеміз, сіздің мемлекетіңіздегі ресми өкілдігіне немесе Dr. Frei® CM сервистік қызметіне хабарласыңыз.

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ	38
Небулайзер деген не және ол қалай жұмыс жасайды?	38
Небулайзерлік терапия қашан қолданылады?	38
Небулайзерлік терапияның артықшылығы?	38
ҚҰРАЛДЫ ҚОЛДАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ	38
Қауіпсіз жөнінде маңызды ақпарат	38
Керек жарақ жинағы	39
ИНГАЛЯЦИЯЛЫҚ ТЕРАПИЯНЫ ОРЫНДАУ	39
Құралды қолдану	40
Мұрынды шаю үшін саптаманы қолдану. Опция	40
Өуе филтрін ауыстыру	40
ҚҰРАЛДЫ КҮТУ	40
Тазалау	40
Жөндемсіздікті орындау	41
ҚҰРАЛДЫҒЫ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ	41
БЕЛГІЛЕРДІ БАЯНДАУ	41
КЕПІЛДІК	42
КӨРСЕТІМІ ЖӘНЕ АРЫЗЫ ӨНДІРУШІНІҢ ЭЛЕКТРМАГНИТТІ СӨУЛЕЛЕНУ	42

КІРІСПЕ

Небулайзер деген не және ол қалай жұмыс жасайды?

Компрессорлық небулайзер өздігінен құралды баяндайды, сұйық дәрілік заттарды кішідисперсті аэрозольға айналдыратын ауаны қысу арқылы. Аэрозоль үлкен және кіші бөлшектерді сақтайды. Күштел тыныс алғанда үлкен бөлшектер жоғары тыныс алу жолдарына жайғасады, кіші бөлшектер болса бронхылардың төменгі бөлімдеріне жетуіне үлгереді. Осылайша дәрілік заттар бронхиялар талдың барлық бөлімдеріне, енеді. Кіші бронх және альвеоланың жеке альвеол қабырғаларындағы қан тамырларына енеді жоғары дозаларда елеусіз немесе нәтижелі жағымсыз әсерлерде.

Небулайзерлік терапия қашан қолданылады?

Небулайзерлік терапияны қолданады:

- өткір респираторлық ауруларда;
- өкпелердің абструктивті ауруларында;
- тыныс алу жолдарының қабынуында, бронхиталы демікпеде (с.с. созылмалы, тұрақсыз, БА ауыр өрбінде), созылмалы фарингитте;
- тыныс алу жолдарының індетінде;
- бронхиталы және оның бөліміндегі құпия сапасының бұзылуы;
- жөтелудің түрлілігінде.

Небулайзерлік терапияның артықшылығы

Небулайзерлік терапия қабыну аймағына дәрілердің жоғары дозасын жедел, сапалы жетуіне мүмкіншілік береді, емдеуде тиімділігін арттырады, және басқа ағзаларына жайыс әсерлердің туғызуын төмендетеді.

Небулайзерлік терапия дәрілермен емдеуде дәрілік заттардың жұмсалыуында үнемділік әдісімен ерекшеленеді, кеңінен балалар үшін қолданылады, үлкен жастағы адамдармен, әлсіз болған пациентермен.

ҚҰРАЛДЫ ҚОЛДАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

Қауіпсіз жөнінде маңызды ақпарат

- Қолдануды бастамас бұрын нұсқаулықпен мұқият танысыңыз. Қажеттілігіне қарай кейінгі қолдану үшін оны сақтаңыз.
- Құрылғыны тек қана терапиялық мақсатта ингальатор есебінде ғана қолданыңыз. Дәрілік заттардың түрі, режимі қолдану уақыты - медициналық кеңеске сәйкес. Құралды құры тек қана көрсетілген нұсқаулық тәртібіне сәйкес орындау керек, және тек қана, өндіруші талаптарымен сәйкес. Аталған құрал тез жанатын анестезияланатын қоспаны қолдануға келмейді, ауа сақтайтын, ауа тегі, немесе азод тотығымен.


- Құралдың жұмыс жасауына электромагнитті кедергілер, әсер етуі мүмкін, сіздің теледидарыңыздың үздіксіз жұмыс жасауының арқасында туындайтын радио, және т.б. Егер сондай жағдай туындайтын болса, құралды басқа жағдай ауыстырып көріңіз, кедергілер кеткенше, немесе қосыңыз.
- Еш уақытта узартып тоқ сымнын немесе адаптерлерді қолданбаңыз. Қауіпті қызыл кетуді болдырмай сымды қолдануға ұсынылады. Сымды жерлерден алыс ұстаныңыз.
- Ер дайым құралды негізгі тоқ сымнын ажыратыңыз және тазалауды жүргізуден алдын.
- Егер құрал абайсызда суға түсіп кететін болса оған қолыңызды тигізбеңіз. Теқ көзінен оны дереу ажыратып оны қолданбаңыз. Авторланған сервис орталығымен байланысыңыз.
- Дымқыл қолдармен құралға тиіспеңіз.
- Вентиляциялық тесігін бітемеңіз.
- Қолдануды бастамас бұрын құралдың тегіс, тұрақты жерде орналасқандығына көз жеткізіңіз шашыраудың алдын алу үшін.
- Емделуші ұйықтап жатқан кезінде құралды қолданбаңыз.
- Барлық сұрақтар бойынша қызмет атқаратын сервис орталығына хабарласыңыз. Құралды бұзбаңыз. Егер құрал қандай да бір себептермен жұмыс жасамаса, оны сөндіріп қолдану жөніндегі нұсқаулығын қарап шығыңыз.
- Қандайда бір орауыш материалдарын (пластик пакеттерін, картон қораптарын және с.с.) балаларға қол жетімді жерлерде қалдырмаңыз, қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін.
- Аксессуарларды балалардың қол жетімсіз жерлерде сақтаңыз. Құралды балалармен және физикалық мүмкіншілігі шектеулі немесе ақыл есінің шектеулі балалармен қолдану тек қана, қолдану жөніндегі нұсқаулықты оқып шыққан үлкендермен қолданылған жөн.
- Дәрілерге арналған сыйымдылықты балалардан 36 айдан төменгі, қол жетімсіз жерлерде сақтаған жөн. Өйткені оның ішінде майда бөлшектер бар жұтылатын.
- Ер дайым құралды тоқ көзінен ажыратыңыз, қолданылмайтын болса.
- Аксессуардың бір жабдығын жеке қолдануға ұсынылады.
- Дәрілік заттардың қалдықтарын сыйымдылықта қалдырмаңыз және/немесе аксессуарларға терапияны жүргізіп болған соң.
- Тазалау және/немесе құралды қуту құралды сөндіргеннен кейін жүргізілу керек және сымның тоқ көзінен ажырағаннан кейін.
- Сымын тартпаныз немесе құралды, шанышқыны тоқ көзінен ажырату үшін.
- Бұл медициналық құрал үй жағдайларында қолдану үшін арналған, және медициналық кеңеске сәйкес құралды қолдану міндетті. Құрал тек қана нұсқаулықта көрсетілгендей етіп қолданылу керек. Маңызды, қолданушылардың оқып шығуы құралды қалай қолдану керек екендігін білу. Қандайда бір сұрақтар бойынша сіздің дилерге немесе сервис орталығына жүгініңіз.
- Егер құрал шанышқысы тоқ көзіне келмейтін болса, оны ауыстыру үшін білікті маманға жүгініңіз.
- Ауатартқыш тесігін бітемеңіз.
- Құрастыру нұсқаулыққа сәйкес жүргізілу керек, ал қолдану болса өндіруші талаптарымен сәйкес жүргізілу керек. Дұрыс емес құрастыру және/немесе дұрыс емес қолдану құралдың адамдарға зардаптың алып акеуіні болдыруы мүмкін, жануарларға немесе заттарға. Ол үшін өндіруші өз мойнына жауапкершілік алмайды.
- Құралды жуыну немесе шабыну кезінде қолданбаңыз.
- Құралға шаңның ықпалдығын түсірмеңіз (вентиляциялау тесігін бітеуі мүмкін), жылудың (құрал пішінін бүлдіретін), күннің түсуінен немесе басқада атмосфералық агенттерін, құралдың істен шығуына алып келетін.
- Құралды кедергі келтіру мүмкін қайнарларға жақын жерде қолданбаңыз (мәселен жылу қайнары, камин секілді), электр немесе газ жылытқыштары секілді, бұлау қайнарлары бойлер немесе шөпшектер, электромагнитті сәулелену қайнарлары микротолқынды пеш секілді, Wi-Fi құрылғысы).
- Үй жөндіктерінен алыс жерлерде сақтаңыз, пішінін ластайтын тікелей емделушімен байланысқа түсетін, вентиляциялық тесігін бітейтін, немесе терапияның толығымен сапалы орындалуына кері әсерін тигізуі мүмкін.
- Құрал қысылған ауаны шығарады. Жағымсыз әсерлер туындауы мүмкін дәрілік заттарға сезімталдығынан, қолданылатын.

 Электр құралдарын жергілікті жазбалармен сәйкес жою керек, тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды.

АТАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚТЫ ҚҰРАЛДЫҒЫ ҚЫЗМЕТ АТҚАРУ МЕРЗІМІНІҢ АЯҒЫНА ДЕЙІН САҚТАҒЫЗ.

Керек жарақ жинағы

- 1 Мұрын үшін саптамa
- 2 Ауыздық
- 3 Үлкендер үшін маска
- 4 Балалар үшін маска
- 5 Сыйымдылық медикаменттер үшін жоғары бөлігі
- 6 Сыйымдылық медикаменттер үшін төменгі бөлігі
- 7 Сыйымдылық медикаменттер үшін ауа жеткізетін тесік
- 8 Жапқыш
- 9 Әуе түтігі
- 10 Қосымша әуе түтігі (5 дана)

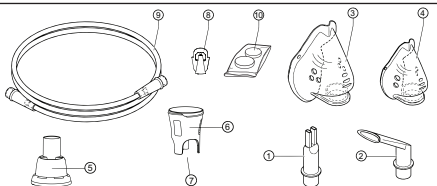

ИНГАЛЯЦИЯЛЫҚ ТЕРАПИЯНЫ ОРЫНДАУ

Бұл ІІа сыныптағы медициналық құрал, сұйық дәрілік заттарын азрозоляға айналдыратын, тыныс алу аппаратына тікелей енгізу үшін арналған.

Құрал дәрілік препараттарды шашыратады, суспензия түрінде, сондайақ ерітінді пішінінде де. Терапевтік әсері келіңде білінеді майлы және/немесе пасталық дәрілік заттарын қолданған кезінде.


Эфирді майларын шашыратпаның!

Сұйық ерітінділерді және/немесе спиртті ерітінділерді ықпал етпеңіз. Дәрілер үшін сыйымдылық және барлық аксессуарлар стирильді емес. Қолда-

нуды бастамас бұрын «Құралды күту» бабын оқып шығыңыз.

Құралды қолдану

1. Құралды тегіс тұрақты жерге орнататын.
2. Көз жеткізіңіз, номиналды қысымның желі қысымына сәйкес екендігіне.
3. Құралды тоқ көзіне қосыңыз.
4. Медикаменттерге арналған сыйымдылықты ашыңыз, (А) екі бөлігін ажыратыңыз сыйымдылықты бұрау қимылдармен.
5. Сыйымдылықтың түбінде медикаменттер үшін жапқышты салыңыз, (В) суретте көрсетілгендей етіп.
6. Сыйымдылықтың төменгі бөлігін медицинаменттер үшін (С) дәрілік заттармен толтырыңыз. Қосымша: сыйымдылықтың төменгі бөлігінде медицинаменттер үшін түсінікті болатындай белгілер көрсетілген.
7. Сыйымдылықты медицинаменттерге арналған, жабыңыз екі бөліктерін (D) бұрау қимылдармен қосу арқылы.
8. Әуе түтігін (9) қосыңыз медицинаменттер үшін (Е) сыйымдылығына.
9. Әуе түтігін (9) құралдағы ауа үшін тесігіне қосыңыз.
10. Қажетті аксессуарларды медицинаменттер үшін сыйымдылыққа қойыңыз: масканы, ауыздықты немесе (F) мұрын үші саптаманы.
11. Құрылғына қосыңыз, қосқышты ON (Қосу) басу арқылы.
12. Құралды қолданғаннан кейін, құралды сөндіріңіз және желіден ажыратыңыз. Құралды қайтадан қосудан бұрын көз жеткізіңіз, белме температурасына дейін суығандығына.

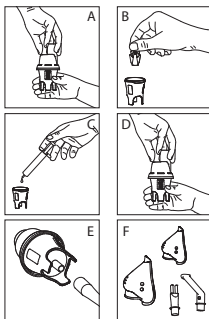


ТЕРАПИЯНЫ ДҒЫС ҚОЛДАНУ ҮШІН ҰСЫНЫМ

- Ыңғайлы етіп тік отырыңыз.
- Егер маска қолданылатын болса (үлкендер үшін немесе балалар үшін), көз жеткізіңіз, бетіңізге дұрыс жанасқандығына. Маскада тынысты шығару фазасы үшін тесігі бар. Тыныс алыңыз жеңіл, және әр бір демде қысқа үзіліс жасап отырыңыз.
- Егер ауыздық қолданылатын болса, оны қысылған ерінмен тіс арасында ұстаңыз. Ауыз арқылы тыныс алыңыз.
- Егер мұрын үшін саптаманы қолданылса, оны мұрыныңызға жақындатыңыз. Мұрын арқылы тыныс алыңыз.
- Ингаляция тәмамдады, аэрозоль келуі тоқтатылса.

Мұрынды шаю үшін саптаманы қолдану. Опция

Мұрынды шаю үшін саптаманы аталған компрессорлық небулайзерге қосымша опция ретінде алуға болады. Мұрынды шаю үшін саптаманы мұрынды шаю, тазалау үшін және тұмау және созылмалы ринитті емдеу үшін арналады. Онымен қолдану үшін, келесідей нұсқаулар орындаңыз:

1. (a) жоғарғы бөлігін бұрау қимылдармен ажыратыңыз.
2. (b) Сыйымдылықты медицинаменттер үшін толтырыңыз.
3. (b) Жапқышты салыңыз.
4. Мұрынды шаю үшін саптаманы жабыңыз, екі бөліктерін бұрау қимылдары арқылы.
5. (d) Түтікті ауақаблдағышқа қосыңыз.
6. Саптаманы танауға келіп қойыңыз. Оны мұрыңызға салмаңыз. Мұрын арқылы тыныс алыңыз.
7. Терапия аяқталғасын, мұрынды шаюға арналған саптаманы жақсылап шайыңыз.

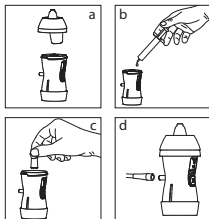


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Жатып орындамаңыз. Сыйымдылықты дәрілер үшін 45° астам бұрышта еңкейтуге болмайды. (F) Аксессуарларды жақсы салып, тікелей күн сәулелерінен, жылудан қорғалатын жерде сақтаңыз.

Әуе фильтрін ауыстыру

Филітрді 30 сағат жұмыстан соң ауыстырған жөн, немесе ол сұр түске айналған кезінде. (H) Қосымша әуе филітрі. Филітрді ауыстыру үшін, жалпақ бұрағыш көмегімен қақпағын көтеріңіз, I суретінде көрсетілгендей етіп. (10) Ескі филітрді шығарып жанасын салыңыз. Бейтәртін қақпағын филітр пішініне орнатыңыз, оның құралдың жоғарғы жеріне тығыз келгендігіне көз жеткізіңіз.

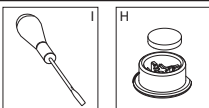

ҚҰРАЛДЫ КҮТУ

Тазалау

Ингаляцияның әр сеансынан кейін құралды тоқ көзінен ажыратыңыз және құралды және оның аксессуарларын тазалаңыз. Назар аударыңыз: тек қана құрал жабығында келетін аксессуарларды ғана қолданыңыз, басқа аксессуарлар құралдың тиімділігіне кері әсер беріуі мүмкін.

АУЫЗДЫҚТЫ ЖӘНЕ МҰРЫН ҮШІН САПТАМАНЫ ТАЗАТУ

Бұл аксессуарларды мұқият тазарту үшін таза суды қолданыңыз. Оларды стирильдеуге болады 5-10 минут су ішінде қайнатып немесе химиялық

дезинфекциялық заттарға салып, нұсқаулыққа сәйкес, және таза сумен жақсылап шайыңыз. Оларды өздігінен кебуіне қалдырыңыз.

Сыйымдылықты МЕДИКАМЕНТТАР ҮШІН ТАЗАРТУ

Қолданып болғаннан кейін, емқосыткі дәрілер үшін өкілігің ажыратыңыз. Оларды сабынмен және ыстық сумен жуыңыз және жақсылап шайыңыз. Су қалдықтарын, жұмсақ таза және құрғақ матамен сүртіңіз, және оларды өздігінен таза жерде құрғау үшін қалдырыңыз. Стерильдеу үшін сыйымдылықты медикаменттер үшін суық стиральді ерітіндімен бетін жабыңыз, стерилизатор қаптамасындағы нұсқауға сәйкес. Ұсынылады әр емделуші үшін жеке дара сыйымдылықты медикаменттер үшін қолдануға, мерзімі 6 айға дейін немесе 120 қолданулы үшін. Сыйымдылық медикаменттер үшін қайтапнаңыз. Абылай масканы және түтігін дезинфекциялық құралдарды қолдана отырып жуыңыз.

МИКРОБАРМЕН ЛАСТАНУ

Микробтардың немесе вирустардың патологиялық туындауы, жұғуы мүмкін, құрал және аксессуарлар басқа емделушілермен қолданылмауы керек.

Жөндөмсіздікті орындау

МӘСЕЛЕ	ІС ӨРЕКЕТ
Құрал қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> • Құрал шанышқысы тоқ көзіне дұрыс қосылғандығына көз жеткізіңіз. • (1) Қосқышта қосу режимі таңдалғандығына көз жеткізіңіз.
Құрал қосылған, бірақ ол шашыратпайды.	<ul style="list-style-type: none"> • (8) Сыйымдылық медикаменттер үшін жабықш ішіне дұрыс салынғандығына көз жеткізіңіз. • (9) Көз жеткізіңіз, әуе түтігінің зақымданбағандығына және майыспағандығына. • (10) Көз жеткізіңіз, әуе фильтри жабылмағандығына. Қажеттілігіне сай фильтриді ауыстырыңыз. • Көз жеткізіңіз, сыйымдылықтың медикаменттер үшін дәрілік заттармен толғандығына.
ҚОСЫМША: Құралдың қалыпты жұмыс істеуі, бірнеше рет төкөрің қайтапнаңызда орындамайтын болса, онда Dr. Fre! [®] сервис орталығымен хабарласыңыз.	

ҚҰРАЛДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Примиді айналатын поршен, майламасы. IIA сынылындағы медициналық құрал 93/42/ЕЕС директиваға сәйкес (Медициналық құралдар бойынша директива). Linear сыйымдылығы медикаменттер үшін.

Бөлшектер өлшемі: 3 μm MMAD (EN13544-1); **Құрал сипаттамасы:** ингаляторлық компрессор;

Шашырату жылдамдығы, мл/мин.: 0,3±0,05 мл/мин; **Әуе ағыны (максималды):** 15±2 л/мин; **Сыйымдылық дәрілер үшін:** 2-10 мл;

Қалдық көлемі, мл: 0,85±0,2 мл; **Шу деңгейі:** төмен (55 Дб аз); **Кезекті қолдану:** 30 минут-ON (ҚОСУ)/30 минут - OFF (СӨНДІРУ);

Аксессуарлар: әуе түтігі (1,0 м), үлкендер үшін маска, балар үшін маска, ауыздық, мұрын үшін саптамa, қосымша әуе түтіктері (5 дана); **Мұрынды шаю үшін саптамa:** опция; **Қуаттылығы:** 220 В/50 Гц; **Тұтыну сымның ұзындығы:** 1,4 м;

Саптамғы: 1,3 кг; **Ауқымы:** 167×106×164 мм; **Қуаттылығы:** 120 ВА;

Қолдану шарттары:

Қоршаған ортаның жеткілікті температурасы: кемінде 5°C тен - максимум 40°C дейін

Ауа ылғалдығы: кемінде 15% салыстырмалы ылғалдығы - максимум 93% салыстырмалы ылғалдығы

Атмосфералық қысым: кемінде 700гПа - максимум 1060гПа (максималды қолдану мөлшері ≤ 2000м)

Сақтау шарттары:

Қоршаған ортаның жеткілікті температурасы: кемінде -25°C тен - максимум +70°C дейін

Ауа ылғалдығы: кемінде 0% салыстырмалы ылғалдығы - максимум 93% салыстырмалы ылғалдығы

Атмосфералық қысым: кемінде 500гПа - максимум 1060гПа (максималды қолдану мөлшері ≤ 2000м).




* Техникалық өзгерістер және дизайн өзгертілуі алдын ала хабарлаусыз жүргізілуі мүмкін.






Аталған құралдың күтілетін қызмет көрсету мерзімі - 2000 цикл терапиясының, орташа ұзақтығы 8 минутты құрайды.

Электрмедициналық құралдары арнайы күтімді талап етеді. Құрастыру және қолдану кезінде, электрмагнитті сыйымдылығына сәйкес, қажетті, олардың құрастырылуы және/немесе қолданылуы өндірушінің техникалық шарттарымен сәйкес. Құралдың басқа құралдармен электрмагнитті байланысқа түсуі мүмкін, негізінде анализ үшін басқа құралдармен және өңдеу үшін.

Радио және мобильді телекоммуникациялық құралдарда, және портативті жоғары жиілікті (ұялы телефондар және сымсыз қосылғыштар) электр медициналық құралға кедергі келтіруі мүмкін.

БЕЛГІЛЕРДІ БАЯНДАУ

СИМВОЛ	МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ	СИМВОЛ	МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
~	Ауыспалы тоқ	CE 0051	93/42/ЕЕС Директиваға сәйкес CE Таңбалау
	Екіжақты айыру		Жуынғанда немесе шайынғанда қолданбаңыз
	Қолданар тип бөлігі BF	I/ON	Қосу режимі

	Қолдану жөніндегі нұсқаулықты оқу міндеттілігі	O/OFF	Сөндіруауы режимі
	Жалпы ескертетін символы		Қолдану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз
IP 21	Қатты заттардың өтуінен қорғау және сұйықтан (12 мм астам, қатты заттардың өтуінен қорғалған бармақ көмегімен өтуінен сақталған; су тамшыларының өтуінен қорғалған, тұрған күйінде бағытталған)		Құрғақ жерде сақтаңыз
	Аталған өнім (барлық қосымша аксессуарларды қосқанда) қызмет атқару мерзімі біткесін қолданушымен, немесе оның диллерімен, электронды немесе электронды көліктер көмегімен жойылатын бөлімдерге жеткізілуі керек.		

КЕПІЛДІК

Құралға сатып алған кезден бастап 2 жылға кепілдік береді. Кепілдік, жұмсалатын жабдықтарға таралмайды. Кепілдік жарамды болып есептеледі, кепілдік таланының бар болуында, ресми өкілдіктен толтырылған, сатып алынған күнді дәлелдейтін, және кассалық түбір тектің бар болуында ғана.

- Компания өндіруші және ресми диллер өз мойнына жауапкершілік жүктемейді егерде, құралдың зақымдалғанына немқұрайсыз салбырт қолдану салдарынан туындаған болса.
- Құрастырудың барлық түрлері, модификациялар, реттеулер немесе құралға жөндеу жұмыстары сіздің мемлекетіңіздегі **Dr. Frei®** СМ ресми өкілдігінің арнайы сервис орталығының жұмысшыларымен жүргізілуі керек.

Жөндеу немесе құрамдас бөлшектерін сатып алу үшін сіздің мемлекетіңіздегі **Dr. Frei®** СМ нің ресми өкілдігіне жүгініңіз.

КӨРСЕТІМІ ЖӘНЕ АРЫЗЫ ӨНДІРУШІНІҢ ЭЛЕКТРМАГНИТТІ СӘУЛЕЛЕНУ

Құрал азрозольді терапия үшін арналған электрмагнитті ортада қолданылатын, төменде көрсетілгендей:

Сәуелену тесті	Сәйкес	Электрмагнитті орта жөніндегі көрсетілім
ЖОК сәуелену	1 тобы	Құралда жоғарғы жиілік тек қана оның ішкі функциялары үшін қолданылады. Сондықтан ВЧ сәуелену деңгейі өте төмен, және басқа электр құралдарына кедергі келтірмейді.
ЖОК сәуелену CISPR11 Сәуелену гармониялық құрамдастардың МЭК/EN 61000-3-2 Балқу/пульсация кернеу МЭК/EN 61000-3-3	(B) тобы (A) тобы	Құрал қандай да бір жайларда қолдануға келе береді, сондайақ үй жағдайларында да, стандартты электр желілеріне қосылған, жайлардағы электрмен жабдықтау үшін арналған.
Электрстатикалық разрядтары МЭК/EN 61000-4-2	±6кВ контакт ±8кВ ауа	Еден ағаш болуы тиіс, бетонды, немесе керамикалық плит-камен қапталған. Егер еден синтетикалық матамен қапталған болса салыстырмалы ылғалдығы 30% кем болмауы тиіс.
Жедел электр өтпелі процесстері/ всплески МЭК/EN 61000-4-4	±2кВ қуаттылығы	Желідегі электр қуаты жалпы қолданыстағы электр қамсыздандыру стандарттарына сәйкес болуы керек.
Секіріс МЭК/EN 61000-4-5	±1кВ дифференциальдық режим	Желідегі электр қуаты жалпы қолданыстағы электр қамсыздандыру стандарттарына сәйкес болуы керек.
Кернеу төмендеуі, қысқармерзімді үзіліс және кернеу ауысуы МЭК/EN 61000-4-11	<5%UT 0,5 цикл ұзақтығында 40%UT 5 циклдер ұзақтығында 70%UT 25 циклдер ұзақтығында <5%UT 5 секунд ұзақтығында	Желідегі электр қуаты жалпы қолданыстағы электр қамсыздандыру стандарттарына сәйкес болуы керек. Егерде қолданушыға үздіксіз құралдың жұмыс істеуі қажет болса, құрал үшін үздіксіз қайнарды қолдануға ұсынылады.
Магнит өрісі МЭК/EN 61000-4-8	3А/м	Магнит өрісі жалпы қолданыстағы электр қамсыздандыру стандарттарына сәйкес болуы керек.
Электрмагнитті сыйымдылығы/ EN 61000-4-6	3В (сер.кв.) 150 кГц - 80 МГц 8 (құралдар үшін қамтамасыз ету)	
Радиожиілік электрмагнит өрісінің тұрақтылығы/EN 61000-4-3	3В/м 80 МГц - 2.5ГГц (құралдар үшін емес қамтамасыз ету)	

ҚОСЫМША: UT - кернеу ауыспалы тоқтың көректену желісіндегі.

BG УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА КОМПРЕСОРЕН ИНХАЛАТОР TURBO MINI

Благодарим Ви, че избрахте инхалатор TM Dr. Frei® модел TURBO MINI. Ние сме сигурни, че, оценявайки по достойнство качеството на този уред, Вие ще станете постоянен потребител на продуктите на швейцарската търговска марка Dr. Frei®.

Вашият инхалатор се използва с цел повишаване ефикасността на лечението на астма, хронични обструктивни заболявания на белите дробове и на други респираторни заболявания посредством превръщането на течните лекарствени средства в аерозол, който бързо и безпроблемно прониква както в горните, така и в долните дихателни пътища.

Преди да използвате инхалатора, моля, внимателно прочетете инструкцията. Спазването на изискванията, изброени в нея, осигурява непрекъсната работа на инхалатора за дълъг период от време. По всички въпроси относно този уред, моля, обръщайте се към официалния представител или към сервизния център на TM Dr. Frei® във Вашата страна.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД.....	43
Какво представлява инхалаторът и как работи?.....	43
Кога се прилага инхалаторна терапия?.....	43
Предимства на инхалаторната терапия.....	43
ПОДГОТОВКА НА УРЕДА ЗА УПОТРЕБА.....	43
Важна информация за безопасност.....	43
Комплект акесоари.....	44
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНХАЛАЦИОННАТА ТЕРАПИЯ.....	45
Използване на уреда.....	45
Използване на накрайника за нос. Опция.....	45
Смяна на въздушния филтър.....	45
ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА.....	46
Почистване.....	46
Отстраняване на повреди.....	46
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УРЕДА.....	46
ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ.....	47
ГАРАНЦИЯ.....	47
НАСОКИ И ЗАЯВКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ИЗЛЪЧВАНЕ.....	47

УВОД

Какво представлява инхалаторът и как работи?

Компресорният инхалатор представлява уред, който преобразува течното лекарство в фино вещество във фин аерозол под въздействието на състен въздух. Аерозолът съдържа големи и малки частици. При вдишване под въздействието на силата на тежестта големите частици се отлагат по стените на горните дихателни пътища, а малките частици успяват да достигнат долните отделения на бронхите.

По този начин лекарственото вещество попада във всички отделения на бронхиалното дърво, включително и в най-малките бронхи и алвеоли, и прониква в кръвоносните съдове по стените на алвеолите във високи терапевтични дози при незначителен или нулев страничен ефект.

Кога се прилага инхалаторна терапия?

Инхалаторната терапия се прилага при:

- остри респираторни заболявания; обструктивни заболявания на белите дробове;
- хронични възпалителни процеси на дихателните пътища, като хроничен бронхит, бронхиална астма (в т.ч. при хронична, нестационарна, при тежко обострена БА), хроничен фарингит;
- инфекции на дихателните пътища;
- влошаване качеството на секрета и неговото отделяне в бронхите;
- различни видове кашлица.

Предимства на инхалаторната терапия

Инхалаторната терапия дава възможност за бързо въздействие върху зоната на възпаление посредством високи дози лекарство, което от своя страна повишава ефективността на провежданото лечение и понижава риска от странични въздействия върху другите органи. Инхалаторната терапия е най-икономичният начин за повишаване ефикасността при лечение от гледна точка на целевото изразходване на лекарственото вещество, прилага се широко за деца, възрастни, немощни пациенти.

ПОДГОТОВКА НА УРЕДА ЗА УПОТРЕБА

Важна информация за безопасност

- Преди използване внимателно прочетете инструкцията. Запазете я за по-нататъшно използване в случай на необходимост.
- Използвайте уреда само като инхалатор за терапевтични цели. Видът лекарство, режимът и продължителността на използване - съгласно медицинските предписания. Монтирането на уреда трябва да се извърши стриктно в съответствие с указанията в тази инструкция и само по предназначение, посочено от производителя.

- Този уред не е подходящ за използване със запалителни анестезиращи смеси, съдържащи въздух, кислород или азотен оксид.
- Върху работата на уреда могат да се отразят електромагнитни смущения, предизвикани от смущения в работата на Вашия телевизор, радио и т.н. Ако това се случи, опитайте се да преместите уреда, докато смущението изчезне, или да го включите в друг контакт.
- Никога не използвайте удължителни или адаптери. Препоръчва се използването на мрежов кабел, за да се предотврати опасно прегряване. Дръжте кабела на разстояние от горещи повърхности.
- Винаги изключвайте уреда след използване и преди почистване.
- Не докосвайте уреда, ако случайно падне във вода. Изключете го от електрическата мрежа и не го използвайте. Свържете се с оторизиран сервизен център.
- Не докосвайте уреда с влажни ръце.
- Не блокирайте вентилационните отвори.
- По време на използване се уверете, че уредът е поставен върху равна и стабилна повърхност с цел избягване на разливане.
- Не използвайте уреда, когато пациентът спи.
- По всички въпроси относно поддръжката на уреда, се обръщайте към сервизния център. Не отваряйте уреда. Ако уредът не работи както трябва, го изключете и прочетете инструкцията за употреба.
- Не оставяйте никакви опаковки (найлонови пликове, картонени кутии и т.н.) на достъпно за деца място с цел избягване на опасни ситуации.
- Съхранявайте аксесоарите на недостъпно за деца място. Използването на уреда от деца и хора с ограничени физически или умствени способности трябва да се извършва само под внимателното наблюдение на възрастен, който е запознат с тази инструкция за употреба. Съхранявайте контейнерчето за медикаменти на места, недостъпни за деца под 36 месечна възраст, тъй като в него се съдържат малки частици, които детето може да поглъне.
- Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате.
- Препоръчва се индивидуалното използване на един медицински комплект аксесоари.
- Не оставяйте остатъци от лекарственото вещество в контейнерчето за медикаменти и/или в аксесоарите след края на терапията.
- Почистването и/или поддръжката на уреда се извършва само след като уредът е изключен и захранващият кабел е изваден от контакта.
- Не опъвайте кабела, нито самия уред, за да извадите щепсела от контакта.
- Това е медицинско изделие за използване в домашни условия и е необходимо да се използва съгласно медицинските предписания. Уредът трябва да се използва както е посочено в инструкцията за употреба. Важно е пациентите да са прочели и да са запознати как да използват и да боравят с уреда. По всички въпроси се обръщайте към Вашия дилър или в сервизния център.
- Ако щепселът на уреда не съвпада с контакта, се свържете с квалифициран специалист, за да го замени с подходящ. Не използвайте адаптери, контакти-тройка и/или удължители.
- Не блокирайте впускателния отвор за въздух.
- Монтажът трябва да се извърши в съответствие с инструкциите, а използването на уреда – както е посочил производителят. Неправилният монтаж и/или неправилното използване на уреда може да доведат до нанасяне на щети върху хора, животни или вещи. Производителят не носи отговорност за това.
- Не използвайте уреда, когато си взимате вана или душ.
- Не излагайте уреда под въздействието на прах (която може да блокира вентилационните отвори), топлина (която може да деформира повърхността), слънчева светлина или други атмосферни влияния, които могат да доведат до счупване на уреда.
- Не използвайте уреда близо до източници на възможни смущения (например, източници на топлина, като камини, електрически или газови нагреватели; източници на пара, като бойлери или чайници, електромагнитни източници на излъчване, като микровълнови печки, Wi-Fi устройства).
- Съхранявайте уреда на места, недостъпни за домашни любимци, които могат да замърсят пряко повърхността на непосредствен допир с пациента, да блокират вентилационните отвори или като цяло да влияят негативно върху качеството на провежданата терапия.
- Уредът генерира състен въздух. Появяват се странични явления поради чувствителност към лекарствените средства, които се използват.




Електрическите уреди трябва да се третират съгласно местното законодателство, да не се извърлят заедно с битовите отпадъци.

ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЦЕЛИЯ СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА.

Комплект аксесоари

- 1 Накрайник за нос
- 2 Мундшук
- 3 Маска за възрастни
- 4 Маска за деца
- 5 Контейнерче за медикаменти - горна част
- 6 Контейнерче за медикаменти - долна част
- 7 Контейнерче за медикаменти - отвор за пускане на въздух
- 8 Клапа
- 9 Въздушна тръбичка
- 10 Резервни въздушни филтри (5 бр.)

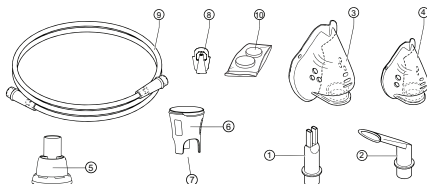

ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ИНХАЛАЦИОННАТА ТЕРАПИЯ


Това е медицински уред клас IIa, който преобразува течния лекарствен препарат в аерозол, за да го въпръсне непосредствено в дихателния апарат. Уредът разпръсква лекарствения препарат като под формата на суспензия, твaк и под формата на разтвор. Терапевтичният ефект е по-слабо изразен когато се използват маслени и/или пастообразни лекарства.

Не разпръсквайте етерни масла!

Не затопляйте течни разтвори и/или спиртни разтвори. Контейнерчето за медикаменти и всички аксесоари не са стерилни. Преди да започнете да използвате уреда прочетете раздел „Поддръжка на уреда“.

Използване на уреда

1. Поставете уреда върху равна стабилна повърхност.
2. Уверете се, че номиналното напрежение отговаря на напрежението в мрежата.
3. Включете уреда в контакта.
4. Отворете контейнерчето за лекарства, отделете двете му части рис. (A) със завъртащо движение.
5. Поставете клапата на дъното на контейнерчето за медикаменти, както е показано на рис. (B).
6. Запълнете долната част на контейнерчето за медикаменти с лекарството, рис. (C). Забележка: На долната част на контейнерчето за медикаменти са написани насочващи обяснения.
7. Затворете контейнерчето за медикаменти като съедините двете му части със завъртащо движение (D).
8. Присъединете въздушната тръбичка (9) към контейнерчето за медикаменти (E).
9. Присъединете въздушната тръбичка (9) към отвора за въздух.
10. Поставете в контейнерчето за медикаменти нужните аксесоари: маска, мундщук или накрайник за нос (F).
11. Включете уреда, като натиснете бутон ON (ВКЛ).
12. След използване, изключете уреда като го изключите и от мрежата. Преди да го включите отново се уверете, че е истинално до стайна температура.

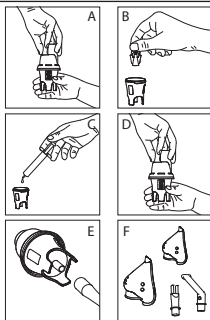


ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛАГАНЕ НА ТЕРАПИЯТА

- Заемете удобна вертикална поза.
- Ако използвате маска (за възрастни или за деца), се уверете, че тя плътно приляга към лице. В маската има отвори за въздушния поток по време на фазите на вдишване. Дишайте леко и правете кратки паузи след всяко вдишване.
- Ако използвате мундщук – дръжте го между зъбите, със стиснати устни. Дишайте през устата.
- Ако използвате накрайник за нос – приближете го към носа. Дишайте през носа.
- Инхалацията е приключила, когато спира да се образува аерозол.

Използване на накрайника за нос. Опция

Накрайникът за промиване на нос може да се закупи като допълнителен аксесоар към този компресорен инхалатор. Накрайникът за промиване на нос е предназначен за почистване лигавицата на носа и лечение на хрема и хронични ринити. За да го използвате, следвайте долните инструкции:

1. Махнете горната част с развъртащо движение (a).
2. Напълнете контейнерчето за медикаменти (b).
3. Вкарайте клапата (c).
4. Затворете накрайника за промиване на нос като съедините двете части със завъртащо движение.
5. Присъединете тръбичката към въздухопровода (d).
6. Приближете накрайника за промиване на нос към ноздрата. Не го пъхайте вътре в носа. Дишайте през носа.
7. След края на терапията внимателно почистете накрайника за промиване на нос.

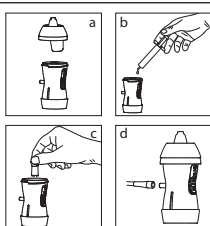


ВНИМАНИЕ:

Не вдишайте в хоризонтално положение. Не наклоняйте контейнерчето за медикаменти под ъгъл по-голям от 45°. Съхранявайте аксесоарите в добре проветрено, защитено от топлина и пряка слънчева светлина място (F).

Смяна на въздушен филтър

Филтърът трябва да се сменя след 30-часово използване или когато придобие сив цвят. Резервни въздушни филтри (H). За да смените филтър – отворете капачката с помощта на плоска отвертка, както е показано на рисунка I. Извадете стария филтър и сложете новия (10). Закрепете фиксиращата капачка на филтърта в корпуса като се уверите, че тя плътно ляга на повърхността.

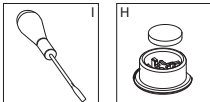

Почистване

След всеки инхалационен сеанс изключвайте уреда от контакта и почиствайте уреда и неговите аксесоари. Внимание: използвайте само аксесоари, които вървят в комплект с уреда, други аксесоари могат да влошат качеството инхалацията.

ПОЧИСТВАНЕ НА МУНДЩУКА И НАКРАЙНИКА ЗА НОС

Използвайте питейна вода за щателно почистване на тези аксесоари. Може да ги стерилизирате като ги изварите за 5-10 минути във вода или да използвате химичен дезинфектант, като следвате инструкциите, и след това ги изплакнете с питейна вода. Оставете ги да изсъхнат по естествен начин.

ПОЧИСТВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРЧЕТО ЗА МЕДИКАМЕНТИ

След употреба, отделете двете части на контейнерчето за медикаменти, измийте ги със сапун и гореща вода и обилно ги изплакнете. Подсушете останалата вода с мека, чиста и суха кърпа и ги оставете да изсъхнат по естествен начин на чисто място.

За стерилност покрийте контейнерчето за медикаменти със студен стерилизиращ разтвор като следвате инструкциите върху опаковката на стерилизатора. Препоръчва се индивидуално използване на контейнерчето за медикаменти за всеки отделен пациент за срок до 6 месеца или за 120 използвания. Не изварявайте контейнерчето за медикаменти. Щателно измивайте маската и тръбичката като използвате само дезинфектант.

ЗАМЪРСЯВАНЕ С МИКРОБИ

В случай на патология с микробен или вирусен произход, където има вероятност от заразяване, уредът и аксесоарите не трябва да се използват заедно с други пациенти.

Отстраняване на проблеми при работа

ПРОБЛЕМ	ДЕЙСТВИЕ
Уредът не се включва.	<ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че щепселът е поставен правилно в контакта. • Уверете се, че е избран правилният режим за включване върху превключвателя (I).
Уредът е включен, но не може да разпръсква.	<ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че клапата е поставена в контейнерчето за медикаменти (8). • Уверете се, че въздушната тръбичка не е прегъната, не е повредена (9). • Уверете се, че въздушният филтър не е блокиран, не е замърсен. При необходимост, сменете филтъра (10). • Уверете се, че контейнерчето за медикаменти е пълно с лекарство.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не успеете да възобновите нормалната работа на уреда, въпреки многократните проверки, се свържете със сервизния център на Dr. Fre![®].

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УРЕДА

Ротационно бутало за притискане, без смазване. Медицинско изделие клас IIA в съответствие с директива 93/42/ЕЕС (Директива за медицинските изделия). Контейнерче за медикаменти Lineair.

Размер на частиците: 3 µm MMAD (EN13544-1); **Описание на уреда:** компресорен инхалатор;

Скорост на разпръскване, мл/мин.: 0,3 ± 0,05 мл/мин; **Въздушен поток (максимален):** 15 ± 2 л/мин; **Контейнерче за лекарство:** 2 - 10 мл;

Остагъчен обем, мл: 0,85 ± 0,2 мл; **Ниво на шума:** ниско (по-малко от 55 dB);

Периодичност на използване: 30 минути ON (ВКЛ)/30 минути - OFF (ИЗКЛ);

Аксесоари: въздушна тръбичка (1,0 м), маска за възрастни, маска за деца, мундшук, крайник за нос, резервни въздушни филтри (5 бр.).

Накрайник за нос: опция; **Мощност:** 220 В/50 Хц; **Дължина на захранващия кабел:** 1,4 м; **Тегло:** 1,3 кг;

Табарити: 167 × 106 × 164 мм; **Мощност:** 120 ВА;

Условия за употреба:

Допустима температура на околната среда: минимум 5°С - максимум 40°С

Влажност на въздуха: минимум 15% относителна влажност - максимум 93% относителна влажност

Атмосферно налягане: минимум 700хПа - максимум 1060хПа (максимална височина при употреба ≤ 2000м)

Условия на съхраняване:











Допустима температура на околната среда: минимум -25°С/максимум +70°С

Влажност на въздуха: минимум 0% относителна влажност - максимум 93% относителна влажност

Атмосферно налягане: минимум 500 гПа - максимум 1060 гПа

* Възможни са технически изменения и изменения на дизайна без предварително уведомяване. Очакван срок на експлоатация на този уред - 2000 цикъла на терапия, средната продължителност на които е 8 минути. Електроmedizinските уреди изискват особена грижа. По време на мониторирането и използването им с оглед изискванията за електромагнитна съвместимост, е необходимо те да бъдат монтирани и/или използвани съгласно техническите условия на производителя. Съществува вероятност от възникване на електромагнитно взаимодействие с други уреди, в частност с други уреди за анализ и обработка. Радио и мобилни телекомуникационни устройства, също и портативни високочестотни (мобилни телефони и безжични устройства) могат да причинят смущения в работата на електроmedizinските уреди.

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ	СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ
	Променлив ток	 0051	Маркировка на ЕС съгласно Директива 93/42/EEC
	Двойна изолация		Да не се използва при взимане на душ или вана
	Приложима част тип VF	I/ON	Режим ВКЛ
	Задължително да се прочете инструкцията за употреба	O/OFF	Режим ИЗКЛ
	Общ предупреждаващ символ		Прочетете инструкцията за употреба
IP 21	Защита от проникване на твърди предмети и течности (защитен от проникване на твърди предмети по-големи от 12 мм, защитен от проникване с пръст; защитен от попадане на капки вода, насочени вертикално)		Съхранявайте на сухо място
	Този продукт (включително всички съпровождащи го аксесоари) в края на своята експлоатация трябва да бъде занесен от потребителя или от дилъра в пункт по оползотворяване на електрически или електронни машини.		

ГАРАНЦИЯ

Уредът е с гаранция 2 години от датата на закупуване. Гаранцията не се отнася за компонентите от комплекта. Гаранцията е валидна само при наличие на гаранционна карта, попълнена от официален представител, която потвърждава датата на продажба и касовата бележка.

- Компанията-производител и официалният представител не носят отговорност за счупване или повреждане на уреда поради неправилно или нехайно отношение.
- Всички видове слобки, модификации, регулировки или ремонт на уреда трябва да се извършват само от служители в специализираните сервисни центрове на официалния представител на TM Dr. Frei® във Вашата страна.

За ремонт или закупуване на компоненти от комплекта се обръщайте към сервисния център на официалния представител на TM Dr. Frei® във Вашата страна.

НАСОКИ И ЗАЯВКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ-ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ИЗЛЪЧВАНЕ

Уредът за аерозолна терапия е предназначен за употреба в електромагнитна среда, описана по-долу:

ТЕСТ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ	СЪОТВЕТСТВИЕ	УКАЗАНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СРЕДА
VЧ излъчване CISPR11	Група 1	В уреда енергията на високите честоти се използва само за неговите вътрешни функции. Затова нивото на VЧ излъчване е много ниско и не създава смущения за другите електрически уреди.
VЧ излъчване CISPR11 Излъчване на хармоничните съставни части MEK/EN 61000-3-2 Колесания/пулсация на напрежението MEK/EN 61000-3-3	Клас (B) Клас (A)	Уредът е подходящ за употреба вътре в помещението, включително в домашни условия, включен към стандартна електрическа мрежа, предназначена за электроснабдяване на жилищни помещения.
Електростатични изхвърляния MEK/EN 61000-4-2	±6кВ контакт ±8кВ въздух	Подът трябва да е дървен, бетонен или покрит с керамични плочки. Ако подът е покрит със синтетичен материал, относителната влажност трябва да бъде по-малка от 30%.

Бързи електрически преходни процеси/разпръсквания MEK/EN 1000-4-4 ± 2 kV мощност	± 2 kV мощност	Електрическата енергия в мрежата трябва да отговаря на стандартите за електроснабдителни системи за общо ползване
Свързки MEK/EN 61000-4-5	± 1 kV диференциален режим	Електрическата енергия в мрежата трябва да отговаря на стандартите за електроснабдителни системи за общо ползване
Понижаване на напрежението, краткотрайни прекъсвания и промяна в напрежението MEK/EN 61000-4-11	<5%UT в продължение на 0,5 цикъла 40%UT в продължение на 5 цикъла 70%UT в продължение на 25 цикъла <5%UT в продължение на 5 секунди	Електрическата енергия в мрежата трябва да отговаря на стандартите за електроснабдителни системи за общо ползване. Ако потребителят се нуждае от непрекъсната работа на уреда, се препоръчва използването на непрекъсваемо захранване.
Магнитно поле MEK/EN 61000-4-8	3A/m	Магнитното поле трябва да отговаря на стандартите за електроснабдителна система за общо ползване.
Съвместимост електромагнитна MEK/EN 61000-4-6	3В (сер.кв.) 150 кХц - 80 МХц 8 (за животоосигуряващи уреди)	
Устойчивост към радиочестотно електромагнитно поле MEK/EN 61000-4-3	3В/м 80 МХц - 2.5ГХц (не за животоосигуряващи уреди)	

ЗАБЕЛЕЖКА: UT - напрежение на променлив ток в захранващата мрежа.



Manufactured by the order of: FreiCare Swiss GmbH,
Seepark 6, CH - 9422 Staad SG, **SWITZERLAND**,
phone: + 41 71 855 07 55.

■ ELETTRPLASTICA SPA, Via Del Commercio 1 - 25039 Travagliato (BS), Italy.

medpack-group.com

